

かんたんマニュアルでは起動と終了方法、付属機器の各部名称を紹介しています。詳細は、取扱説明書・ソフトウェア内のマニュアルをよくお読みください。

起動に必要なケーブル類

付属の取扱説明書の内容と整合をとるため、アルファベットの順番がとんでいます。セット構成など詳細に関しましては、取扱説明書をご覧ください。

F: HDMI無線アダプター



G: 電源ケーブル (HDMI用)



H: 電源ケーブル (モデル用)



I: 電源ケーブル (モニター用)




J: 電源ケーブル (タブレットPC用)



K: 電源ケーブル (ヘッドセット用)



M: OAタップ

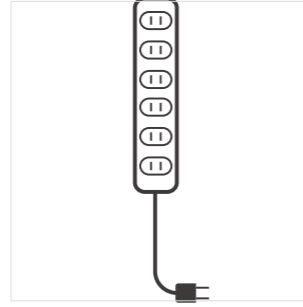

重要!


必ず右記の手順を守って、起動操作を行ってください。手順通りでないと、正常に起動することができません。

注意

コントロールPCの充電が十分にされていることを確認してから電源を入れてください。充電がされていない場合は、コントロールPCに電源ケーブルを挿したままでも操作を行うことができます。

起動方法

- ① 機器を接続してください。※ケーブルに付属のタグと、接続ポートのシールの色を参考に接続してください。

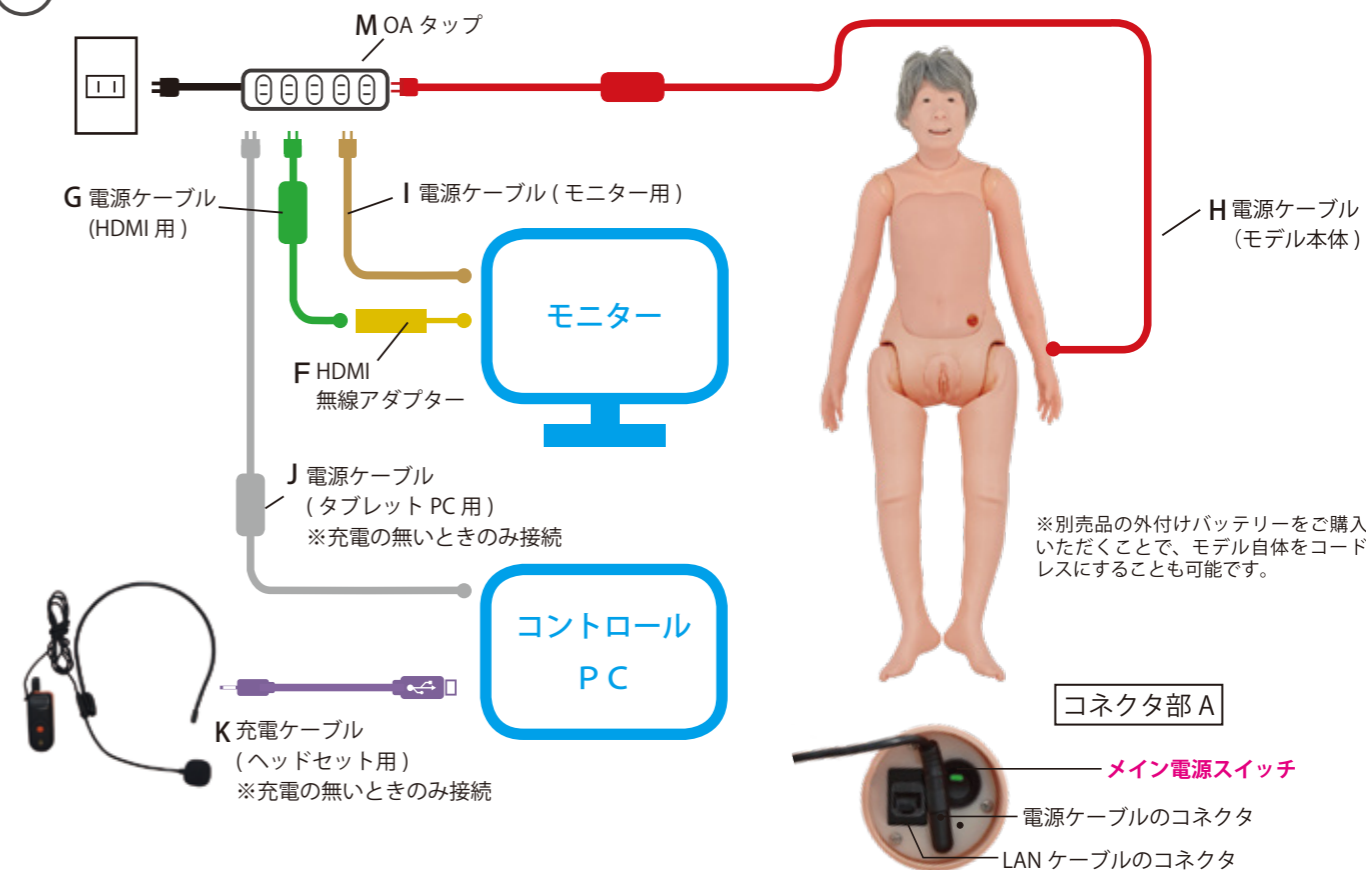

- ② モデルのコネクタ部Aの**メイン電源スイッチ**を入れてください
- ③ モニター・パルスオキシメータ・体温計の電源を入れてください



- ④ コントロールPCの電源を入れてください



重要!

必ず下記の手順を守って、起動操作を行ってください。
手順通りでないと、正常に起動することができません。

終了方法

■シナリオモードの場合



■シナリオ作成の場合



③ メイン電源を切ります



④ モニターの電源を切ります



④ 体温計・パルスオキシメータの電源を切ります




付属機器の各部名称と機能

■コントロール PC

タッチパネル



■コントロール PC ドック

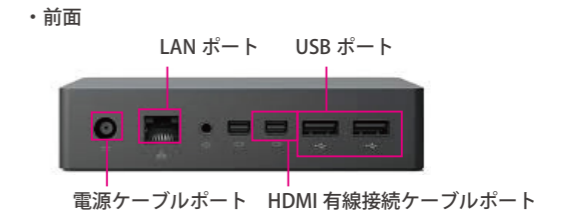

■キーボード



■生体情報モニター



■ヘッドセット



■パルスオキシメーター



■体温計



※コントロール PC、生体情報モニターの電源ボタン・接続ポート等の仕様は、変更になる場合があります。



注意

●ご使用時以外、体温計やパルスオキシメータの電源をお切りください。

電源を入れていると、電池の消耗が早くなったり故障の原因となります。

●体温計やパルスオキシメータの電池が少なくなったら速やかに交換してください。

電池が減ると液晶画面に“Lo”と表示されます。故障の原因となりますので、電池を交換してください。単4電池をお使いください。



株式会社 京都科学
<http://www.kyotokagaku.com>
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場
〒612-8388
京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL: 075-605-2510
FAX: 075-605-2519

■東京支店
〒113-0033
東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG 本郷三丁目ビル2階
TEL: 03-3817-8071
FAX: 03-3817-8075