

KT-27

Elderly Person Simulator Kit



URL ● <http://www.kyotokagaku.com>

本社・工場


〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町 15 番地
TEL.075-605-2510 (直通)
FAX.075-605-2519

e-mail ● rw-kyoto@kyotokagakuco.jp

東京支店

〒112-0002 東京都文京区小石川 5 丁目 20-4
TEL.03-3817-8071 (直通)
FAX.03-3817-8075

Set Includes

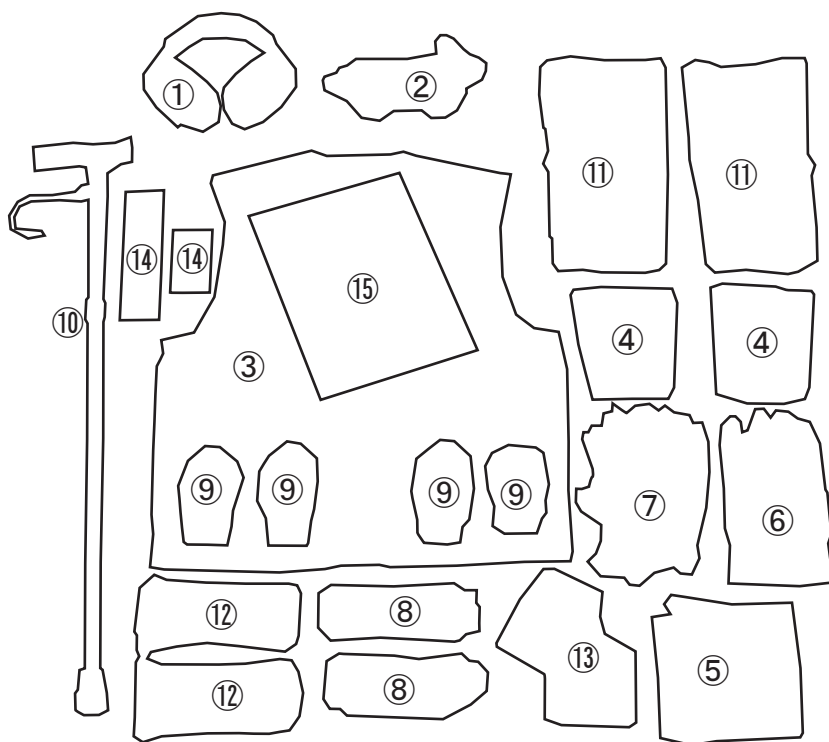

●Set Includes

- | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| ①Earmuffs×1 | ⑥White gloves×1 | ⑪Knee fixture×2 |
| ②Special goggles×1 | ⑦Rubber gloves×10 | ⑫Weight for ankle×2 |
| ③Vest×1 | ⑧Weight for wrist×2 | ⑬Ankle fixture×1 |
| ④Elbow fixture×2 | ⑨Weight for vest×4 | ⑭Reinforcing velcrobelt×1 |
| ⑤Hand fixture×1 | ⑩Collapsible stick×1 | ⑮Instruction manual×1 |

How to wear

Apparatus are to be worn on trainee's dominant foot/leg or hand.


Keep a stable posture when you wear any items.

The product is designed for Educational purpose.


Do not use for any other purpose.

- ① Put the ankle fixture on your dominant foot.
✖Do not take off your shoes when you put on ankle fixture
Use reinforcing velcro belt when the fixture's upper part is too short to wrap the ankle.
- ② Wear the knee fixture on the knee of the same side.
- ③ Put the included weights over the ankle on the same side.
- ④ Wear the vest.
- ⑤ Put the elbow fixture on your dominant hand
- ⑥ Tie the weight around the wrist of the same side.
- ⑦ Wear the goggles.
- ⑧ Wear the earmuff.
- ⑨ Wear the rubber gloves then, wear the white gloves and then hand fixture.
- ⑩ Hold the collapsible stick by other hand and adjust to your size.


① Ankle fixture

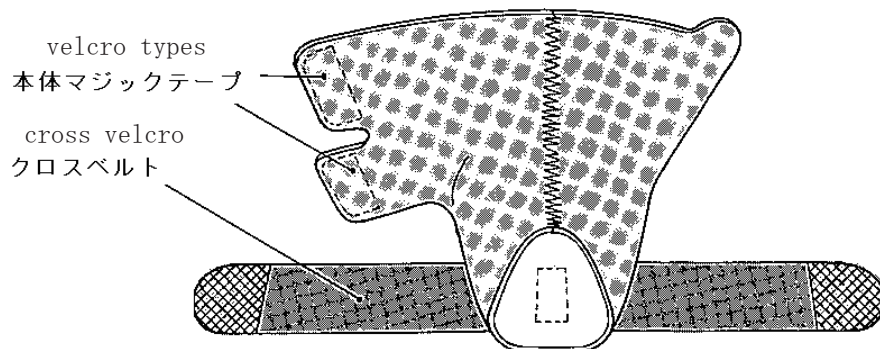


クロスベルトのマジックテープ

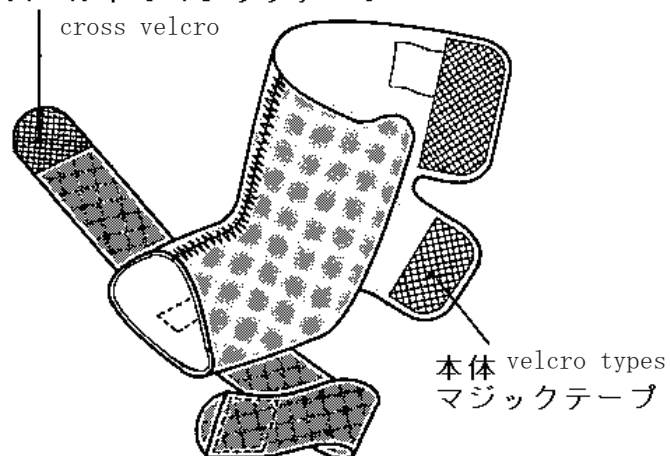



Disengage all velcro tapes for supporter and cross velcro.

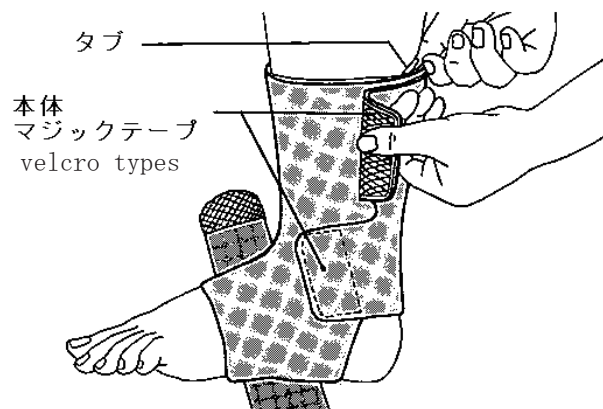


Then, put foot in the hole, wrap the upper part and fix it with two velcro fasteners and cross a velcro on instep.

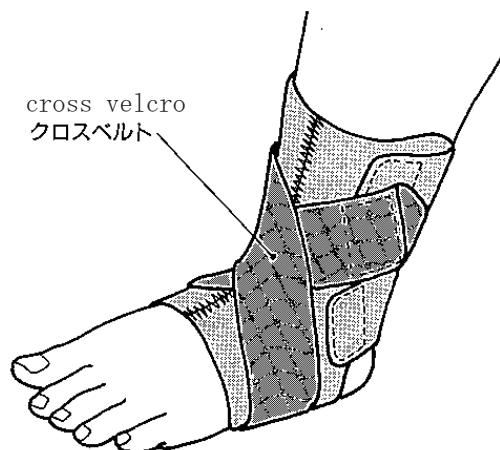


② Knee fixture

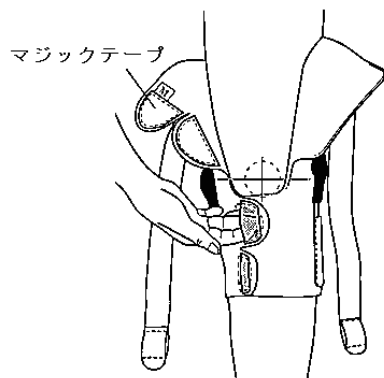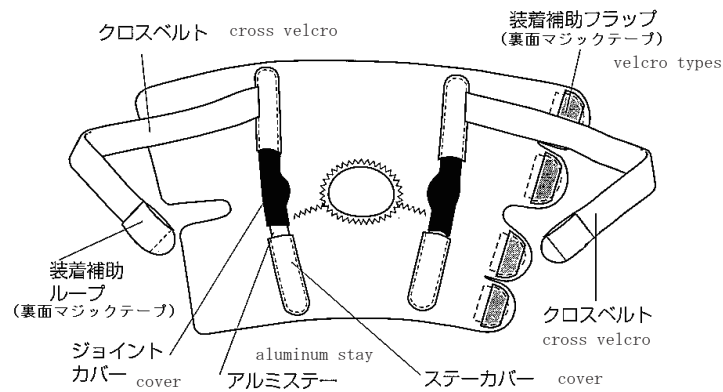


Bend your knee and wear the fixture from the back side of your knee.

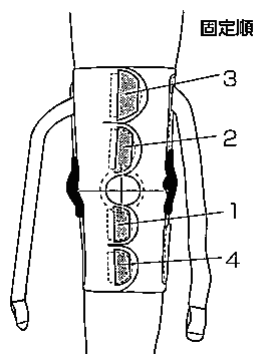

Adjust the pad to a middle of your knee, then fasten the velcro fastener in order from 1 to 4.

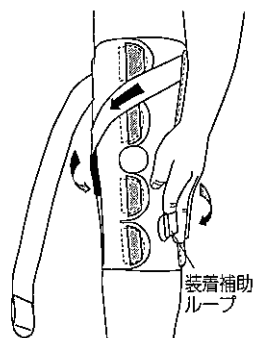

※See the illustration.
Cross the velcro belt at the bottom to the top.
Cross the velcro belt at the top to the down.

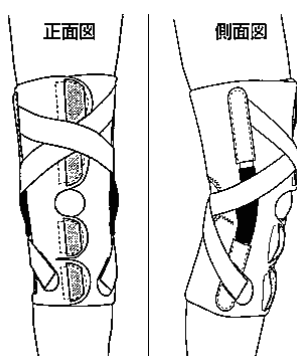



★Caution★

Remove aluminum stay before washing.
Wash with a neutral detergent by hand water temperature should be under 30 degree.
Do not bleache, machine wash, machine dry, iron and dry cleaning.
Dry in the shade.


③ Vest




Put some weights through a Velcro and weight sticks together with type.

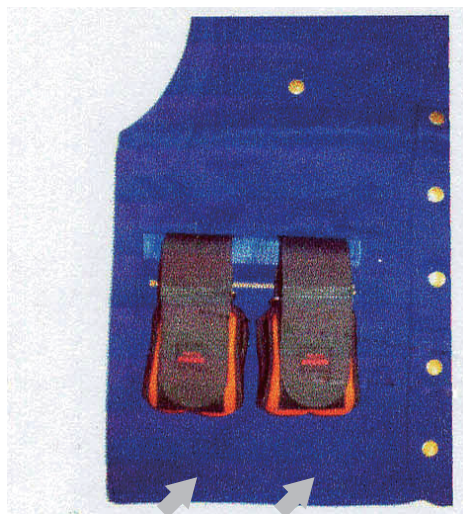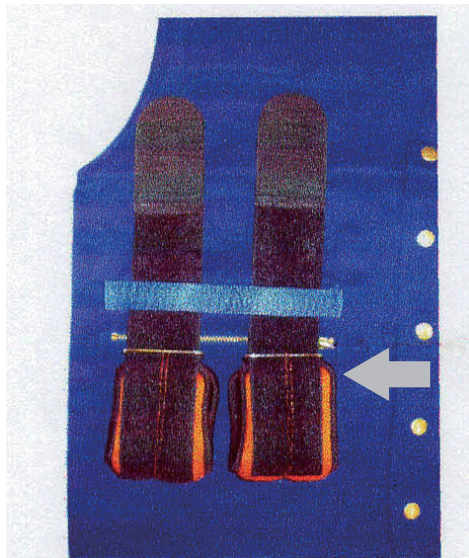

④ Elbow fixture

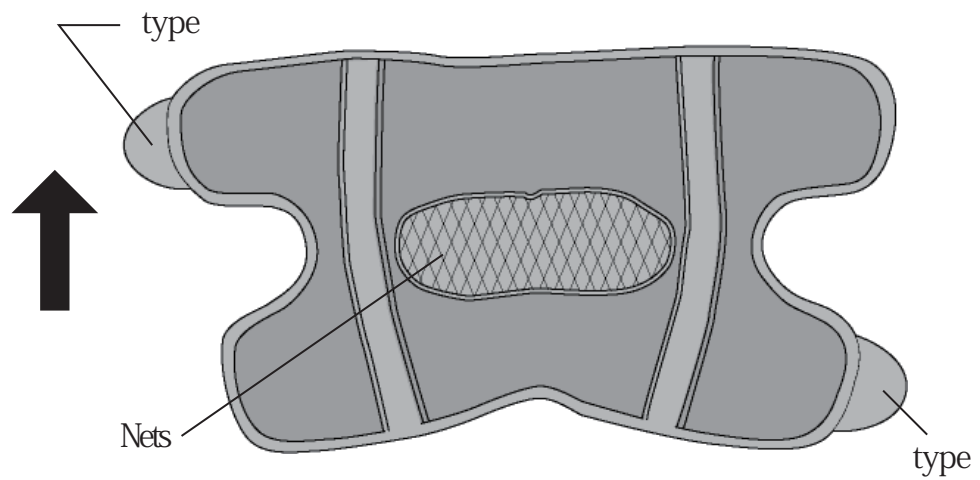

Unroll a supporter and put your elbow on it.
Be sure to keep the elbow straight.
Wrap the fixture around the elbow.
Adjust a position of your arm through the
supporter and fasten a type.

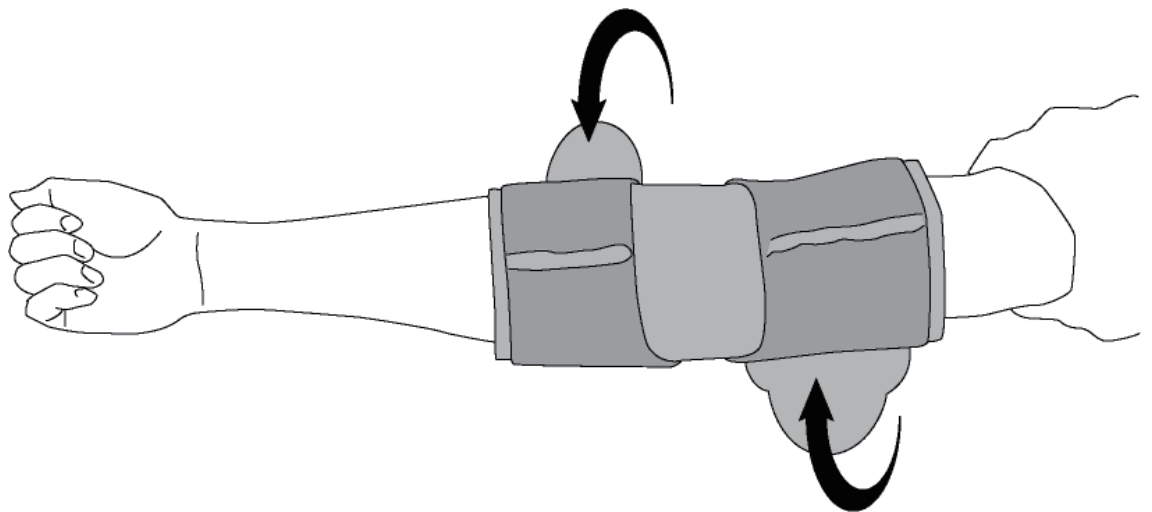



株式
会社

京都科学