

M89A

口腔ケアモデル セイケツくんⅡ

ユーザーズガイド



目次

はじめに	P.2
実習項目	P.2
セット内容と各部の名称	P.3
構成品	P.3
モデル本体の各部	P.4
準備	P.5
モデルの設置	P.5
義歯の装着	P.6
上側の義歯の装着	P.6
下側の義歯の装着	P.7
後片付け	P.8
義歯の取り外し	P.8
皮膚の取り外し	P.8
水洗い	P.11
仕様	P.13
交換部品	P.13


口腔ケアモデル セイケツくんⅡは、義歯の着脱や口腔ケアの実習を行うためのモデルです。

実習項目

義歯の着脱、口腔ケアの実習が可能です。

本製品の構成品およびモデル本体の各部を示します。

構成品

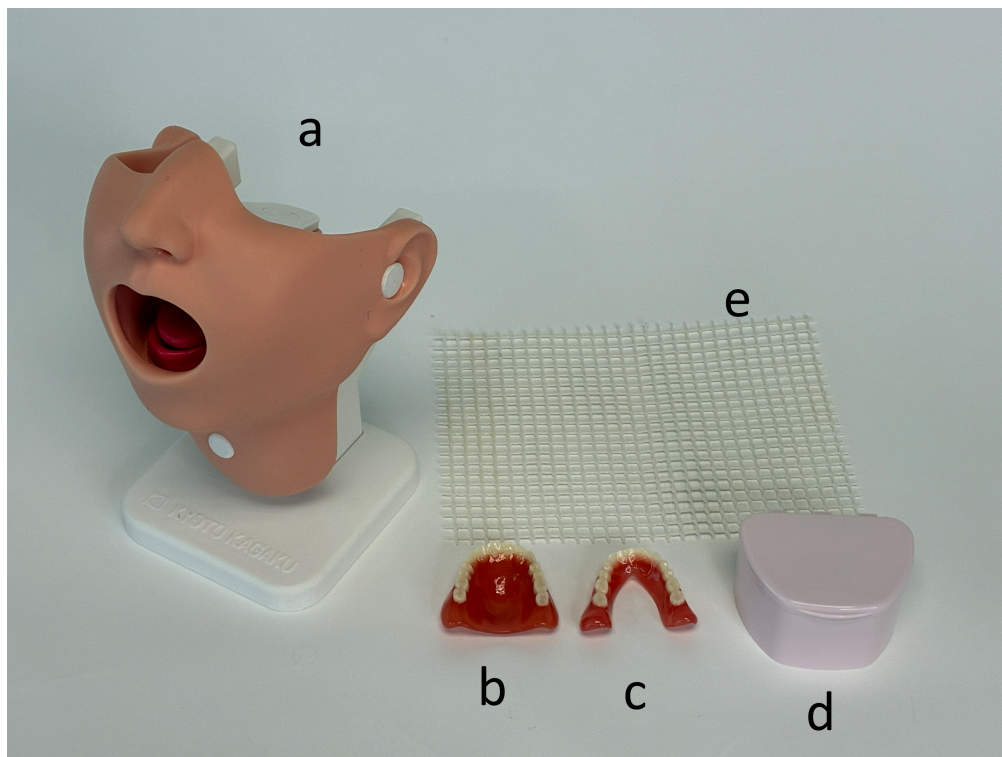

構成品

構成品	数量
a モデル本体	1
b 義歯（上）	1
c 義歯（下）	1
d 義歯歯ケース	1
e 滑り止めシート	1

モデル本体の各部

各部	説明
皮膚	口腔内が再現された皮膚です。
支持台	モデル本体を支持する部品です。

△ 注意

義歯安定剤は付属していません。別途、ご用意ください。

- ・ 市販の義歯安定剤を使用できます。
- ・ 「クリームタイプ」を推奨します。
- ・ 使用方法は、義歯安定剤の説明書に従ってください。
- ・ 実習終了後はすみやかにモデルから義歯を取りはずし、義歯安定剤を取り除いてください。


実習前に、滑り止めシートの上へモデル本体を設置します。

モデルの設置



滑り止めシート上へのモデル本体の設置

1. テーブルなどの平坦な場所に滑り止めシートを置きます。
2. 滑り止めシートの上にモデル本体を置きます。
3. モデル本体が安定していることを確認します。
4. モデルは仰臥位でも使用できます。

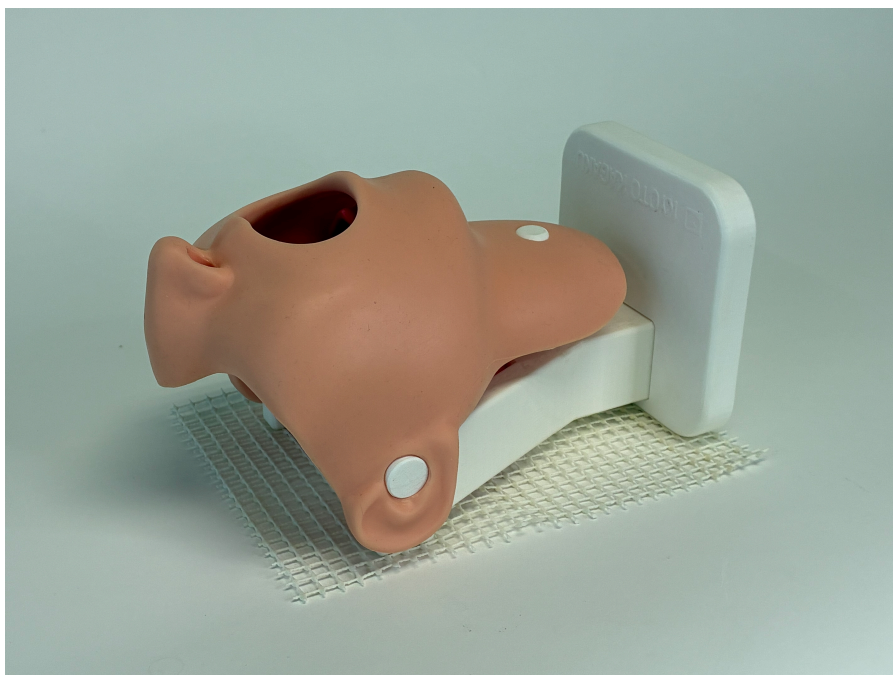

仰臥位で設置

義歯に義歯安定剤を塗布し、口腔内に装着します。

上側の義歯の装着



上側の義歯の挿入

1. 義歯安定剤の使用方法にしたがって義歯に安定剤を塗布します。
2. 義歯を口腔内に挿入し、歯茎の形状にあわせて装着します。
3. 義歯が安定するまで指で固定します。

下側の義歯の装着



下側の義歯

1. 義歯安定剤の使用方法にしたがって義歯に安定剤を塗布します。
2. 義歯を口腔内に挿入し、歯茎の形状にあわせて装着します。
3. 義歯が安定するまで指で固定します。

△ 注意

下側の義歯を挿入する前に、舌が義歯に挟まれない位置にあることを確認します。

実習後は、義歯および皮膚を取り外し、水洗いします。

義歯の取り外し



義歯の取り外し

1. 上下義歯を口腔内から取り外します。

△ 注意

義歯の取り外しは慎重に行ってください。

- ・ 義歯安定剤によっては接着が強力な場合があります。
- ・ 無理に外すと口腔内や義歯の破損に繋がる恐れがあります。
- ・ 実習終了後はすみやかにモデルから義歯を取りはずし、義歯安定剤を取り除いてください。

皮膚の取り外し

1. 左側および右側の耳を支持台から抜きます。




支持台から耳を外す

2. モデル背面の頸部皮膚を支持台から引き抜きます。



モデル背面の頸部皮膚を支持台から取り外し

3. モデル正面の頸部皮膚を支持台から引き抜きます。

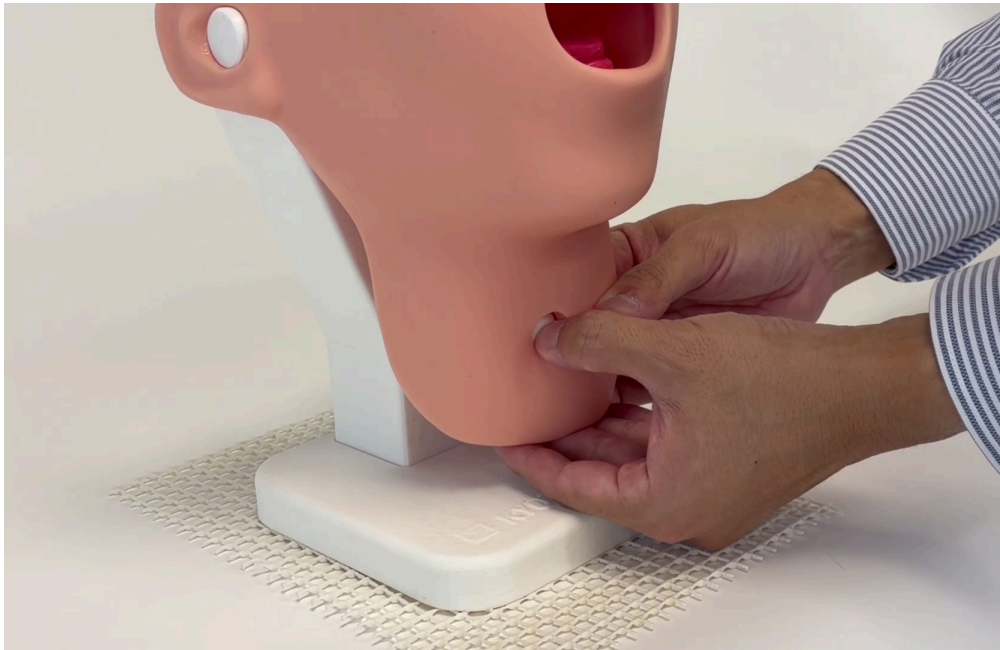

モデル正面の頸部皮膚を支持台から取り外し

4. 支持台から皮膚を取り外します。

水洗い



皮膚口腔内の水洗い

1. 皮膚の口腔内の汚れを水洗いして落とします。
2. 皮膚に義歯安定剤が残らないよう、しっかりと水洗いします。
3. 柔らかい布で水を拭き取り、陰干しして乾燥させます。



義歯の水洗い

4. 取り外した義歯を水で洗浄し、義歯安定剤を落とします。
5. 柔らかい布で水を拭き取り、義歯ケースに収納します。

本製品の基本情報を示します。

項目	仕様
製品名	口腔ケアモデル セイケツくんⅡ
型番	M89A
製造元	株式会社京都科学

交換部品

- ・ 義歯 1277-020

○本製品の仕様、外観、構成部品等は、品質向上および改良のため、予告なく変更する場合があります。