

# 男性導尿・浣腸シミュレータ【簡易マニュアル】 実習準備

3. 浣腸用直腸部に排水チューブ(チューブコックのついていないチューブ)を接続します。



4. 性器部ユニットに取り付けた3本のチューブをまとめて、本体の前側より中に通して、本体に性器部ユニットをはめ込みます。



セット完了

5. 給水用チューブ(チューブコックが接続側に近いチューブ)をイルリガートルにつなぎ、排水用チューブをバケツ等に入れます。



6. チューブコックを閉じて水(模擬尿)約400mLをイルリガートルに入れ、蓋をして点滴スタンドに吊るします。



チューブコックを開けて膀胱に給水したら準備完了です。




# 男性導尿・浣腸シミュレータ【簡易マニュアル】 実習準備

ご使用前に必ず、付属の取扱説明書をお読みください。

## セット内容

ご使用前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。

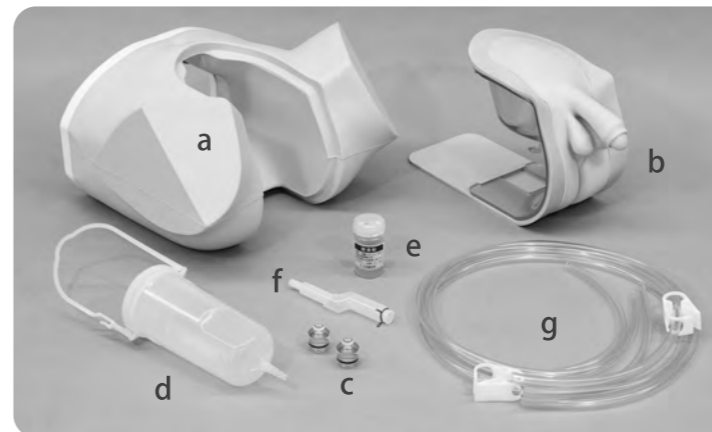

- a. 腰部モデル本体 ..... 1台
  - b. 性器部(男性器)ユニット ..... 1式
  - c. 弁 ..... 3点  
(1点は性器部ユニットに組み込み、2点は付属品)
  - d. イルリガートル ..... 1点
  - e. 潤滑剤(オリーブ油) ..... 1点
  - f. 浣腸用直腸部 ..... 1点  
(固定用クリップ大付)
  - g. チューブ(給水用1本・排水用2本) ..... 計3本
- 取扱説明書

※3本のチューブのうち、導尿用の給水用と排水用チューブ(各1本)には、それぞれチューブコック1点が付属しており、浣腸用排水用チューブにはチューブコックはついていません。

## 実習の準備


1. 性器部ユニットを取り外します。




取り外した性器部ユニット



膀胱部の後側にチューブの接続部が2箇所あります。

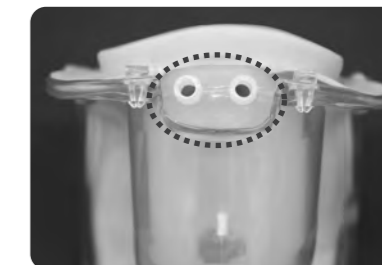

2. 膀胱部に排水・給水用チューブ(各1本)を取り付けます。2本のチューブはどちらもチューブコックのついていないチューブを選び、チューブコックの位置を交互にします。

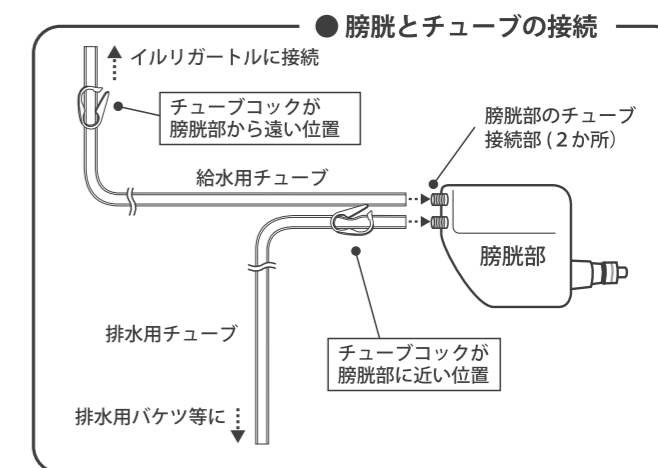

チューブコックが膀胱部に近い側のチューブ

# Male Catheterization/Enema Simulator

## Preparation

3. Connect the drain tube with no clamp to the rectum unit.




4. Set the genitalia units to the lower torso body. First put the 3 irrigation/drainage tubes through the body and then set the genitalia unit.



Assembly complete

5. Connect the irrigation bottle to the irrigation tube which has clamp at near the far end and put the tip of drainage tubes for catheterization and enema into the bucket.

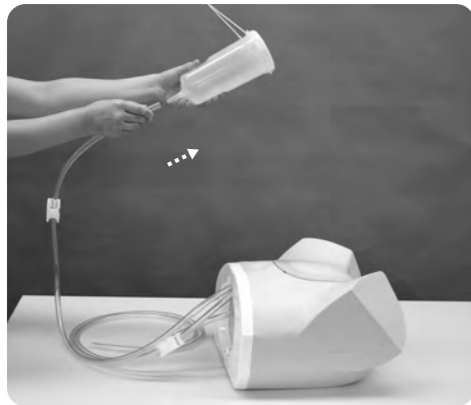

6. Fill the irrigation bottle with simulated urine (water). Then put the cap on the bottle and hang it from the stand.



Open the clamp and the simulated urine will be charged into the bladder reservoir.



■ Main Office and Factory (World Wide)

**KYOTO KAGAKU co.,LTD**

WEB • [www.kyotogagaku.com](http://www.kyotogagaku.com)  
E-MAIL • [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

15 kitanechoya-cho Fushimi-ku Kyoto 612-8388, Japan  
TEL: +81-75-605-2510  
FAX: +81-75-605-2519

■ North and South American regions:

**KKAmerica**  
Kyoto Kagaku America Inc.


WEB • [www.kkamerica-inc.com](http://www.kkamerica-inc.com)  
E-MAIL • [info@kkamerica-inc.com](mailto:info@kkamerica-inc.com)

3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108, USA  
TEL: +1-310-325-8860  
(Toll-free in North America: 877-648-8195)  
FAX: +1-310-325-8867

2016.02

# Male Catheterization/Enema Simulator

## Set includes

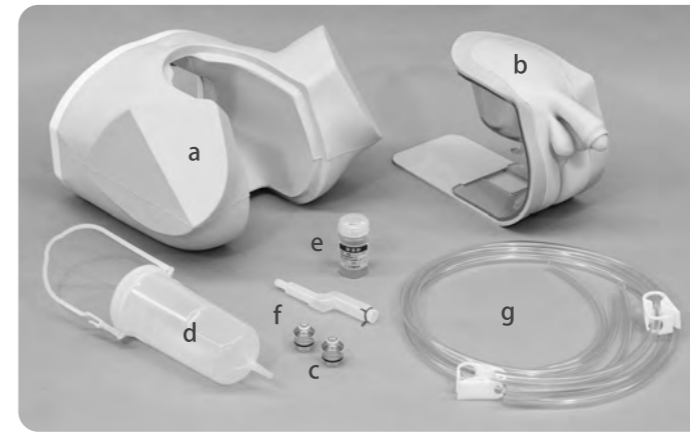

Please read carefully before use

Before your first use ensure that you have all the components listed below.

- a. Lower torso manikin . . . . . 1
  - b. Male genitalia organ unit . . . . . 1
  - c. Valve . . . . . 3  
(total 3 pcs; one is incorporated in the genitalia unit and two are for future replacement)
  - d. Irrigation bottle . . . . . 1
  - e. Lubricant . . . . . 1  
(attached with a large metal clip 1)
  - f. Rectum unit . . . . . 1
  - g. Irrigation/drainage tubes . . . . . 3  
(total 3 pcs; 2 are attached with one clamp each)
- Instruction manual

## Preparation


1. Remove the genitalia unit from the torso manikin.



Genitalia unit



There are two tube connectors on the backside of the unit.

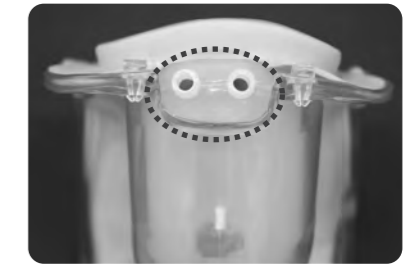

The clamp is near the far end of the tube.



The clamp is near the bladder reservoir.

2. Attach the irrigation/drainage tubes with clamp to the connectors at the upper end of the urinary bladder reservoir.

### Connection of Irrigation/drainage tubes

