



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

MW46

爪白癬採取モデル

取扱説明書

目次

- ご使用の前に…………… P.1
- 準備・実習…………… P.2



●はじめに

このたびは、当社の「爪白癬採取モデル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、安全な爪白癬の検体採取のためのトレーニング用モデルです。

必ずお読みください

本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。また取扱説明書に記載された方法以外でのご使用による万一の破損や事故に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

●特長

異常な爪に対する爪切りや適切な位置からの検体採取を実習できます
採取部位は簡単に交換することができ、繰り返しトレーニングできます



株式
会社

京都科学

ご使用の前に

ご使用前の確認とご注意

セット内容と各部の名称

ご使用の前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。



●構成

- a. モデル本体（専用台共）……1 台
- b. 爪……………20 個
- c. 足裏検体採取部位……………10 個

取り扱い説明書




注 意

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● 取り扱いにご注意ください。
特殊軟質樹脂を使用していますので、落下や強い衝撃を与えると破損の原因となります。 | <ul style="list-style-type: none">● 表面が変色する場合があります。
長期間使用されない場合や、経年変化で変色することがありますが、ご使用には差し支えありません。 |
| <ul style="list-style-type: none">● 印刷物をモデル表面に置かないでください。
モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。 | <ul style="list-style-type: none">● ボールペンやサインペンで書きこまないでください。
サインペン、ボールペンなどでモデルに書き込むと、インクが吸収され消えなくなります。 |
| <ul style="list-style-type: none">● 高温多湿を避けて保管してください。
使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
変質や潮沼の原因となります。 | <ul style="list-style-type: none">● 中性洗剤又はアルコールで拭き取ってください。
モデルの汚れは、水又は中性洗剤で拭いてください。汚れが落ちない場合は、アルコールで拭いてください。シンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。 |

準備



足裏検体採取部位

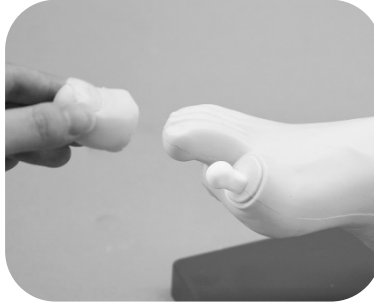

爪



爪をセットした状態

1) 実習部品の取り付け


検体採取に使用する足裏検体採取部位、爪をそれぞれ足部本体にセットします。

足裏検体採取部位は、取り付け部にある小さな穴を指側にして取付穴に差し込みます。

爪は指部分を持ち、根元までしっかり差し込みます。

2) 足モデルの角度調整

足部本体を支えながら固定ネジを緩めて、実習に適した角度にセット後、固定ネジをしっかり締めて固定してください。

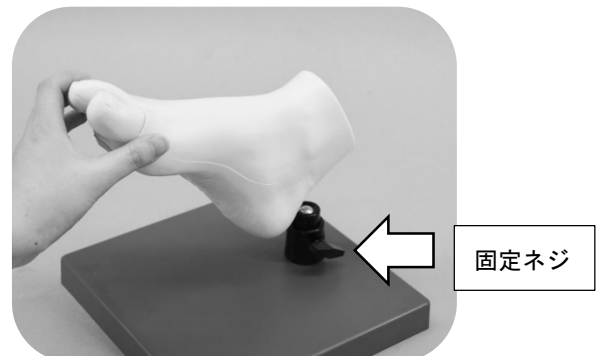

実習

●実習項目

・鱗屑・痂皮の検体採取

・異常な爪に対する爪切り

※別売の金属製舌圧子（器具セット構成）を使用して、
胼胝部分からの検体採取
トレーニングも可能です。





注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

消耗品

コード番号	部品名
11427-010	爪 20 個組
11427-020	足裏検体採取部位 10 個組



11427-010 爪 20 個組



11427-020 足裏検体採取部位 10 個

関連器具

爪白癬採取モデル用器具セット

11427-030

- ・ 爪切り
- ・ 眼科剪刀
- ・ 毛抜きピンセット
- ・ 舌圧子
- ・ ケース



・ 本製品についてのお問い合わせや不具合等ございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学までご連絡ください

 **KYOTO KAGAKU co.,LTD**

<http://www.kyotokagaku.com> e-mail: rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL:075-605-2510 (直通)
FAX:075-605-2519

■東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL:03-3817-8071 (直通)
FAX:03-3817-8075

2020/05