

女性導尿・浣腸シミュレータⅡ【簡易マニュアル】 実習準備

3. 浣腸用直腸部に排水チューブ(チューブコックのついていないチューブ)を接続します。



4. 性器部ユニットに取り付けた3本のチューブをまとめて、本体の前側より中を通して、本体に性器部ユニットをはめ込みます。



セット完了

5. 給水用チューブ(チューブコックが接続側に近いチューブ)をイルリガートルにつなぎ、排水用チューブをバケツ等に入れます。



6. チューブコックを閉じて水(模擬尿) 約400mLをイルリガートルに入れ、蓋をして点滴スタンドに吊るします。



チューブコックを開けて膀胱に給水したら準備完了です。




女性導尿・浣腸シミュレータⅡ【簡易マニュアル】 実習準備

ご使用前に必ず、付属の取扱説明書をお読みください。

セット内容

ご使用前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。

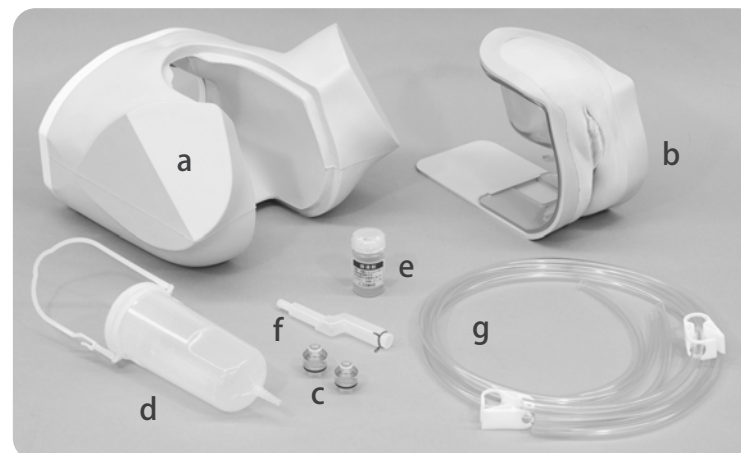

- a. 腰部モデル本体1台
- b. 性器部(女性器)ユニット1式
- c. 弁3点
(1点は性器部ユニットに組み込み、2点は付属品)
- d. イルリガートル1点
- e. 潤滑剤(オリーブ油)1点
- f. 浣腸用直腸部1点
(固定用クリップ付)
- g. チューブ(給水用1本・排水用2本)・・・計3本

取扱説明書
※3本のチューブのうち、導尿用の給水用ホースと排水用チューブ(各1本)には、それぞれチューブコック1点が付属しており、浣腸用排水用チューブにはチューブコックはついていません。

実習の準備


1. 性器部ユニットを取り外します。




取り外した性器部ユニット



膀胱部の後側にチューブの接続部が2箇所あります。

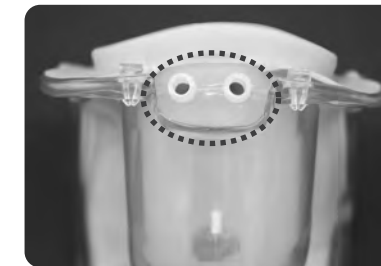

2. 膀胱部に排水・給水用チューブ(各1本)を取り付けます。2本のチューブはどちらもチューブコックのついていないチューブを選び、チューブコックの位置を交互にします。

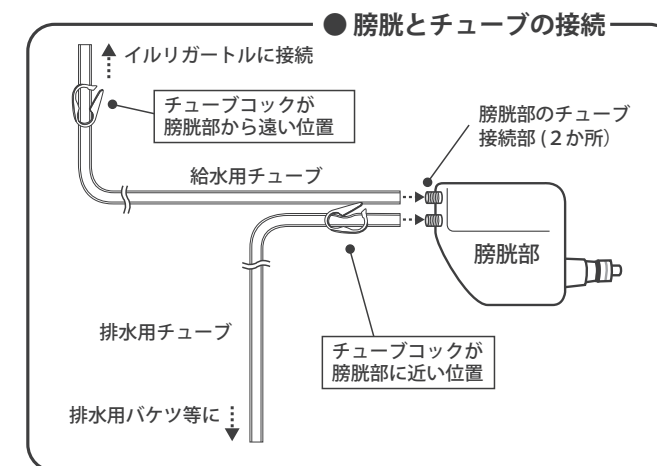

Female Catheterization/Enema Simulator II

Preparation

3. Connect the drain tube with no clamp to the rectum unit.



4. Set the genitalia units to the lower torso body.
First put the 3 irrigation/drainage tubes through the body and then set the genitalia unit.



Assembly
complete

5. Connect the irrigation bottle to the irrigation tube which has clamp at near the far end and put the tip of drainage tubes for catheterization and enema into the bucket.



6. Fill the irrigation bottle with simulated urine (water). Then put the cap on the bottle and hang it from the stand.



Open the clamp and the simulated urine will be charged into the bladder reservoir.



■ Main Office and Factory (World Wide)

KYOTO KAGAKU co.,LTD

WEB • www.kyotogagaku.com

E-MAIL • rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

15 kitane-koya-cho Fushimi-ku Kyoto 612-8388, Japan

TEL: +81-75-605-2510

FAX: +81-75-605-2519

■ North and South American regions:

KKAmerica
Kyoto Kagaku America Inc.

WEB • www.kkamerica-inc.com

E-MAIL • info@kkamerica-inc.com

3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108, USA

TEL: +1-310-325-8860

(Toll-free in North America: 877-648-8195)


FAX: +1-310-325-8867

2019.07

Female Catheterization/Enema Simulator II

Please read carefully before use

Set includes

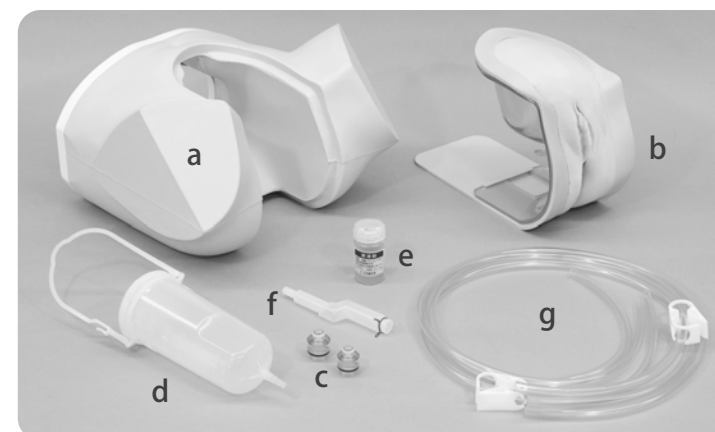

Before your first use ensure that you have all the components listed below.

- a. Lower torso manikin 1
 - b. Female genitalia organ unit 1
 - c. Valve 3
(total 3 pcs; one is incorporated in the genitalia unit and two are for future replacement)
 - d. Irrigation bottle 1
 - e. Lubricant 1
 - f. Rectum unit 1
(attached with a metal clip 1)
 - g. Irrigation/drainage tubes 3
(total 3 pcs; 2 are attached with one clamp each)
- Instruction manual

Preparation


1. Remove the genitalia unit from the torso manikin.



Genitalia unit



There are two tube connectors on the backside of the unit.

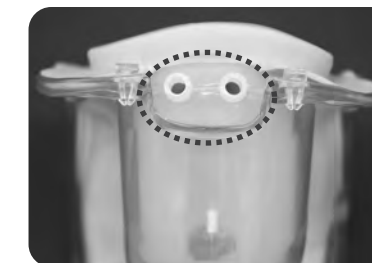

2. Attach the irrigation/drainage tubes with clamp to the connectors at the upper end of the urinary bladder reservoir.

Connection of Irrigation/drainage tubes

