




注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

- ・本製品についてのお問い合わせや不具合等ございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。

交換部品

コード番号	部 品 名
11460-010	MW67 模擬圧カトランスデューサ

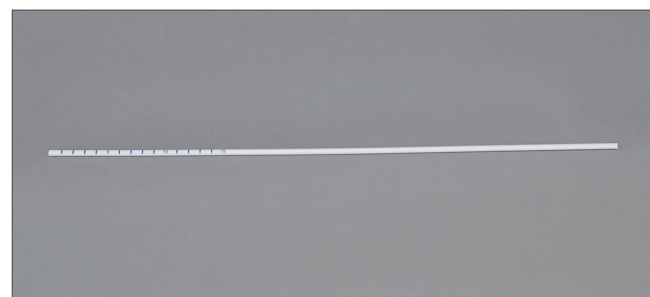

MW67 模擬圧カトランスデューサ



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。


MW67

直腸肛門機能検査モデル 実習セット

取扱説明書

目 次

- ・ ご使用の前に P.1
- ・ 実習の準備 P.2
- ・ 実習時の注意 P.2
- ・ 交換部品のご案内 P.3

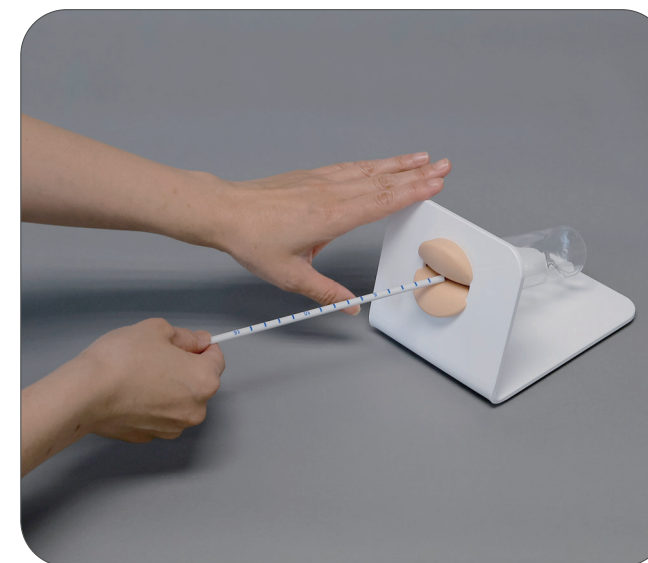

URL・<http://www.kyotokagaku.com> e-mail・rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■ 本社・工場


〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL: 075-605-2510 (直通)
FAX: 075-605-2519

■ 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL: 03-3817-8071 (直通)
FAX: 03-3817-8075

本書の内容は、予告なしに変更することがあります。本書の内容の一部もしくは全部を当社に無断で複写・転載することを禁じます。
本書の内容に、万一不審な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら、当社もしくは販売店にご連絡ください。

製品の構成と各部の名称

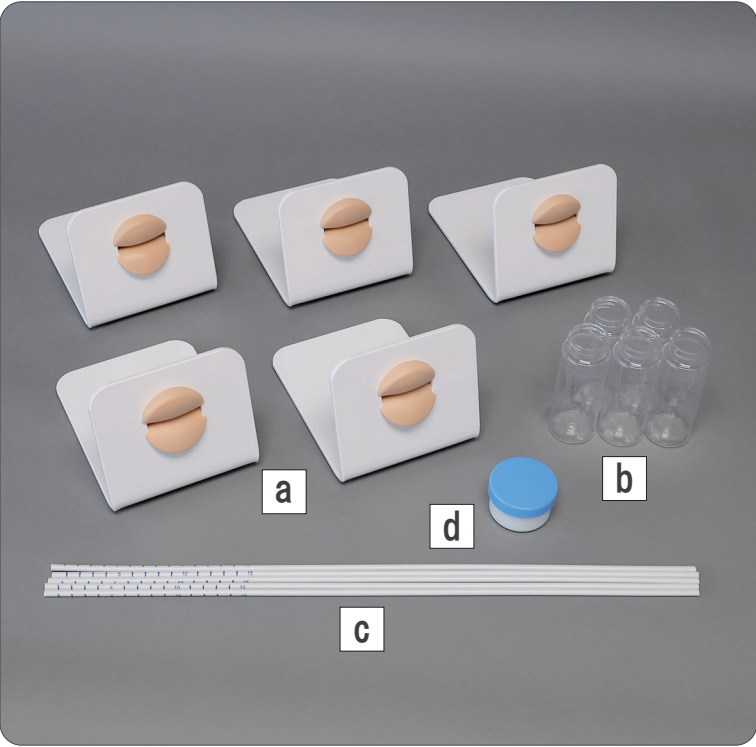

- a. モデル本体 5台
- b. ボトル（模擬直腸）..... 5本
- c. 模擬圧力トランスデューサ 5本
- d. ワセリン 1個
- e. 取扱説明書 1冊

■必ずお読みください

本来の使用目的以外の用途でご使用にならないでください。また、取扱説明書に記載された方法以外でのご使用による万一の破損や事故に関しましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

ご 注 意

●取り扱いにご注意ください。 落下や強い衝撃を与えると破損の原因となります。	●印刷物をモデル表面に置かないでください。 モデル表面に印刷物が直接触れないようにしてください。 また、ボールペンやサインペンで書込まないでください。 樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。
●汚れは水または中性洗剤で拭き取ってください。 モデル本体の汚れは水または中性洗剤で拭き取り、よく乾燥させてベビーパウダーを塗布しておいてください。 シンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。	●高温多湿を避けて保管してください。 ご使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。変質や破損の原因になります。
●モデル本体は乾燥させて保管してください。 ご使用後は風通しの良い場所でモデル本体を十分に乾燥させてから保管してください。 湿ったままの状態で保管されますと、カビの原因となります。	●表面が変色する場合があります。 長期間使用されていない場合や経年変化で変色することがありますが、ご使用に差し支えはありません。

準備（ボトルの取付）

肛門部裏側のネジに付属のボトルを取り付けます。

※肛門部（軟質樹脂）は台に接着されています。
無理に取り外さないでください。




実 習

●実習項目

- ・模擬圧力トランスデューサ挿入

※肛門部にワセリンを塗布し、付属の模擬圧力トランスデューサを挿入してください。

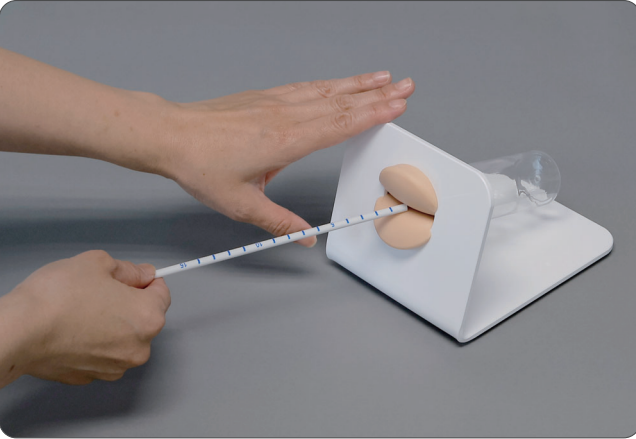

- ・模擬圧力トランスデューサには目盛が印刷されており、挿入長を確認することができます。
また、裏側から実際どの程度まで模擬圧力トランスデューサが挿入されたかの目視確認ができます。

※実習後はよく絞った布などでやさしくワセリンを拭き取ってください。※アルコール等は使用しないでください。

