



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

MW83

12誘導心電計 電極装着モデル



取扱説明書

目次

- ・はじめに -----P. 1
- ・準備・片付け -----P. 2
- ・胸部皮膚の交換 -----P. 3

はじめに

この度は「12誘導心電計 電極装着モデル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、ポイントを押さえた試験と画一的な評価のしやすさを追求した12誘導モデルです。

必ずお読みください

本来の使用目的以外にはご使用にならないでください。また取扱説明書に記載された方法以外でのご使用による万一の破損や事故に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

特 長

- 肋間の触知、電極の装着など一連の12誘導心電図手技を学修・試験できます
- 全身モデルのため、手技だけでなく模擬患者をイメージした羞恥心への配慮や、コミュニケーションを実施することができます
- 肋骨をプリントした胸部皮膚で試験での評価が容易です
- 分解して運搬・保管が可能です




株式会社 京都科学

はじめに

セット内容と各部の名称

ご使用の前に構成品が全て揃っているかご確認ください。

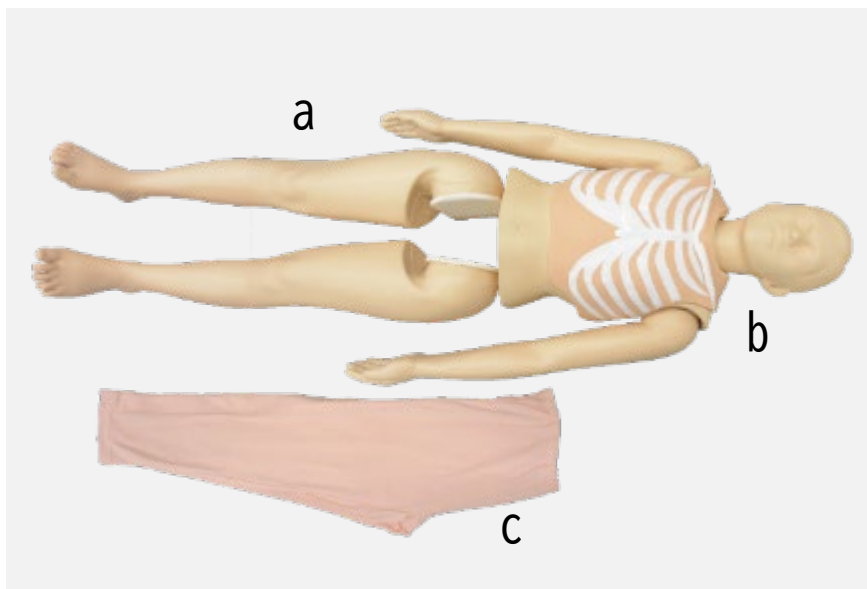

- a. モデル本体----1
- b. 胸部皮膚 肋間プリントあり ----1
- c. ズボン ----1

注意

● 取り扱いにご注意ください。

特殊軟質樹脂を使用していますので、落下や強い衝撃を与える
と破損の原因となります。また皮膚部の脱着の際無理な負荷が
かかりますと破損しますので十分ご注意ください。

● 印刷物をモデル表面に置かないでください。

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてくださ
い。
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

● 高温多湿を避けて保管してください。

使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けて
ください。変形や故障の原因となります。

● 汚れは中性洗剤又はウェットティッシュで 拭き取ってください。

モデルの汚れは水又は中性洗剤で拭き、乾燥後ベビーパウ
ダーを塗布してください。シンナーなどの有機溶剤は絶対に
使用しないでください。

● ボールペンやサインペンで書き込まないで ください。

サインペン、ボールペンなどでモデルやドレッシング材、
テープに書き込むとインクが吸収されて消えなくなります。

● 表面が変色する場合があります。

長期間使用されない場合や経年変化で変色することがありま
すが、ご使用には差し支えありません。

● モデル表面にテープを貼ったままの状態で片付けしないでください。

長時間貼ったままの状態にすると、モデルの表面にテープの粘着剤が吸着し、ベタつきが取れなくなります。この場合はガムテープ
をテープの粘着面とベタついている部分に、何回か貼付を繰り返すと取れやすくなります。

準備・片付け

準備

①モデルを箱から取り出し、並べます



②腰の位置までズボンを履かせます



注意

モデル本体を移動するときは、身体全体を抱えて、丁寧に行ってください。



腕や頭部のみで持ち上げると
破損のおそれがあります。



片付け

①ペーストを使用した場合は、水拭きできれいに拭き取ります。

②ズボンを脱がせ、箱の中に収納します



1段目



2段目




演習後は電極吸盤、クリップは必ず取り外してください。
モデルに跡が残るおそれがあります。

胸部皮膚の交換

胸部皮膚の取り外し

①皮膚の留め具を外します。留め具は6か所あります。

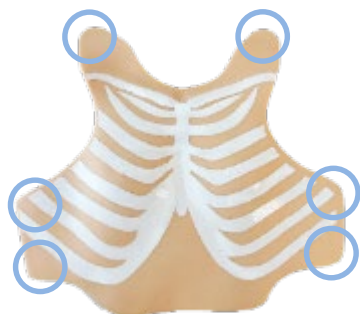

②皮膚を外します



胸部皮膚の取り付け

①皮膚をモデルの胸部に乗せ、留め具を皮膚の穴に入れます。



②留め具をモデルの穴に差し込みます



交換部品

コード番号	部品名
11487-100	胸部皮膚 肋間プリントあり
11487-110	胸部皮膚 無地

ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。



株式
会社

京都科学

URL

<http://www.kyotokagaku.com>

e-mail

rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地

TEL：075-605-2510（直通）

FAX：075-605-2519

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号

NREG本郷三丁目ビル2階

TEL：03-3817-8071（直通）

FAX：03-3817-8075

2026/02