

11489-000

MW85

## 観察トレーニングキット

### 術創パッド



注意

- 本製品を有機溶剤で拭き取らないでください  
有機溶剤を使用すると、塗装面が剥がれる原因となります。汚れを落とす際は、アルコールまたは水をご使用ください。
- 使用後は必ずシミュレータから取り外しケースに戻してください  
長時間貼付した状態で放置すると、シミュレータの変色や変質の原因となる場合があります。

取扱説明書




#### 注 意

- |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本来の使用目的以外にはご使用にならないでください<br/>取扱説明書に記載された方法以外のご使用による万一の破損や事故に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 印刷物をモデル表面に置かないでください</li> <li>● モデルにボールペンやサインペンで書き込まないでください<br/>モデル表面に印刷物が直接触れる、または書き込むとインクが吸収されて消えてなくなります。</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本製品は京都科学の製品に限定してご使用ください<br/>他社製品に使用した場合の不具合や損害については、保証の対象外となります。</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本製品は、平滑で密着性の高い面への使用に適しています<br/>表面がざらついている部位や、凹凸の大きい面では、十分に固定できないことがあります。</li> </ul>                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 表面を強く擦らないでください<br/>摩擦による表面劣化や塗装剥離の原因となります。</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高温多湿を避けて保管してください<br/>高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。変形や変色など不具合の原因となります。</li> </ul>                                       |

#### ■関連製品

11489-100 観察トレーニングキット チアノーゼ

#### セット内容

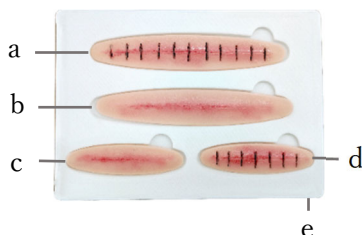

- a. 創傷パッド大（縫合糸有）……………1 点
- b. 創傷パッド大（縫合糸無）……………1 点
- c. 創傷パッド小（縫合糸無）……………1 点
- d. 創傷パッド小（縫合糸有）……………1 点
- e. 創傷パッドケース……………1 点
- f. 外袋……………1 点



株式会社 京都科学

http://www.kyotokagaku.com  
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

#### ■本社・工場

〒612-8388  
京都市伏見区北寝小屋町5番地  
TEL : 075 - 605 - 2510  
FAX : 075 - 605 - 2519

#### ■東京支店

〒113-0033  
東京都文京区本郷三丁目26番6号  
NREG本郷三丁目ビル2階  
TEL : 03 - 3817 - 8071  
FAX : 03 - 3817 - 8075

## 術創パッドの使い方/お手入れ

### 1. 貼り付け面の汚れを取り除く

貼り付ける面に油污れやごみが付着していると、吸着力が低下する場合があります。使用前にアルコールで拭き、汚れを取り除いてください。



### 2. シミュレータに貼り付ける

工具や接着剤は使用せず、シリコンの性質を利用して貼り付けます。軽く押さえ、任意の位置にパッドを貼り付けてください。



### 3. シミュレーションを行う

パッドがしっかりと貼り付けられていることを確認し、シミュレーションを行ってください。パッド上において術創の清拭および、洗剤による洗浄を行うことが可能です。



### 4. シミュレーション終了後は、パッドを取り外してケースに戻し、ケースごと外袋に入れてください

※長時間貼付した状態で放置すると、シミュレータの変色や変質の原因となる場合があります。



### ◆パッドの吸着力が落ちてしまったら

吸着面を水洗い、またはアルコールでやさしく拭いてください。拭き取る際は埃の出にくいワイプ（不織布など）をご使用ください。

表面のべたつきが気になる場合は、吸着面を避けてベビーパウダーを軽くはたいてください。

**※シンナーなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。塗装が剥がれる原因となります。**



### ◆更に臨場感をお求めの場合は



模擬膿（液体）  
2 個組 各 100 ml  
11446-020



模擬滲出液（液体）  
2 個組 各 100 ml  
11446-030



模擬血液（液体）  
2 個組 各 100 ml  
11446-040



術創パッドに塗布することで  
出血や滲出液を伴う創傷の状態を  
リアルに表現できます

詳しくは本紙裏面の連絡先へ  
お問い合わせください