

11489-100

MW85

観察トレーニングキット

チアノーゼ



注意

- 11401-000 MW22 Patient Care Simulator
"Cherry" (海外向け)には本製品をご使用になれません

取扱説明書

◎使用推奨シミュレータ

- MW27 多職種連携ハイブリッドシミュレータ
"SCENARIO"
- MW25 万能型看護実習モデル"八重"
- MW26 介護実習モデル"ケイコ"



注 意

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 本来の使用目的以外にはご使用にならないでください
取扱説明書に記載された方法以外でのご使用による万一の破損や事故に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用後キャップはすぐに閉めてください ● 使用後の筆はすぐに拭き取ってください
ご使用後は速やかにキャップをお閉めいただき、筆を拭き取ってください。乾燥すると固まり、使用できなくなります。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 本製品は京都科学の使用推奨製品に限定してご使用ください
推奨製品以外の製品や、他社製品に使用した場合の不具合や損害については、保証の対象外となります。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用後はシミュレータに塗布されたチアノーゼを必ず剥離・除去してください
塗布したチアノーゼは必ず除去してください。長時間貼付した状態で放置すると、シミュレータの変色や変質の原因となる場合があります。 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 人へは使用しないでください
万一、手や皮膚に付着し、かゆみ・赤みなどの異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、水でよく洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 高温多湿を避けて保管してください
高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。変形や変色など不具合の原因となります。 |

■関連製品

11489-000 観察トレーニングキット 術創パッド

セット内容



- a. チアノーゼ チューブ(10ml).....4 本
b. 平筆.....1 本
c. 外袋.....4 枚

※a は c に入っています



株式会社 京都科学



<http://www.kyotokagaku.com>



rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒612-8388
京都市伏見区北寝小屋町5番地
TEL :075-605-2510
FAX :075-605-2519

■東京支店

〒113-0033
東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL :03-3817-8071
FAX :03-3817-8075

準備/ 塗り方

1. 塗布する面の汚れを取り除く

塗布する面に油污れなどが付着している場合がございます。アルコールで拭き、汚れを取り除いてください。



2. 筆先に少量取る


使用前に外袋を開封し、チューブを取り出します。チューブの中身を、筆先に少量取ります。



3. シミュレータの手足の爪や、唇に塗布する

筆先を使い、水滴を乗せるイメージで、ゆっくりとやさしく広げます。

※塗布後、ドライヤー使用で約1～5分で乾燥します。乾燥時間を考慮のうえ、シミュレーションを開始する前までに塗布を完了してください。シミュレーション前日までの塗布をおすすめいたします。

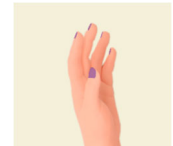

うまく塗るポイント

筆を押し付けないことが重要です。
筆を押し付けると筆跡が残し、うまく塗ることができません

✕筆を押し付ける
○やさしく乗せ広げる

120秒でわかる
塗り方のポイント



YouTube

<https://youtu.be/Rhp2erpD6rg>

塗布後

4. 使用後の筆は乾燥する前に必ず拭き取る

使用した筆は、乾燥する前にアルコールや水をつけた布等でしっかりと拭き取ってください。チアノーゼチューブも先端を拭き取りキャップを閉め、銀色の外袋に戻してください。開封後はお早めにご使用ください。



5. シミュレーション終了後は塗布面を必ず剥離・除去する

乾燥後は簡単に剥がせます。長時間貼付した状態で放置すると、シミュレータの変色や変質などの悪影響を及ぼす原因となる場合があります。



衣服に付着したら

中性洗剤等ですぐに洗い流してください。衣服に付着した場合、乾燥すると除去が困難になります。

※万一、手や皮膚に付着し、かゆみ・赤みなどの異常があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、水でよく洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。