


SPECT ファントム JSP 型 置型固定具の使用方法

取扱説明書


目 次

- 固定具の確認
 - 固定具の内容・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1
 - ファントムの設置角度調整・・・・・・・・ P.1
- セティング方法
 - 固定具の取付・・・・・・・・・・・・・・・・ P.2
 - ファントムの設置・・・・・・・・ 裏表紙

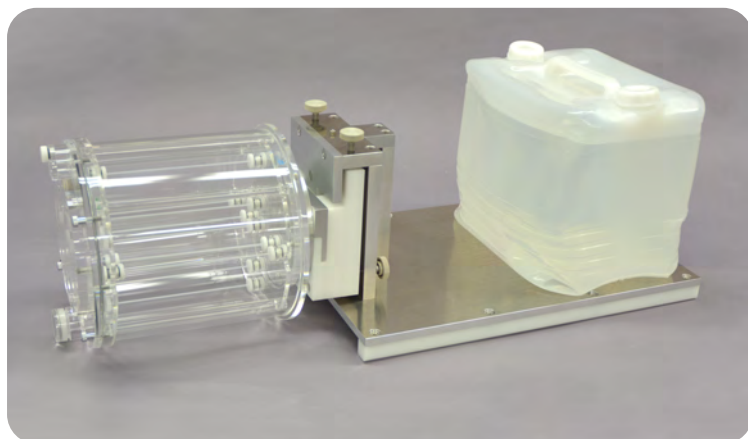

固定具の内容


置型固定具

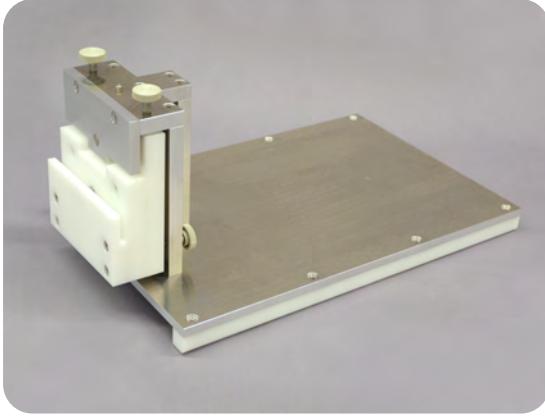


ポリタンク



ファントムの設置角度調整

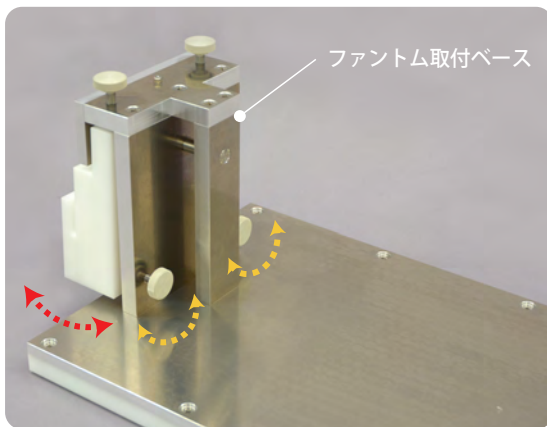

固定具のファントム取付ベースの背面にある2箇所のビスを回転させ、ファントム本体の水平度を調整できます。

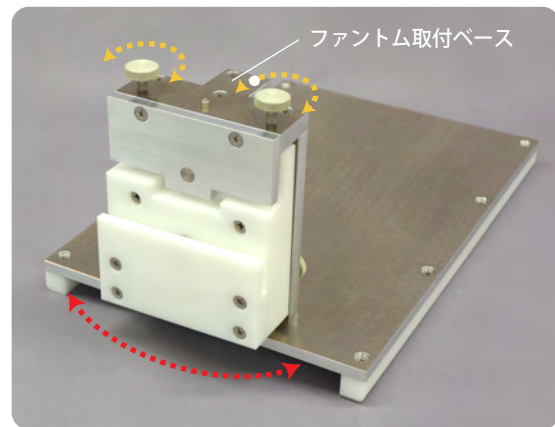


固定具のファントム取付ベースの上部にある2箇所のビスを回転させ、ファントム本体の左右の振れ度を調整できます。



※調整はファントム設置後行ってください。

固定具の取付

1. ファントムの底部を上側にして、置型固定具取り付け用の円形の固定具を6本のビスで取り付けます。固定具の位置は写真のように円形固定具とファントム円筒容器のVの位置を合わせます。

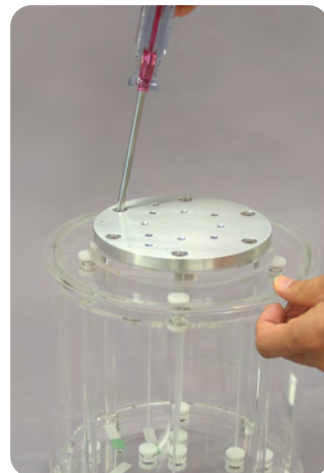


2. ファントムを横向けにして、円形の固定具に置型固定具取り付け用のプレートを2本のビスで取り付けます。固定時は写真のようにVの位置が上にくる位置にします。

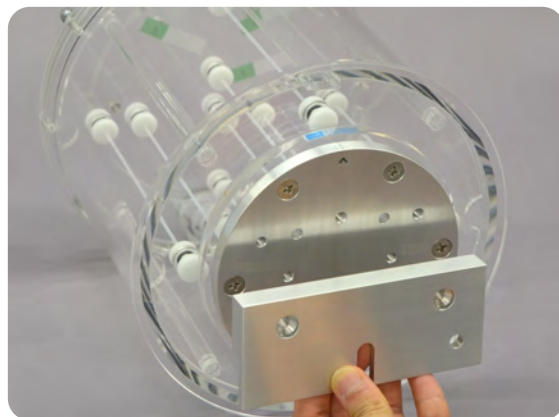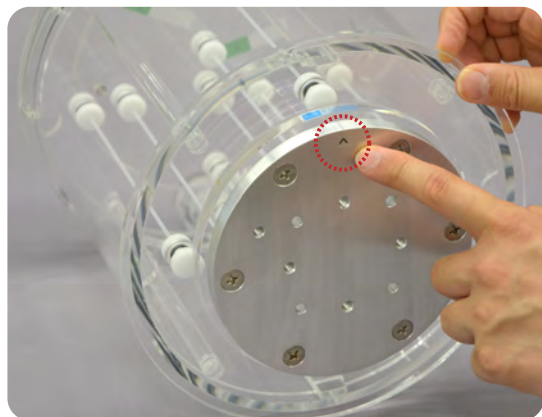

ファントムの設置




ファントムを寝台置型固定具に取り付ける前に固定具のベースに水を入れたポリタンク（転等防止の重り）をのせます。

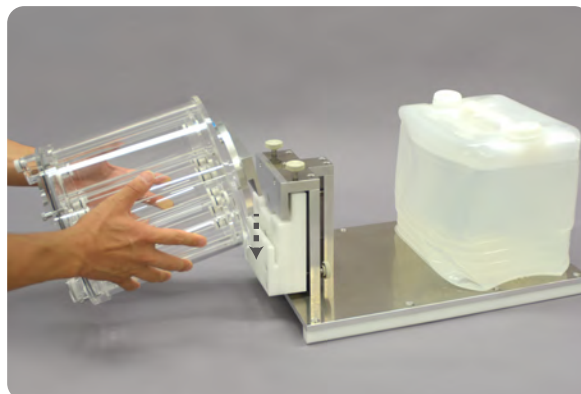

ファントムに取り付けた固定具を寝台置型固定具の受部に引っ掛け、ファントムを取り付けます。

設置完了

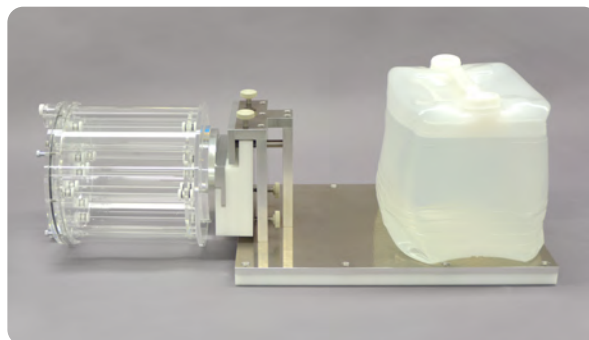

・ ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。



株式会社 **京都科学**

URL ● <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL：075-605-2510（直通）FAX：075-605-2519

■東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号 NREG本郷三丁目ビル2階
TEL：03-3817-8071（直通）FAX：03-3817-8075

2017.12