

PH-33

MRI 頭部容器ファントム NH 型



取扱説明書

目 次

- ご使用の前に 裏面
- セット内容
- 塩化ニッケル水溶液の充填方法



頭部容器ファントム 内容量 約5000mL

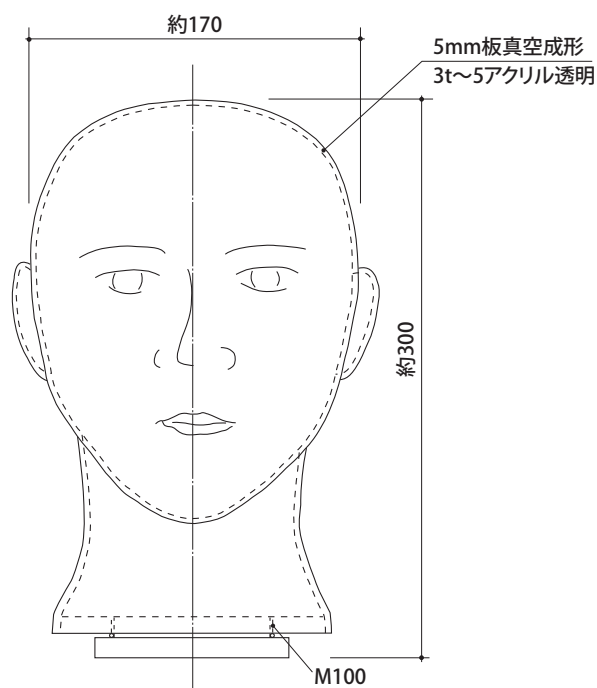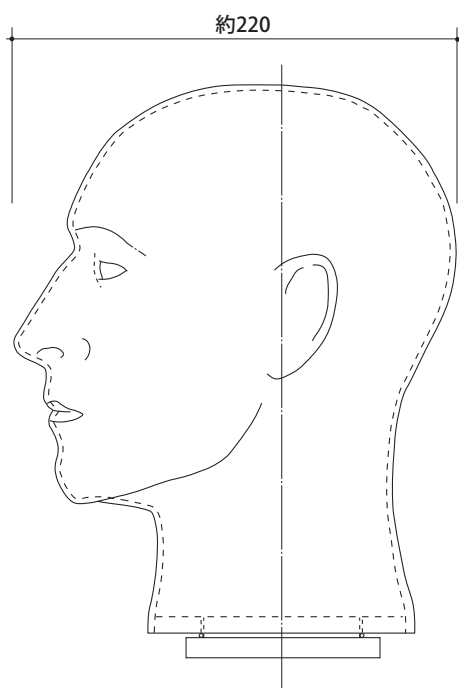

ご使用の前に

セット内容 水溶液の充填方法

セット内容



- a 頭部容器ファントム
- b ワセリン
- c 塩化ニッケル 10mM 水溶液
- d 水溶液用キャップ

水溶液の充填方法



水溶液を入れたダンボール箱の蓋部分にある円形の切り取り口を抜き取り、内部の水溶液容器の蓋を開けて付属の水溶液用キャップを取り付けます。



頭部容器の頸部分の蓋を取ります。
水溶液は段ボール箱ごと抱えてビーカー等の別容器に水溶液を入れます。
頭部容器を逆さまにして、内部に水溶液を充填します。
頭部容器に蓋を取り付ける際は、蓋のゴムパッキン部にワセリンを塗り付けてから、蓋をしっかりしめてください。



株式会社 **京都科学**

URL ● <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail ● rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL: 075-605-2510 (直通) FAX: 075-605-2519

■東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL: 03-3817-8071 (直通) FAX: 03-3817-8075

2017.12