

Caution:

Don't mark on the phantom with pen or leave
printed materials contacted on its surface.
Ink marks on the phantom will be irremovable.

PH-60

Tough Whole Body Phantom "PBU-90 Rugged"

Instruction manual

Contents

- Please read before training

General information P. 1~ P. 3

- Preparation

Assembly manual P. 4~ P. 9



Tough Whole Body Phantom "PBU-90 Rugged"

The PBU-90 is life-size human phantom with a life-size synthetic skeleton embedded in radiological soft tissue substitute.

There are no metal parts that would impair realistic imaging. The joints, knees, elbows, shoulders and hip-joints, are flexible and able to maintain the necessary positions.

The phantom is separable into 10 parts facilitating a variety of application. A positioning stand for the head part comes with the set.

Specifications

Tough Whole Body Phantom "PBU-90 Rugged"

Intended application: Positioning phantom for plain radiography

Length: approx. 165cm

Weight: approx. 50kg

Can be dismantled at: shoulders, elbows, hip joints, knees, neck

Embedded organs: lungs with vessels, heart, liver and kidneys

* The product has two 3mm dia holes made in the chest wall to prevent the damage caused by atmospheric pressure change that may occur in transit.

Movable joints and their range of movement

Shoulders: rotate 360 degrees to back and forward, 180 degrees side-ways

Cubital joints (bilateral): bend inward up to 90 degree

Coxae (bilateral): rotate forward up to 90 degrees, then rotate outward up to 45 degrees each.

Articulatio genus (bilateral): bend up to 90 degrees.

Materials: Human tissue substitute (urethane, epoxy, etc.,)

Accessories: Positioning head stand 1 piece

Flat head screwdriver 2 piece

Sample images 1 set

Hand positioning belt 1 piece

Replacement parts: screws, patella bands.

HU numbers of each organ:

liver 70

kidney 30

* The Hounsfield numbers shown above are approximate figures of the calculated values and not actual measurement values.



Please note

- 1) Contours of the bones are slightly modified from actual human x-ray image, to facilitate clearer understanding.
- 2) Basically the phantom is designed to be radiographed under same setting as human body, though, the joints areas may require some adjustment to have better image.





Caution

- 1) Do not make the phantom to take the position unintended by the manufacturer.
It may cause the breakage in the phantom if the joints are forced to bend or rotate to the directions or degrees of angles outside of designed movable range.
- 2) Do not attempt to lift or carry the phantom if the head or limbs are attached to the trunk.
Detach the joints before moving to avoid the excessive force on the joints.
- 3) When the training with the phantom is not made for a while, pay attention to storage condition (posture) of the phantom so as to avoid the burden to the connection area. For example, condition the head has been resting on the pillow for a while can cause the breakage to the neck connection area.
- 4) Do not fasten the screws too tight.
- 5) The phantom is heavy and could cause damage not only to itself but to people or other objects. When you need to handle the assembled phantom, always do it by two or more people with utmost care.
- 6) Don't mark on the phantom with pen or leave printed materials contacted on its surface.
Ink marks on the phantom will be irremovable.

PBU-90 Components

Parts #	Parts name	QTY	Parts #	Parts name	QTY
1	Head	1	21	Connector for left hip joint	1
2	Neck-head connection plate	1	22	Supporting plate for right hip joint	1
3	Trunk	1	23	Supporting plate for left hip joint	1
4	Right upper arm	1	24	Connector for right knee	1
5	Left upper arm	1	25	Connector for left knee	1
6	Right forearm	1	26	Screw bolt for neck connection M12x40	2
7	Left forearm	1	27	Screw bolt for neck connection M10x15	2
8	Right thigh	1	28	Screw bolt for shoulder connection Screw bolt for parts # 22,23 M 8x12	4
9	Left thigh	1	29	Screw bolt for elbow joint M 6x60	4
10	Right lower leg	1	30	Screw nut for elbow joint M 6	4
11	Left lower leg	1	31	Screw bolt for neck/hip joint M8x35	6
12	Right patella	1	32	Screw bolt for knee joint M12x18	4
13	Left patella	1	33	Connection tape for the patellae	2
14	Connector for shoulder A (Right or left)	2	34	Height adjustment panel	1
15	Connector for shoulder B (Right or left)	2	35	Base panel	1
16	Connector for right elbow (lateral side)	1	36	Neck connector	1
17	Connector for right elbow (medial side)	1	37	Neck connector fixture	1
18	Connector for left elbow (lateral side)	1	38	Screw for fixture	1
19	Connector for left elbow (medial side)	1	39	Screw bolt M6x18	2
20	Connector for right hip joint	1	40	Hand positioning belt	1

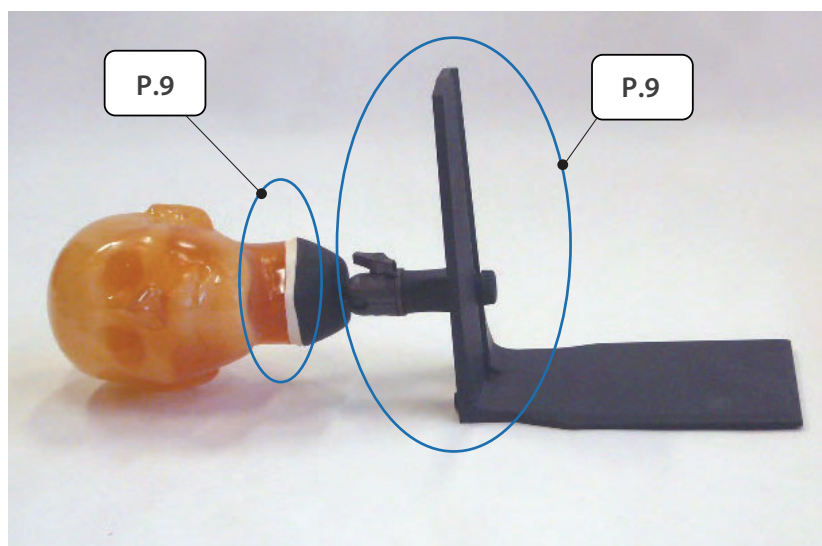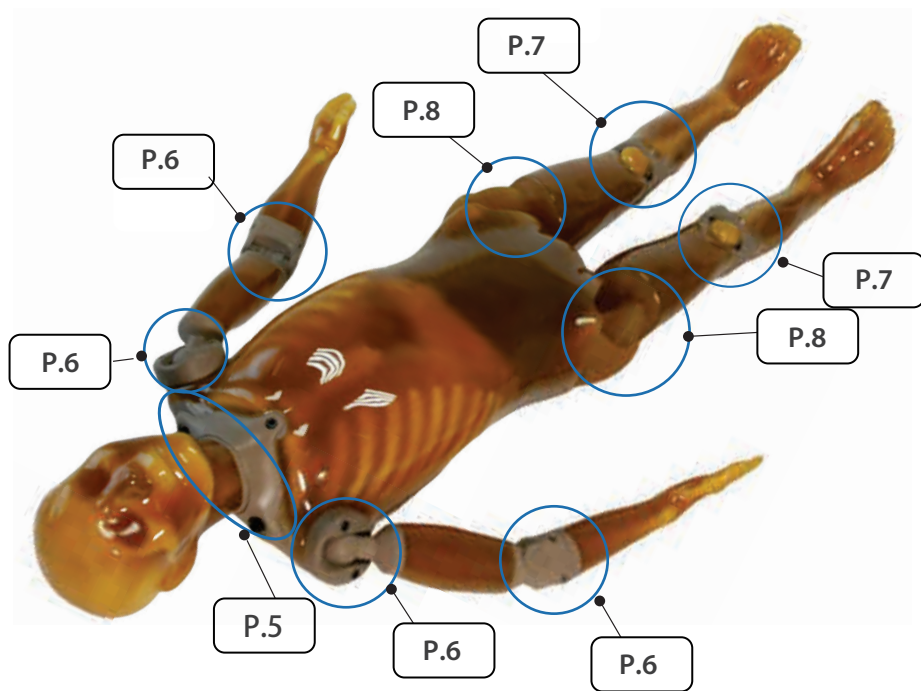

The number indicated on the photos above correspond to the page numbers in this manual.


Assembly manual

※ The circled numbers in the assembly images are parts numbers on the components table on page 3.


< NECK AND HEAD >

1. Remove the three bolts for the neck connection (part #26, #31) and remove the neck head connection plate (part #2) from the trunk.

26 Screw bolt for neck connection
M12×40


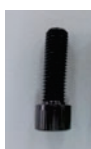


31 Screw bolt for neck/hip joint
M8×35

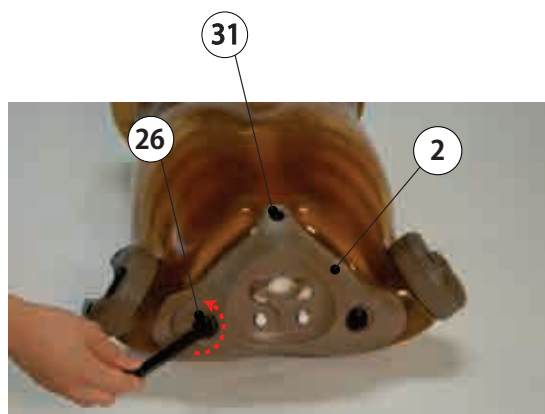

【 Neck sub-assembly 】

2. Screw the neck head connection plate (part #2) on the head (part #1).

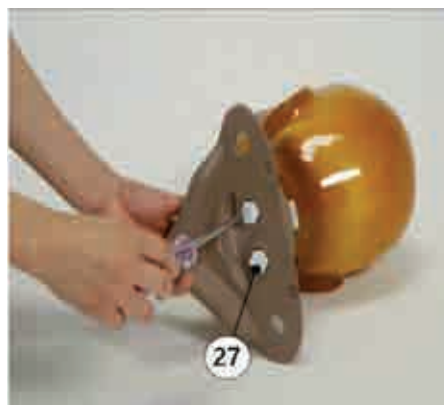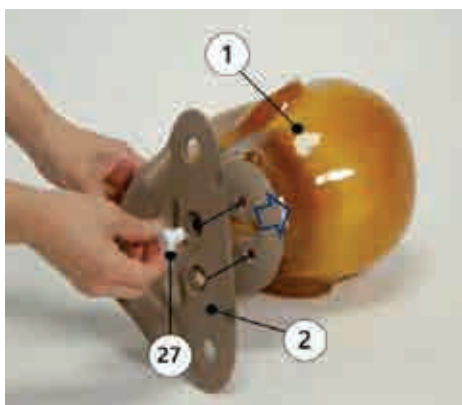

27
Screw bolt for neck connection
M10×15×2

【 Connection of the head and the trunk 】

3. Mount the assembled parts (parts #1 and #2) to the trunk and secure each side with screw bolts (part #26 x 2 and #31 x 1).





Assembly manual


< ELBOWS >

Assemble upper arm parts (part # forearm parts (part #6 or 7) at joint. Fix these parts with elbow connector (part #16 or 18 and #17 or 19).

- (29) Screw bolt for elbow joint M 6×60×4
- (30) Screw nut for elbow joint M 6×4

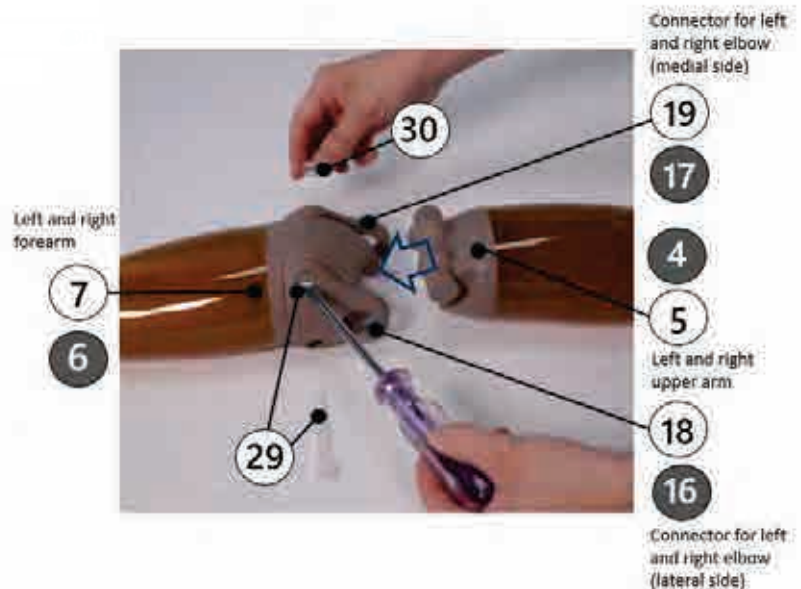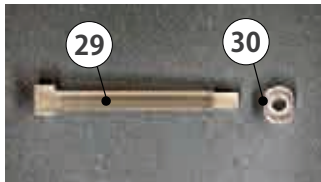

< SHOULDERS >

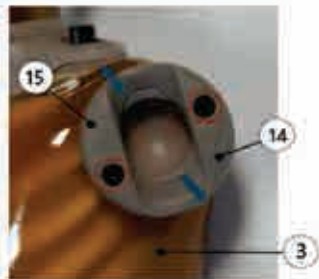


1. Remove the two bolts (part #28) and remove the external shoulder connector parts A (part #14) and connector parts B (part #15).

- (28) Screw bolt for shoulder connection M 8×12×4



2. Then attach the upper arms (parts #4 and #5) at the ball joint to the trunk and place over the two connectors for the shoulder (parts #14 and #15). Secure the connectors with bolts (part #28). Follow these steps for both left and right side of the trunk.


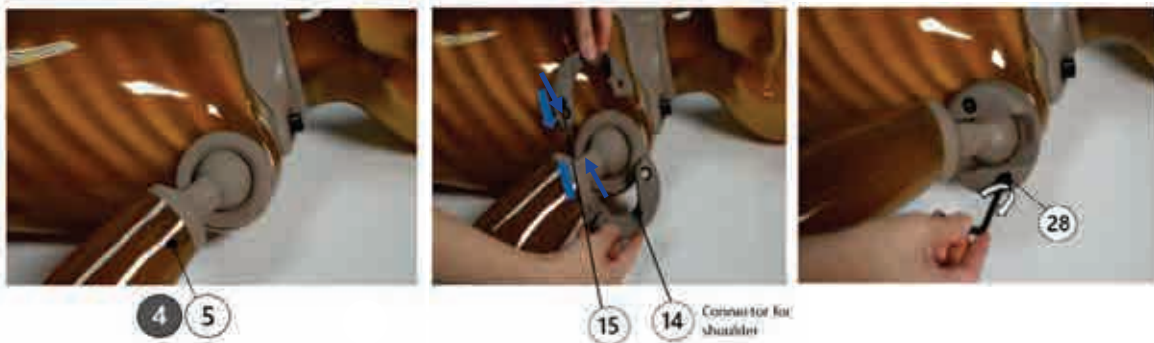


.....
Screw the bolts after confirming the position of the screw hole.
Be careful not to mix up part #4 and 5. The shape of right and left arms are different.

Assembly manual

< KNEES >

1. Connect the thigh (#8, 9) and lower leg (#10, 11) at the knee joint. Thread the kneecap-connection straps, which pass through the left and right patellae (#12, #13), through the holes near the lower end of the thigh parts. Set the connector for knee (#24, 25) to the medial side then screw the knee joint bolt (#32) to fix it.

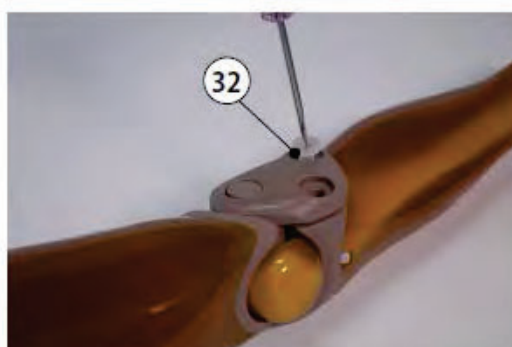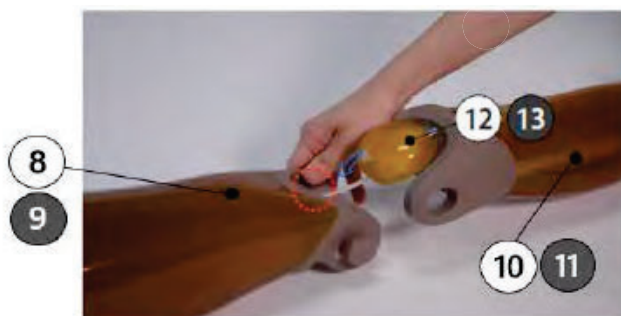


32 Screw bolt for knee joint
M12×20×4



When connecting the knee, please use the screwdriver shown in the photo on the left.

2. After securing the parts, bend the knee. If the kneecap strap has slipped out of the hole in the lower thigh section, push it back in. Once done, the knee assembly is complete.

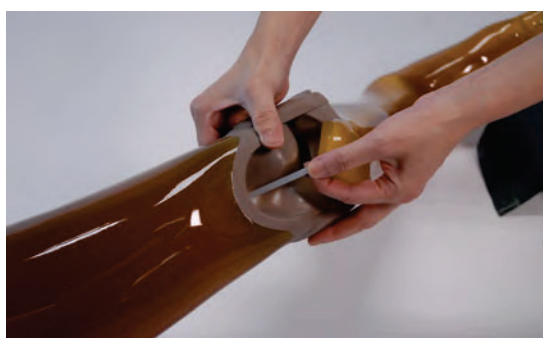


Assembly manual

< HIP JOINTS >


1. Remove the three bolts (part #31) to remove the hip joint connectors (parts #20 and #21). The supporting plates (parts #22 and #23) are already attached at the time of delivery.

31

Screw bolt for
neck/hip joint
M8×35×6

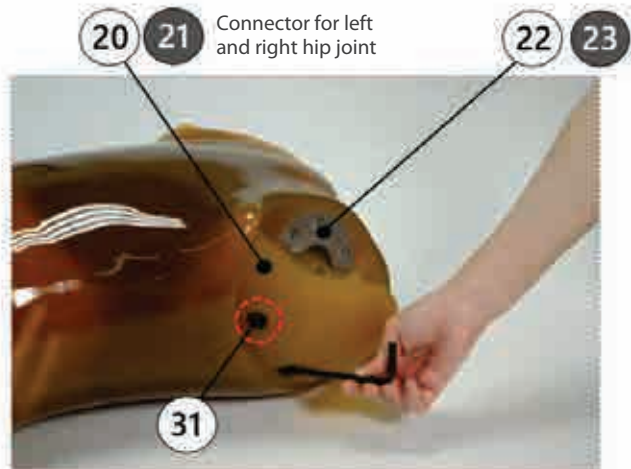


2. Mount the thighs (part#8, 9) so that the femur heads fit in the hip sockets and hold them in place with hip joints connectors (part# 20,21).
Each hip joint connector is fixed to the trunk with three screws. Start from the screw in the center and move to the sides. Hold the thigh upright when you fix the screw at the rear end. Be careful not to confuse parts for left and for right.

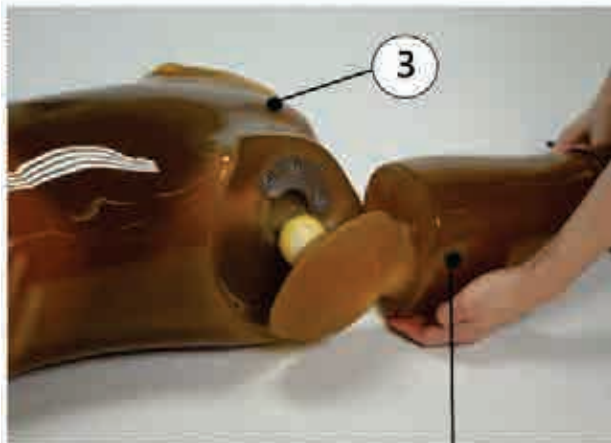

Left and right thigh




Connector for left
and right hip joint

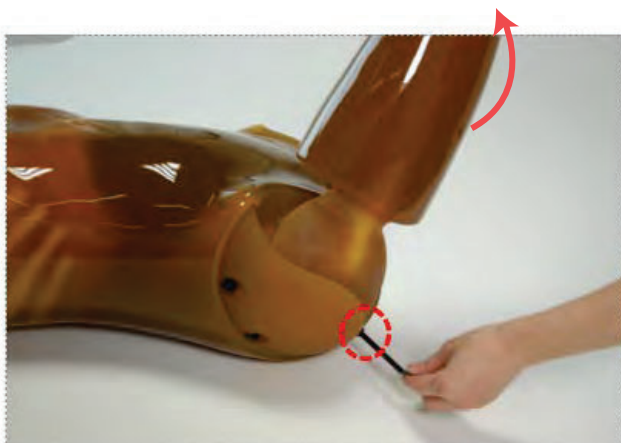

Assembly manual

<HEAD AND STAND>

1. Mount the head phantom to the neck connector and fix it with two screws.



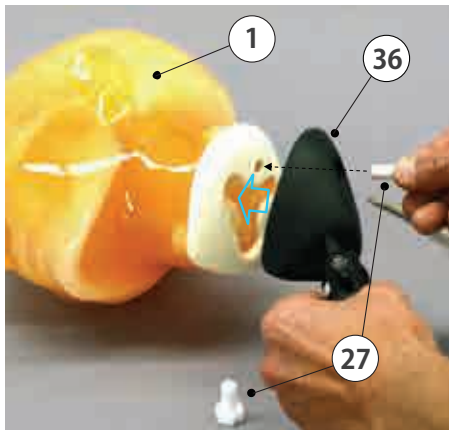


(27) Screw bolt for neck connection M10x15x2



(39) Screw bolt M6x18x2

2. Assemble the two panels. Attach the height adjustment panel (#34) to the base panel (#35) at right angle and fix with two screws (#39). Then, insert the end of the neck connector (#36) in the slit in the panel and fix it with the fixture (#38).

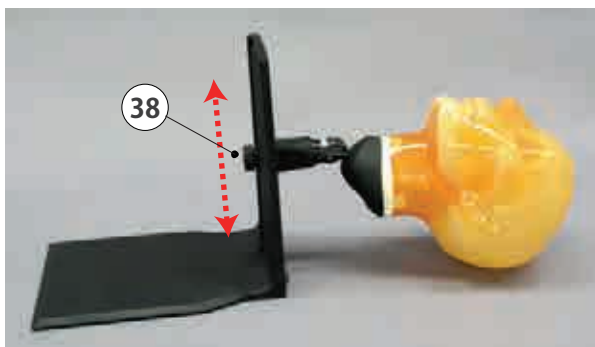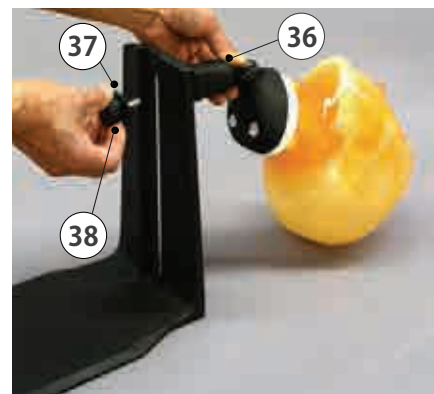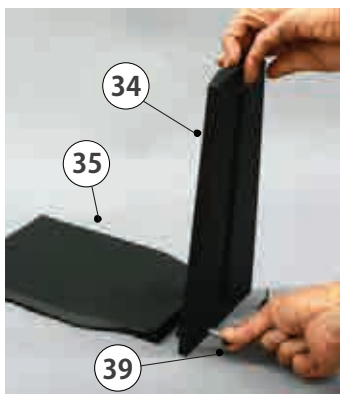

3. The phantom is ready.

Adjust the height of the neck as needed, by loosen the fixture and slide it through the slit. Tighten the fixture again at the designated height.



Caution

Don't mark on the phantom with pen or leave printed materials contacted on its surface.
Ink marks on the phantom will be irremovable.

■ Main Office and Factory (World Wide)

 **KYOTO KAGAKU co.,LTD**

WEB•www.kyotogagaku.com

E-MAIL•rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

15 kitanekeya-cho Fushimi-ku Kyoto 612-8388, Japan

TEL: +81-75-605-2510

FAX: +81-75-605-2519

2025.08

■ North and South American regions:



KKAmerica

Kyoto Kagaku America Inc.

WEB•www.kkamerica-inc.com

E-MAIL•info@kkamerica-inc.com

3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108, USA

TEL: +1-310-325-8860

(Toll-free in North America: 877-648-8195)

FAX: +1-310-325-8867

注：モデル表面に取扱説明書や印刷物などが
直接触れないようにして下さい。
樹脂表面にインクが転写して消えなくな
ります。

PH-60

Tough Whole Body Phantom

耐久型単純撮影用全身ファントム

PBU-90

取扱説明書

目 次

- ご使用の前に
ご使用前の確認と注意 P.1 ~ P.3
- 準 備
組立について P.4 ~ P.9



耐久型単純撮影用全身ファントム PBU-90 製品概要

PBU-90は肩、肘、股、膝関節が可動し、ポジショニングに使用できる撮影用全身ファントムです。分割部分、関節部分については、骨の形状が忠実に再現され、画像上障害となる金属部品は一切使用しない構造になっています。

骨はすべて人工骨を使用しています。また人工骨と軟組織部分は放射線に対し人体に近い特性をもった組織代替物でできています。

撮影時には、必要な部分を分解して個別に使用することもでき、頭部についてはポジショニング用のスタンドが付属しています。

仕様

形式：PBU-90

用途：撮影用人体ファントム

身長：約 165cm

体重：約 50kg

分割できる部位：頸部、両肩、両肘、両股関節部、両膝（10 分割）

可動する関節と可動範囲

両肩：前方向に 360°

横方向に 180°

両肘：90°

両股関節：前方向に 90°、それぞれ 45° 外転

両膝関節：90°

内蔵臓器

肺血管、心臓、肝臓、腎臓

※ 運送中の気圧の変化による破損防止のため、予めボディ胸部に 3mm の穴を 2 箇所設けています。

材 質：軟組織等価材（ポリウレタン樹脂）・骨等価材（エポキシ樹脂）

付属品：頭部固定用台 1 台

交換用ネジ・膝蓋骨用バンド 1 式、マイナスドライバー 2 点

サンプル画像 1 式、手のポジション設定用ベルト 1 点

内蔵臓器の CT 値

肝臓：70 相当

腎臓：30 相当

※ CT値は目安として設定しているもので撮影の条件等により実測の値とは異なります。



ご確認ください

- ① このファントムは実際の臨床画像に比べ骨の輪郭がやや強調されるよう意図的に作られています。
- ② ファントムは放射線に対し人体に近い特性をもった材質で作られていますが、構造上、関節部分の撮影条件は若干生体と異なります。





注意

- ① 破損のおそれがありますので、無理なポジショニングは絶対にしないでください。
- ② 破損のおそれがありますので、ファントムを移動させるときは必ず分解し、首や関節部分に大きな力がかからないようにしてください。
- ③ 破損のおそれがありますので、ネジ部品は絶対に強くしめすぎないようにしてください。
- ④ このファントムは、人体と同等の重量があり落下等すると非常に危険です。組み立てて使用する場合や胴部を移動させる場合は、ケガをしないように必ず2名以上で取り扱ってください。
- ⑤ 保管時におきましては、ファントムの接合部位に負荷が掛からないようにしてください。
特に頭部の下に枕等を置いた状態で長期間保管すると頸部に負担がかかり破損するおそれがあります。
- ⑥ サインペン、ボールペン等でモデルの表面に書き込みをしないでください。
インクが吸収され消えなくなります。
- ⑦ モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂にインクが転写され消えなくなります。

PBU-90 構成部品

部品 番号	部品名称	個数	部品 番号	部品名称	個数
1	頭部	1	21	左脚接続部品	1
2	頭・胴部接続部品	1	22	右脚接続部補強部品	1
3	胴部	1	23	左脚接続部補強部品	1
4	右上腕	1	24	右膝接続部品	1
5	左上腕	1	25	左膝接続部品	1
6	右前腕	1	26	接続用ボルト M12x40	2
7	左前腕	1	27	頭・首部接続用ボルト M10×15	2
8	右大腿	1	28	肩接続用ボルト M8×12 脚接続部補強部品用(22、23)ボルト	4
9	左大腿	1	29	肘接続用ボルト M6×60	4
10	右下腿	1	30	肘接続用ナット M6	4
11	左下腿	1	31	頭・胴部/脚接続用ボルトM8×35	6
12	右膝蓋骨	1	32	膝接続用ボルト M12×18	4
13	左膝蓋骨	1	33	膝蓋骨接続用バンド	2
14	肩接続部品 (左右兼用) A	2	34	上下位置固定柱	1
15	肩接続部品 (左右兼用) B	2	35	底板	1
16	右肘接続部品 外側	1	36	首部接続部品	1
17	右肘接続部品 内側	1	37	ノブ受け板	1
18	左肘接続部品 外側	1	38	高さ固定用ノブ付ネジ	1
19	左肘接続部品 内側	1	39	ノブ付ボルト M6×18	2
20	右脚接続部品	1	40	手のポジション設定用ベルト	1

組立について

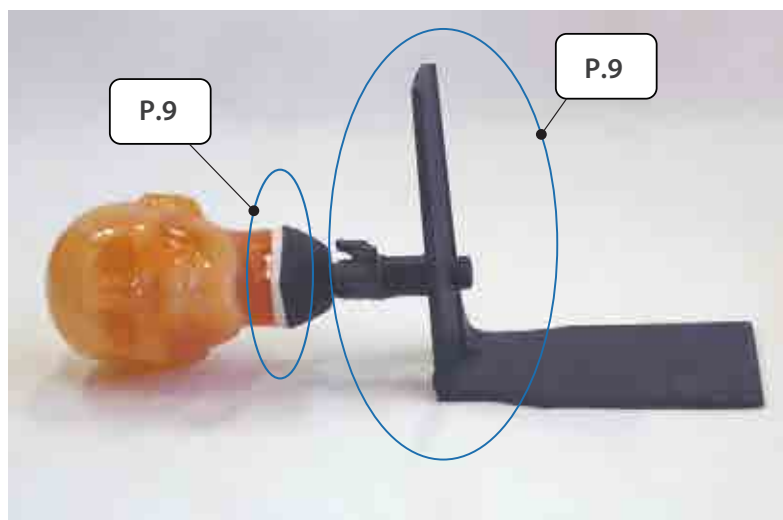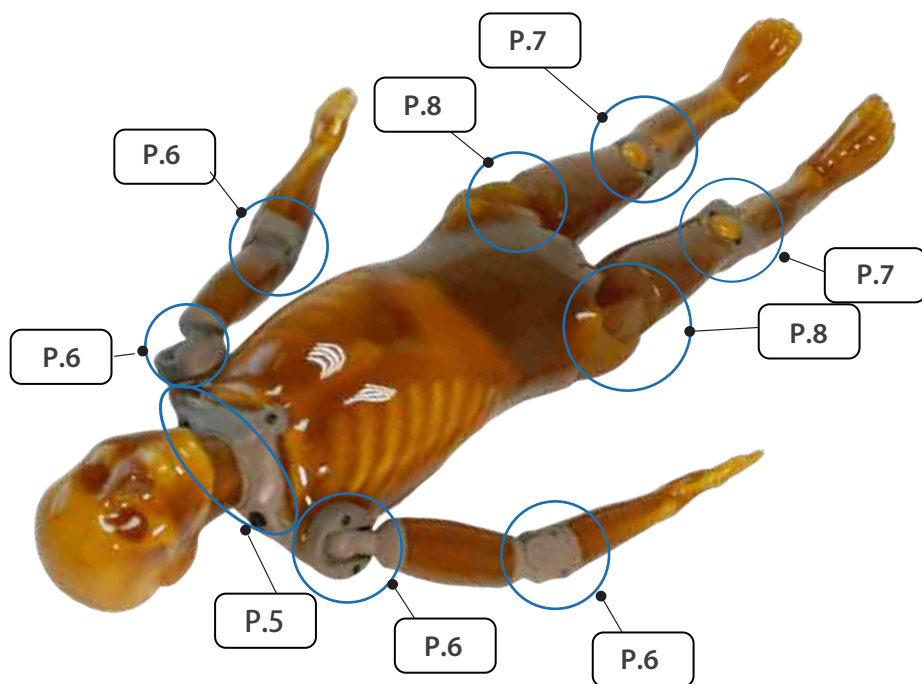

それぞれの部位の組立は、上の写真で記したページを参照してください。

※各部品の外観は実際の商品とは異なる場合があります。予めご了承ください。

組立について

組立手順を紹介していきますが、写真中の部品番号については3ページの構成部品表を参照ください。


＜首部分の部品取り付け＞

1. 3箇所の頭・胴部接続用ボルト (部品番号26、31)をはずし、頭・胴部接続部品 (部品番号2)を胴部から取り外します。

(26) 頭・胴部
接続用ボルト
M12×40




(31) 頭・胴部/脚
接続用ボルト
M8×35

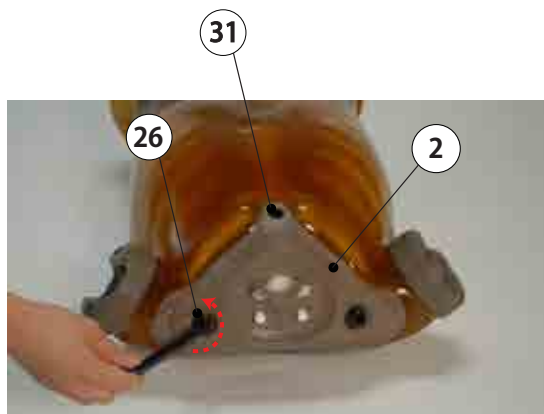

【首部分の部品取り付け】

2. 取り外した接続部品を頭部 (部品番号1) に組み付け、頭・首部接続用ボルト (部品番号27) 2本で固定します。

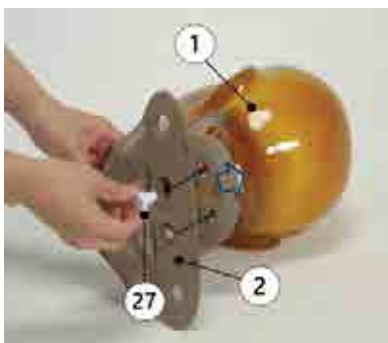

(27)
頭・首部接続
用ボルト
M10×15×2

【頭部と胴部の組立】

3. 組み立てた頭部 (部品番号1+2) を胴部の肩に接続し、頭・胴部接続用ボルト (部品番号26)2本と、頭・胴部/脚接続用ボルト (部品番号31)1本で固定します。





組立について

＜肘関節部の組立（写真は左肘関節部）＞

1. 上腕部（部品番号 4,5）と前腕部（部品番号 6,7）を関節部で組み込み、両サイドから外側と内側用の肘接続部品（部品番号 16, 18と17,19それぞれ各1点）で挟み、肘接続用ボルトとナットで固定します。

②⑨ 肘接続用ボルト M 6×60×4

③⑩ 肘接続用ナット M 6×4

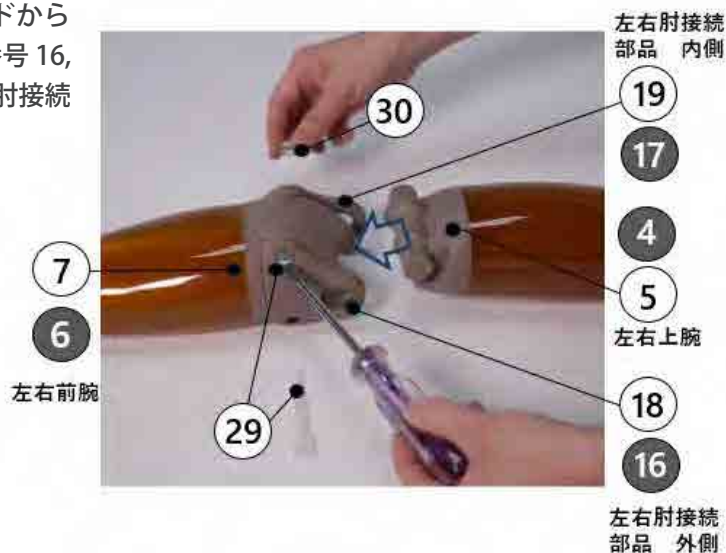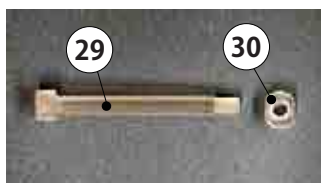

＜肩部分の組立（写真は左肩部）＞



1. 2箇所（14, 15）のボルトをはずし、胴部から肩接続部品 A（部品番号 14）と肩接続部品 B（部品番号 15）を取り外します。

②⑧ 肩接続用ボルト M 8×12×4



2. 次に上腕部（部品番号 4,5）を胴部に組み付け、接続部品 A,B で胴体側取付部の円形の突起部を挟み込むようにして組み合わせ、2本の肩接続用ボルト（部品番号 28）で固定します。部品は A（14）、B（15）共、左右兼用です。





.....
上腕部は左右で形状が違いますので、取り違えないようよくお確かめください。
ボルトでの固定は、ネジ穴の位置を確認し、位置を合わせてから行ってください。

組立について

＜ 膝部分の組立（写真は右膝関節部）＞

1. 大腿部（部品番号 8,9）と下腿部（部品番号 10,11）を膝関節部で組み込み、左右膝蓋骨（部品番号 12,13）に通してある膝蓋骨接続用バンドの先を大腿部下部の穴に差し込み、膝部分の内側に膝接続用部品（部品番号 24, 25）をあてはめ膝接続用ボルト（部品番号 32）2本で固定します。

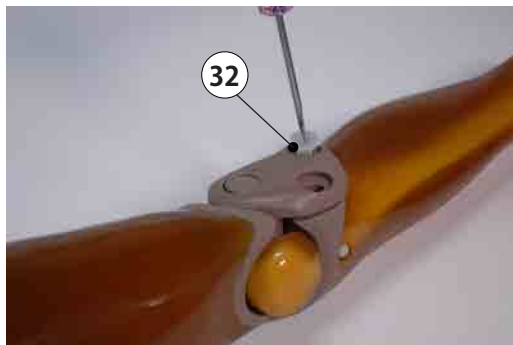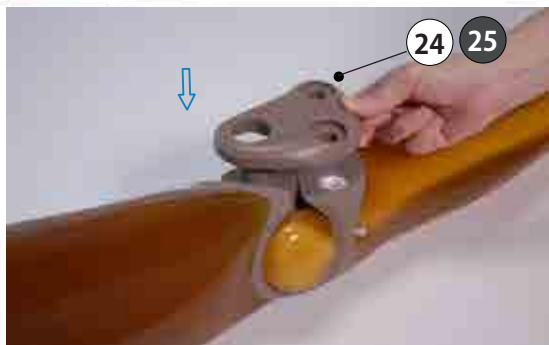

32 膝接続用ボルト
M12×20×4



膝接続時、左の写真の
ドライバーをご使用
ください。

2. 固定後、大腿部下部の穴から膝蓋骨接続用バンドが外れている場合は、膝部を折り曲げ、再度差し込んでください。
膝部の接続が完了します。



組立について

＜股関節部の組立（写真は右股関節部）＞


1. 3箇所の脚接続用ボルト(部品番号31)を外し、脚接続部品(部品番号20,21)を胴部から取り外します。

脚接続部補強部品(部品番号22,23)は分解及びセット時共、胴部から取り外す必要はありません。


③①
頭・胴体/脚接続用
ボルトM8×35×6



左右脚接続部品 ②① 左右脚接続部補強部品 ②② ②③

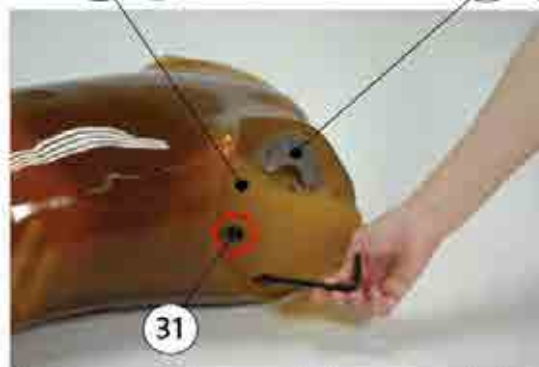


2. 大腿部(部品番号8,9)を胴部下部にセットします。大腿上部の球体部分を胴部下部の穴にあてはめ、脚接続部品(部品番号20,21)を被せ、脚接続用ボルト(部品番号31)で片側3箇所固定します。

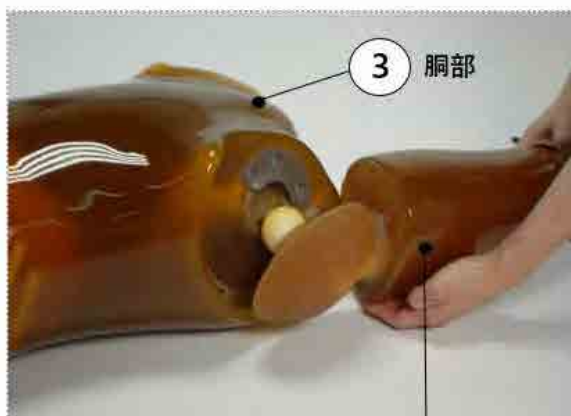

左右大腿部 ⑧ ⑨



③① 左右脚接続部品 ②① ②②


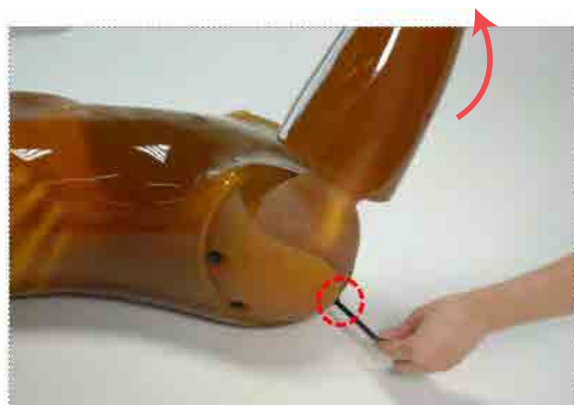


.....
ボルトは中央部から固定し、お尻側のボルトは脚部を前方に持ち上げると、固定しやすくなります。
大腿部は左右で形状が違いますので、取り違えないようよくお確かめください。

組立について

＜ 頭部固定用台の組立と頭部の接続 ＞

1. 首部接続部品 (部品番号 36) と頭部の底部分を、頭・首部接続用ボルト (部品番号 27) 2本で固定します。

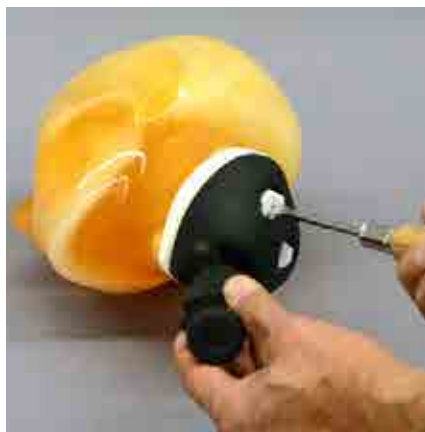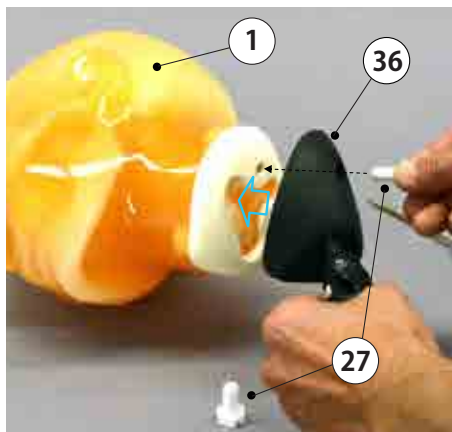



27 頭・首部
接続用
ボルト
M10×15×2



39 ノブ付ボルト
M6×18×2

2. 頭部固定用台を組み立てます。上下位置固定柱 (部品番号 34) と底板 (部品番号 35) をノブ付ボルト (部品番号 39) 2本で固定します。

次に首部接続部品 (部品番号 36) の端の凸部を上下位置固定柱のスリットに差し込み、ノブ受け板 (部品番号 37) を通した高さ固定用ノブ付ネジ (部品番号 38) で固定します。

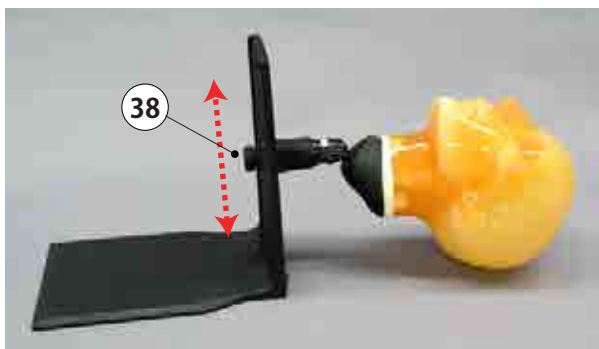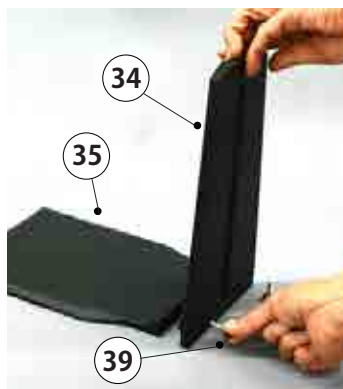

3. 頭部のセッティング完了。

※高さ固定用ノブ付ネジ (部品番号 38)
で首を持ち上げる高さを調節してくだ
さい。



注意

モデル表面に取扱説明書や印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収され消えなくなります。

・ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記 (株)京都科学まで御連絡ください。



株式
会社

京都科学

URL : <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail : rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL: 075-605-2510 (直通)
FAX: 075-605-2519

■東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL: 03-3817-8071 (直通)
FAX: 03-3817-8075