



注意

モデル表面に印刷物などが直接触れないように
してください。
樹脂表面にインクが吸収されて消えなくなります。

PH-72

MRI乳房コイル評価ファントム

取扱説明書

目次

- ・ セット内容 -----P. 1
- ・ はじめに -----P. 2
- ・ 準備 -----P. 4




株式
会社

京都科学

セット内容

セット内容と各部の名称

ご使用の前に構成品が全て揃っているかご確認ください。

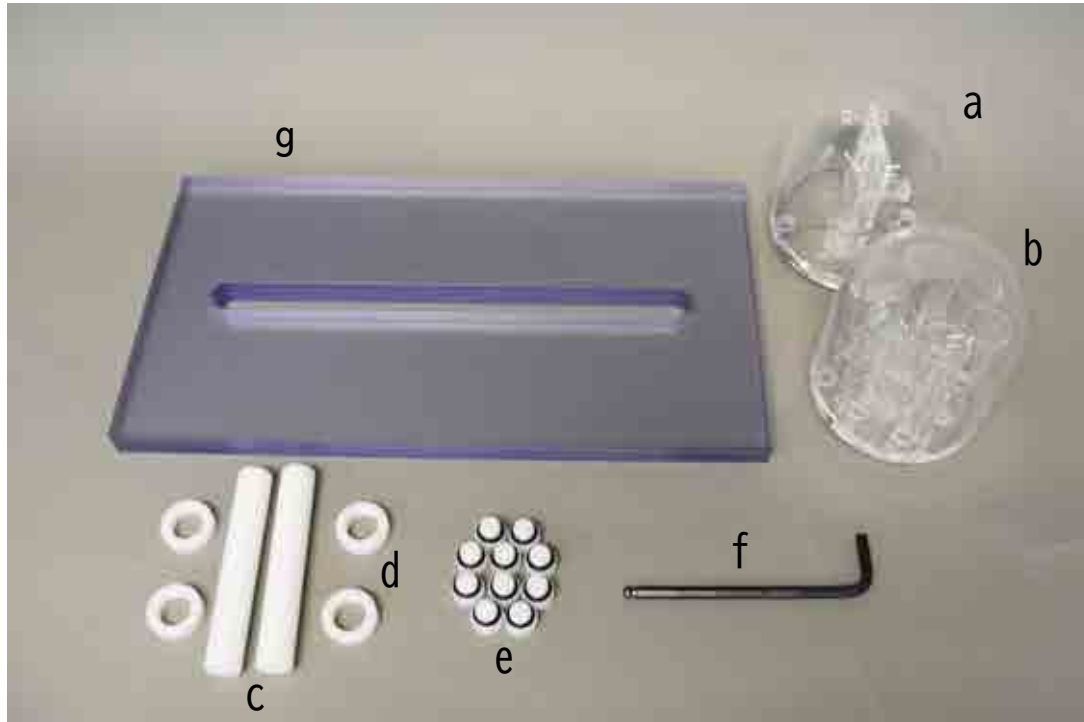

a. スリットファントム	----	1	e. ネジ栓(六角穴付き)	----	10
b. コントラストファントム	----	1	f. 六角レンチ	----	1
c. 調整支持具棒	----	2	g. 固定板	----	1
d. 調整支持具リング	----	4			

注意

● 取り扱いにご注意ください

硬質樹脂を使用していますので、落下や強い衝撃を与えたり、溶剤の付着で破損や劣化の原因となります。

● 高温多湿を避けて保管してください

使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
変形や故障の原因となります。

● 水または中性洗剤で拭き取ってください

ファントムの汚れは水または中性洗剤で拭き取ってください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。

● サインペンなどで書き込まないでください


サインペンなどでファントムに書き込むと、インクが消えなくなります。

はじめに

仕様 スリットファントム



仕様図

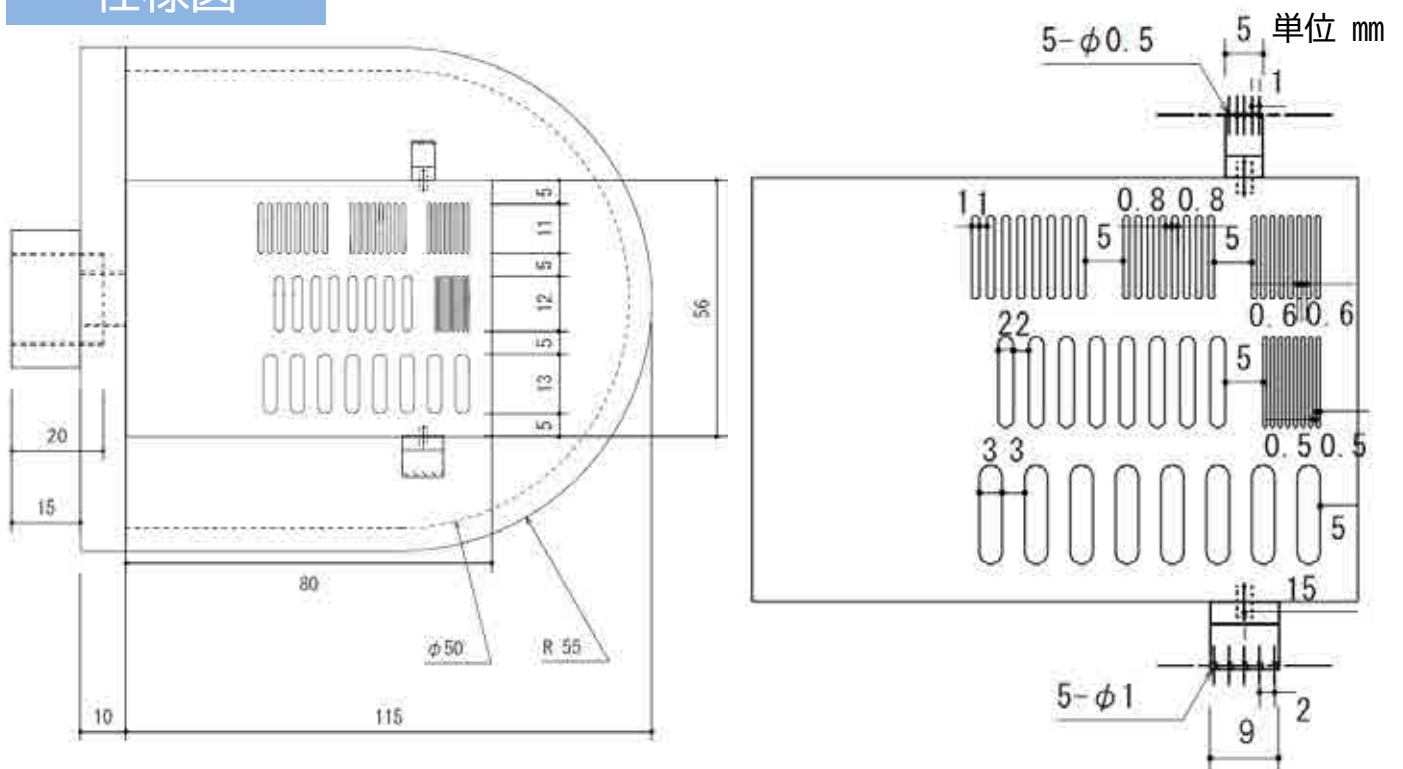


はじめに

仕様 コントラストファントム



仕様図

単位 mm

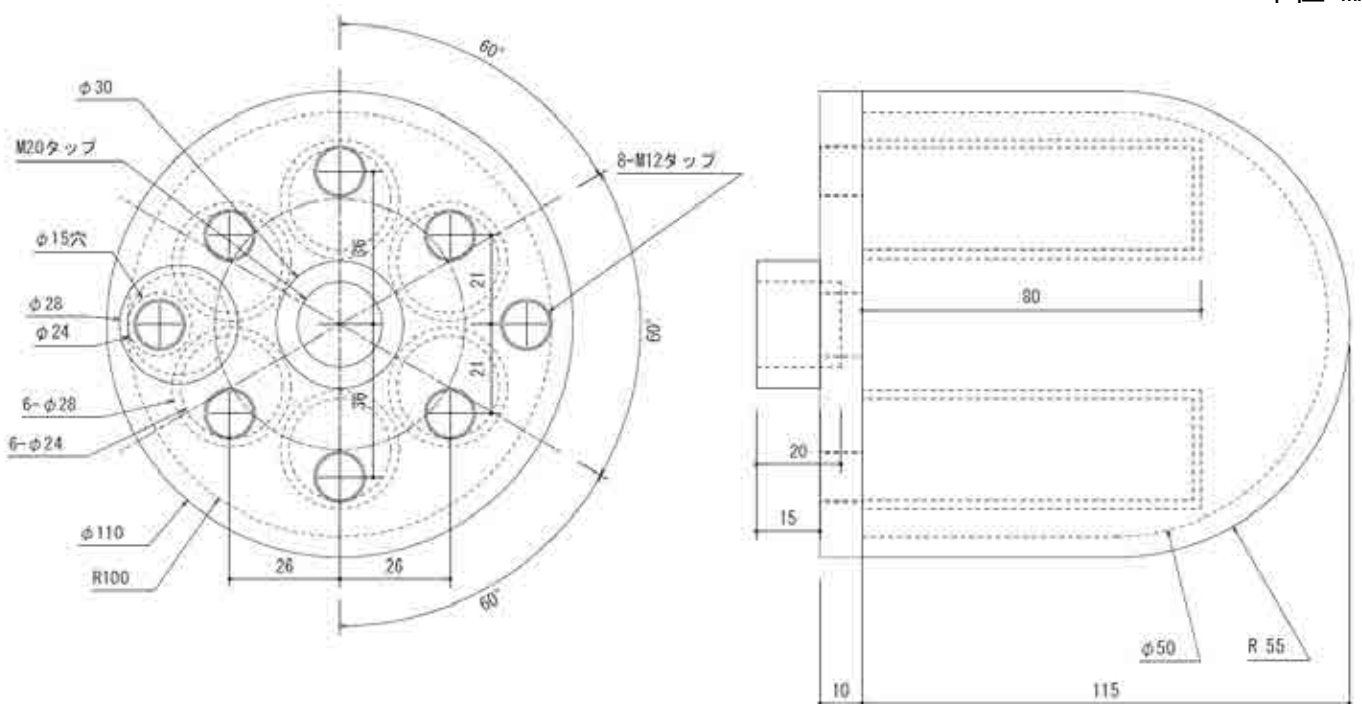

準備

ファントムの組み立て

1. ファントム本体にお持ちの測定液を充填し、ネジ栓を付けます



2. ファントム本体に調整支持具を取り付けます



準備

ファントムの組み立て

3. 固定板に取り付けます
リングで固定板を挟むように取り付けてください



ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。



株式
会社

京都科学

URL

<http://www.kyotokagaku.com>

e-mail

rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地

TEL：075-605-2510（直通）

FAX：075-605-2519

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号

NREG本郷三丁目ビル2階

TEL：03-3817-8071（直通）

FAX：03-3817-8075

2025/10