

単純撮影用小児全身ファントム PBU-70 NEW


PH-2C

型番 PH-2C

品名コード 41350-300



PBU-50 約165cm

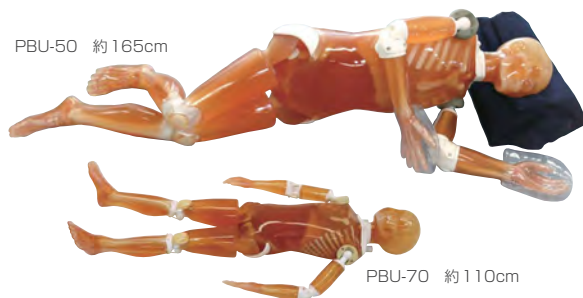

PBU-70 約110cm

仕様	本体	5歳児全身モデル
	材質	軟組織部/ポリウレタン樹脂 骨格/エポキシ樹脂製人工骨
	重量	約20kg
	大きさ	約110cm
構成	分解数	10
	モデル本体	1体
	頭部固定具	1台
	交換用肩関節 及び 固定ネジ	1式
	ドライバー	1点
	結束バンド	1式
	単純X線サンプル画像 取扱説明書	1セット




■ 実習項目

全身のX線単純撮影、CT撮影実習

■ 特長

- 生体と同等のX線吸収率をもった軟組織等価材、骨等価材を使用しています。
- 各関節は可動でき、撮影目的に応じたポジション設定が可能です。
また各パーツを分解（10パーツ）して個別に撮影もできます。
- 内部の臓器は心臓、肝臓、腎臓、肺野主血管が配置されており、CT撮影で肝臓、腎臓の位置確認が可能です。
- 右手部のみ、単純X線撮影で海面骨の陰影を確認することができます。
- 足部はそれぞれ底屈、背屈を表現しています。
- 撮影に障害となる金属部品は使用していません。

X線撮影画像

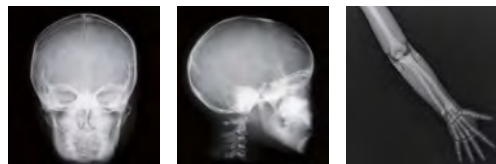

CT撮影画像



PBU-70 構成部位（10分割）

分割でき、それぞれ単体撮影が可能です。

