



NKSコロンモデル(CTC解析モデル)

型番	コードNo
MW24	11403-000

監修・指導：野田げんきクリニック 野田勝久
きただクリニック。 北田学利
松島クリニック 鈴木康元

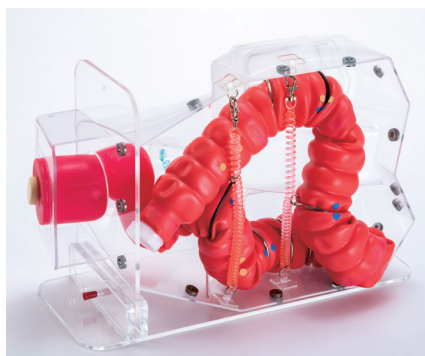

左側臥位

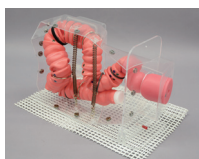

右側臥位



仰臥位

実習項目

CTC (CT Colonography) を用いた腸管形態の解析から、実地臨床で経験する基本腸管形態を、以下の3パターンに分類しました。

- ① Small α ループ
(HOLD法：引き主体の挿入法)
- ② Large α ループ
(Push法：押し主体の挿入法)
- ③ Nループ
(mix法：押しと引きをmixした挿入法)

CTC解析結果をもとに作成した新コロンモデル 再現性を高めた腸管形態により大腸内視鏡技術が向上

特長

- 透明ボディの採用で、スコープの確認や腸管の形状が確認できます。
- 直腸の再現性を重視し、CTC解析により腸管形態を3つにパターン化。
- 軽量・小型化で、メンテナンスも簡単です。

仕様

本体：大腸ルートモデル
大きさ：約W43×D28×H16cm
重量：約6.0kg
材質：硬質・軟質特殊樹脂

構成

ボディ本体 1体 潤滑剤(水溶性) 50mL 15袋
腹部カバー 1点 内視鏡ゼリー 20mL 15袋
ベース台 1点 活用の手引き(DVD) 1点
腸管部(肛門キャップ付) 1点 専用ケース 1点
すべり止めシート 1点 取扱説明書
ティスポカップ 1点

交換部品

NKS 腸管部
(注入口蓋・肛門蓋付) 1点
11403-010

消耗品

潤滑剤 水溶性 15袋(50mL入)
11403-020
内視鏡ゼリー 15袋(20mL入)
11403-030

大腸内視鏡トレーニングモデル

型番	コードNo
M40	11361-000



実習項目

・大腸内視鏡検査

難易度の異なる大腸の走行を自在に設定でき、肛門が開閉します

特長

- 生体に近い柔らかさと質感、挿入感を備えた大腸モデルです。
- 大腸各部の長さや固定位置を変化させることで、内視鏡挿入の難易度を変えることができます。
- 肛門部の開閉により、実際の大腸と同様、送気や吸引操作により管腔が変化します。

仕様

本体：成人腹部モデル
大きさ：W48×D22×H30cm
重さ：約6.5kg
材質：軟質特殊樹脂・硬質樹脂

構成

モデル本体 1体 潤滑剤(水溶性) 50mL 30袋
腸管部 1式 内視鏡用ゼリー 20mL 30袋
肛門弁 1点 希釈ボトル 1本
ゴム球 1点 体位固定スタンド 1点
腹部カバー 1点 ゴムシート 1枚
取付具 1式 肛門蓋 1点
腸固定位置ガイド 5枚組 1式 取扱説明書

交換部品

腸管部 腸管部注入口蓋(外蓋・内蓋)・肛門蓋付 11361-010
肛門弁 ゴム球付 11361-020
取付具一式(バネ無10個・バネ有5個・クリップ1個・取外しヘラ1枚) 11361-030

腸固定位置ガイド(5枚一式・練習の手引き付) 11361-120

消耗品

潤滑剤 水溶性 30袋(50mL入) 11361-040
内視鏡用ゼリー 30袋(20mL入) 11361-050