

MW24



# Entrenador de Colonoscopio 3D NKS

## Representación tridimensional del colon, basada en estudios analíticos de los datos de Colonoscopia por TC


### Supervisión del Producto

Katuhisa Noda, MD, Noda-Genki Clinic  
Takatoshi Kitada, MD, Kitada Clinic  
Yasumoto Suzuki, MD, Matsushima Clinic


La estructura tridimensional del colon ofrece el entrenamiento de una variedad de técnicas como la prevención de formación de bucles, reducción de los mismos incluyendo técnicas de inserción que forman bucles intencionalmente.

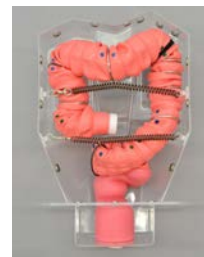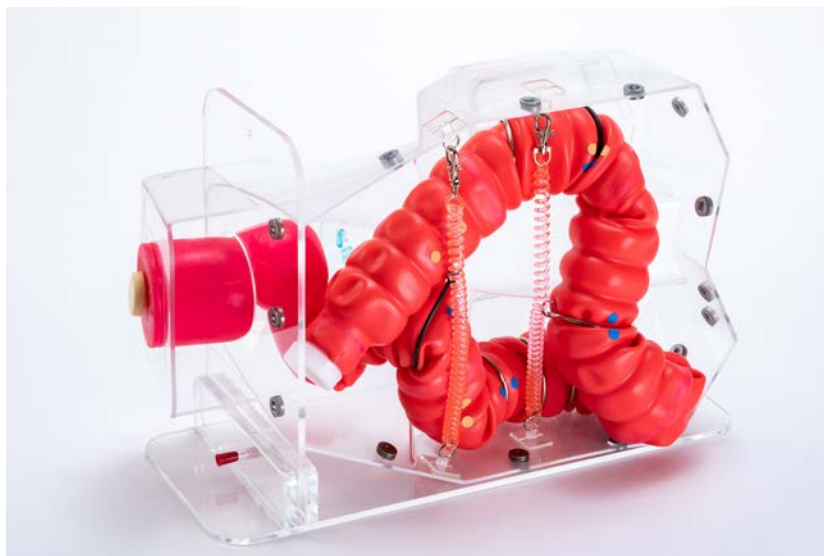

Bucle alfa pequeño

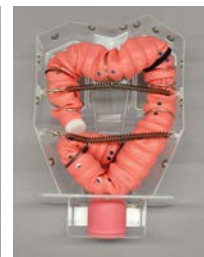

Bucle alfa largo

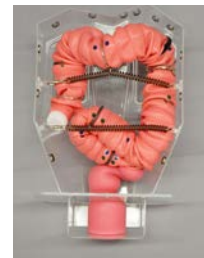

Bucle N

### CARACTERÍSTICAS

- 1 | El cuerpo transparente permite una observación directa de la ubicación de la punta del colonoscopio dentro del colon.
- 2 | Anatomía rectal estable: el simulador está diseñado para adquirir las habilidades de colonoscopia que utilizan las tres válvulas de Houston como puntos de referencia, que aparecen en los mismos sitios siempre.
- 3 | El colon sigmoide se puede ajustar para tomar una de las tres morfologías más comunes. Los patrones se pueden cambiar rápidamente deslizando los puntos de fijación y moviendo el tubo del colon.
- 4 | El simulador es resistente al agua y se puede limpiar fácilmente con agua.
- 5 | Ligero y compacto, facilitando el manejo y transportación.

### TECNICAS

- | Inserción de colonoscopio en tres patrones:
  - Bucle alfa pequeño (método de pull)
  - Bucle alfa largo (método de push)
  - Bucle N (método de pull/push)
- | Inserción del colonoscopio en tres posiciones:
  - Lateral izquierdo
  - Lateral derecho
  - Supina
- | Compresión abdominal manual

### DESCRIPCION

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 43 x 28 x 16 cm/17 x 11 x 6.3 plgds  
Peso: 6kg / 13.2lbs

#### MATERIALES

Resina blanda, resina dura  
Libre de látex

#### CONTENIDO DEL JUEGO

1 cuerpo transparente	1 tapete antideslizante
1 membrana abdominal	1 jarra de plástico
1 base para cuerpo	15 lubricante
1 tubo de colonrecto (con una tapa y tapón)	15 gel para colonoscopio
	1 caja de almacenamiento
	1 manual de instrucciones

#### REPUESTOS

11403-010  
tubo colon-rectal con tapa y enchufe para MW24  
11403-020  
lubricante empaque azul (15x50ml)  
11403-030  
gel para endoscopio (15x20ml)

\* El colonoscopio no está incluido.