



# Fantoma de Ecografía Abdominal con Patologías "ABDFAN"

## Fantoma de ultrasonido abdominal con patologías

Unico fantoma de ultrasonido abdominal de alta fidelidad que facilita el entrenamiento efectivo compatible con aparatos de ultrasonido reales


### Supervisión del Producto

Junji Machi, MD, PhD  
University of Hawaii at Manoa and  
Kuakini Medical Center



\*EL FULL SET  
incluye el modelo  
anatómico "ECHO-ZOU"

Lesiones simuladas en hígado, páncreas, riñón, bazo, vesícula biliar

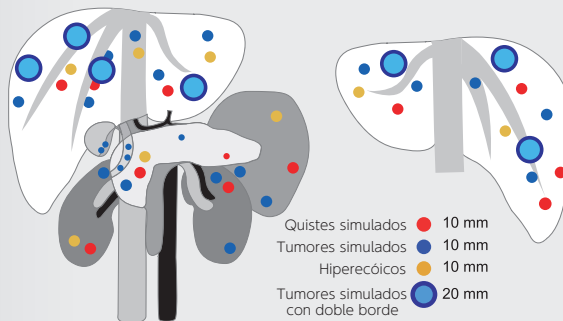

Quistes simulados 10 mm  
Tumores simulados 10 mm  
Hipercálcicos 10 mm  
Tumores simulados con doble borde 20 mm

## CARACTERÍSTICAS

- 1 | Anatomía hepatobiliar, pancreática y abdominal detallada
- 2 | Los ocho segmentos hepáticos de Couinaud se pueden localizar
- 3 | ABDFAN tiene varias lesiones simuladas para proveer una variedad más amplia de entrenamiento

## TECNICAS


- | Bases de sonografía abdominal:
  - Cortes seccionales y anatomía sonográfica
  - Demostración sonográfica de cada órgano individual
  - Localización de los segmentos hepáticos de Couinaud

## ANATOMIA

- | Hígado (anatomía segmental, sistemas venosos portal y hepático, ligamentos teres y venoso)
- | Conducto biliar (vesícula, conducto cístico, conductos biliares intra y extrahepáticos)
- | Páncreas (conducto pancreático)
- | Bazo / riñones
- | Estructuras vasculares detalladas (aorta, vena cava, tronco celiaco y sus ramas, vena portal y sus ramas, vasos mesentéricos superiores, vasos renales, y más)

## PATOLOGÍAS

- | Lesiones hepáticas (císticas y sólidas)
- | Cálculos en vesícula y conducto biliar
- | Tumores pancreáticos (una vena portal invasiva)
- | Lesiones esplénicas
- | Lesiones en ambos riñones
- | Tumor suprarrenal izquierdo

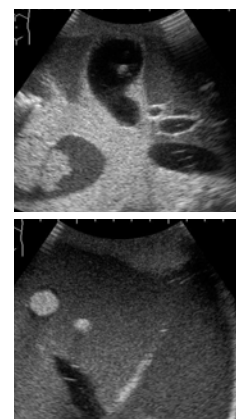

## DESCRIPCION

### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 29x19x31cm / 11.4x7x12.2 plgds Peso: 12kg / 26.5lbs

### MATERIALES

Elastómero de poliuretano  
Libre de látex

\* El aparato de ultrasonido no está incluido

### CONTENIDO DEL JUEGO

US-1B (41900-030) "ABDFAN"	US-1B (41900-100) "ABDFAN" FULL SET
1 fantoma de ultrasonido	1 fantoma de ultrasonido "ABDFAN"
1 "ABDFAN"	1 modelo anatómico "ECHO-ZOU"
1 almohada de posicionamiento	1 almohada de posicionamiento
1 tutorial en DVD	1 tutorial en DVD
1 caja de almacenamiento manual de instrucciones	1 caja de almacenamiento manual de instrucciones