

## Simulator Pediatric IV Hand

# 小児の手背静脈注射シミュレータ

(幼児・小児 腕モデル各2セット)

M95 11350-000 ¥お問い合わせください

**乳幼児への手背部静脈内持続点滴 および固定法の  
トレーニングができます。**

乳児・幼児2種類の腕モデルセットで、それぞれ2箇所の注射部位で練習できます。  
乳幼児の血管の細さ・深さ・硬さ・血管走行を、忠実に表現しています。  
乳幼児の手のふっくらした特長を表現し、触診時の血管の触感や注射針の刺入感も  
できる限り実際に近づけ、臨場感のあるトレーニングを可能にしました。



# M95 小児の手背静脈注射シミュレータ

## 特長

- 乳幼児への静脈注射・採血・点滴静注のトレーニングが2箇所の手背部静脈からできます。
- 乳幼児の実際の皮膚感・刺入感にきわめて近い素材を使用していますので臨場感のある実習が可能です。
- 手甲・手指の屈折が可能で、「手を握る」などの動作がシミュレーションでき、台の角度も自由に変えられます。
- 血液の逆流（フラッシュバック）が確認できます。
- 乳幼児の血管の細さ・深さ・硬さ・血管走行を忠実に表現しています。
- 消耗部品（腕ユニット）を交換するだけで長期にわたり使用でき経済的です。



## 仕様・価格

M95 小児の手背静脈注射シミュレータ 11350-000 ￥お問い合わせください

### 仕様

本体：乳児・幼児腕モデル

材質：軟質特殊樹脂

大きさ：乳児 約W23×D6×H5cm  
幼児 約W30×D8×H6cm

### 構成

- |                    |    |
|--------------------|----|
| ① 腕モデル（幼児3歳～4歳を想定） | 2台 |
| ② 腕モデル（乳児1歳前後の想定）  | 2台 |
| ③ 小児手背専用台          | 2台 |
| ④ 循環ポンプ            | 1台 |
| ⑤ 模擬血液（粉末）         | 1点 |
| ⑥ 広口びん             | 1点 |
| ⑦ ビーカー             | 1点 |
| ⑧ スプーン             | 1点 |

取扱説明書



## 交換部品




幼児用腕モデル  
11350-010



乳児用腕モデル  
11350-020



小児手背専用台  
11350-030

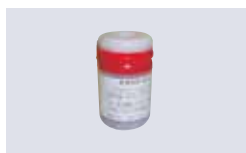

模擬血液粉末 30g  
11266-080

## 静脈留置針を使ったトレーニング



幼児用腕モデル



乳児用腕モデル

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

## 取扱店

## 製造元



株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com>  
e-mail [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

### 京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地  
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

### 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号  
NREG本郷三丁目ビル 2階  
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075