

TPN Patient Care Training Simulator

中心静脈栄養チューブ管理トレーナ

M97 11349-000 ￥ お問い合わせください

中心静脈栄養チューブ管理とケアのためのトレーナです。

カテーテル挿入経路部位を透明にして、血管や心臓、栄養チューブの位置がひと目でわかるようにしています。



“M93 B CVC穿刺挿入シミュレータⅡ”と合わせてご利用いただき、医師との連携のもと、栄養チューブの管理とケアのトレーニングにご活用ください。

M97 中心静脈栄養チューブ管理トレーナ

■ 目的

中心静脈穿刺は、鎖骨下静脈、内頸静脈など太い静脈からカテーテルを通し、カテーテル先端を右心房付近の上大静脈まで到達させる方法で、①末梢静脈の穿刺が困難な場合の血管確保、②持続的栄養補給、③中心静脈圧の経時的測定等を主な目的としておこなわれる重要な手技です。このモデルは中心静脈注射を受ける患者さんのケアにかかわるすべてのスタッフの正確な知識の習得をサポートします。

● 仕様

本 体：成人胸部モデル
 大きさ：成人胸部実物大
 材 質：軟質特殊樹脂製（本体）


● 構成

モデル本体・・・・・・・・・・ 1台
 透明穿刺部位・・・・・・ 1点
 皮膚・・・・・・・・・・ 1枚
 心臓透明カバー・・・・・・ 1点
 枕・・・・・・・・・・ 1点
 カテーテル・・・・・・・・・・ 2点
 取扱説明書



■ 特 長

- 穿刺部には骨格（鎖骨・第一肋骨・第二肋骨）、静脈（鎖骨下静脈・内頸静脈～上大静脈）、動脈、肺を表現。
- 鎖骨下静脈・内頸静脈にそれぞれカテーテルを挿入してあり皮膚を外すと、内部が透明なためカテーテルルートがひと目でわかります。
- 心臓透明カバーは取り外しができ、内部を観察するときに便利です。

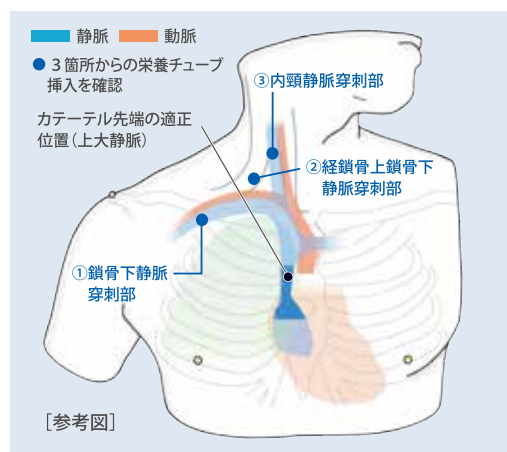

■ 実習項目



① 目視での確認と観察



② ドレッシング材の交換、皮膚の観察

③ 感染予防に注意しながら消毒をする
（※ご注意：必ず水をご使用下さい。）

④ フィルムドレッシング・ガーゼドレッシング

⑤ 輸液ルートの固定

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



株式 京都科学
 会社

URL <http://www.kyotokagaku.com>
 e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
 TEL.075-605-2510（直通）FAX.075-605-2519

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
 NREG本郷三丁目ビル2階
 TEL.03-3817-8071（直通）FAX.03-3817-8075