

# 助産シミュレータフルセット

型番 | コードNo | 価格  
**MW40** | **11420-000** | ￥お問い合わせください



部品交換により、分娩期における内診、分娩介助、会陰裂傷縫合が1つのボディでトレーニングできるセットです

## モデルの特長

### 共通

- ・外陰部に伸縮性、復元性、耐久性に優れた新素材を採用し、繰り返しトレーニングすることができます。




### 内診

- ・子宮口開大度モジュールはワンタッチで交換でき、7段階の胎児下降度設定が可能。
- ・ランドマークとなる、坐骨棘や恥骨結合を正確に再現。
- ・大泉門による胎児の位置確認が可能。



### 分娩介助

- ・正確な産道・坐骨棘・恥骨結合・尾骨を再現し、解剖の理解と手技が繋がります。
- ・伸縮性の高い外陰部と適切な産道形状、母体固定用ハンドルにより胎児の娩出がスムーズに行えます

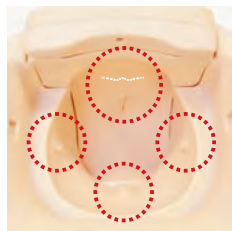

### 会陰裂傷縫合

- ・会陰裂傷第1度を想定した縫合法トレーニングがくり返し可能です。



### 仕様

本体：妊婦腰部モデル(腹部カバー付)  
 大きさ：W74×D44×H33.5cm(本体)  
 材質：軟質特殊樹脂、硬質樹脂

### 構成

**共通**  
 モデル本体 1台  
 外陰部ユニット 1台  
 (内診、分娩介助共通／不織布製保管袋付き)  
 タルカムパウダー 1点 (バフ付)  
 潤滑剤 150ml×3本  
 バスタオル 1枚  
 取扱説明書

**内診専用部品**  
 膣部ユニット 1台  
 子宮口開大度モジュール 5種  
 モデル固定ベース 1点

**会陰裂傷縫合専用部品**  
 外陰部ユニット 皮膚付 1台 (会陰縫合用)

### 分娩介助専用部品

胎児モデル 1点  
 胎盤モデル 1点  
 切断用臍帯 3点  
 バット 1個  
 卵膜 5枚

### 関連製品のご提案



胎児モデル“ふうちゃん”  
 F21 32515-000～ ￥お問い合わせください