

装着式採血静注キット "SASUKE"

型番 MW50 | コードNo 11431-000 | 価格 お問い合わせください

ホルダー	5点
注射パッド	5点
ベルト	5本
血液ボトル	5本
収納ケース	1点
取扱説明書	




大きさ	本体：W12×D14×H2.5 cm パッド：W6.5×D11×H2cm
材質	軟質特殊樹脂/硬質特殊樹脂

交換部
品




注射パッド 5枚組
11431-010

別売部
品

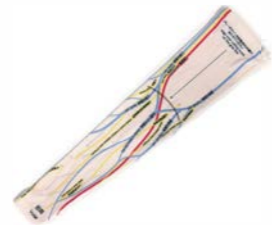

解剖アームカバー
11430-010

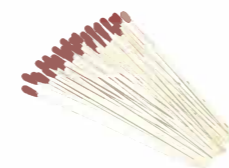

着色用綿棒(赤) 10本組
11388-400

■ サイズ：伸縮性があり、サイズは前後します

上腕まわり	手首まわり	長さ
26cm	16cm	55cm

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元

株式会社 **京都科学** URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

2019.11 G3000

装着式採血静注キット "SASUKE"

装着感 UP! 耐久性 UP! コストパフォーマンス UP!
"かたんくん" がリニューアル



トレーニングしたい部位に装着できる!



手背



前腕屈側



前腕背側

etc...

※写真はプロトタイプです


かんたんくんがパワーアップ

3つの👍進化ポイント

POINT 1 👍

かんたんセットアップ

注射パッドをホルダーにセッティングすれば、すぐに演習を始めることができます。ディスプレイタイプで、準備と後片付けの簡便さを、とことん追求しました。

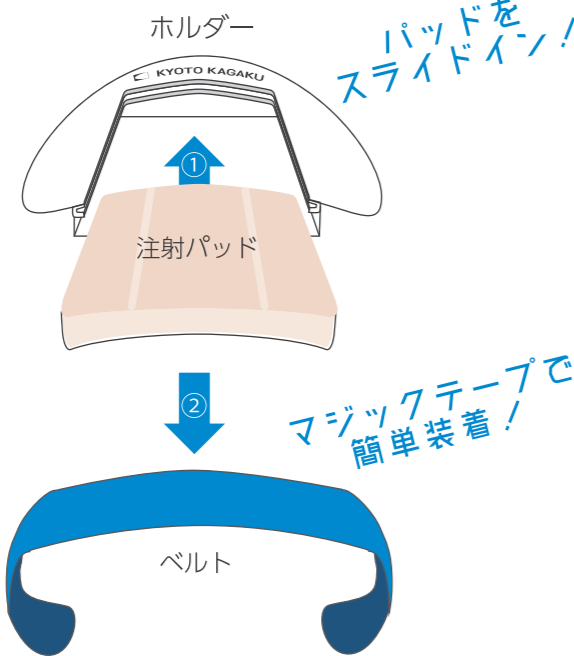

パッドを
スライドイン!


POINT 2 👍

バリエーション

演習内容に応じて穿刺部位の変更も簡単に。複数個装着するなど、シナリオに応じてご利用できます。

トレーニングしたい部位に装着できる!

- 肘屈側
- 前腕背側
- 手背
- 前腕屈側
- etc...

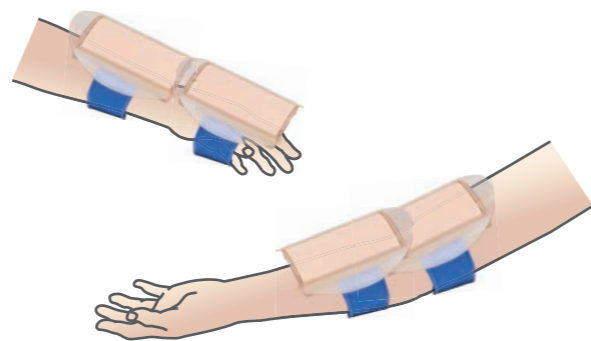

POINT 3 👍


耐久性の高い新パッド

刺すために生まれた素材 "Sassina" を採用し、穿刺耐久回数が大幅に増えました。

- 穿刺痕からの漏出が少ない
- 穿刺痕が目立ちにくい
- 耐穿刺回数が向上 ※当社比

刺すために
刺し~な
"Sassina"
生まれた素材

血管 1cm の範囲に
穿刺テスト実施の結果

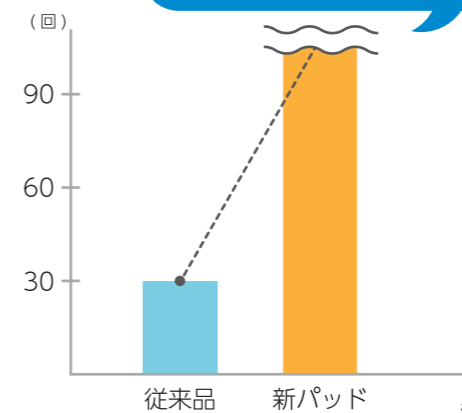

ぜひお試しください!!



実習項目

- 血管の触知
- 静脈内注射
- 採血

刺入箇所


- 血管 2 本を配置
- 任意の部位に装着して使用できます
正中 / 前腕 / 手背 など

Q&A

- Q. 初学者に対して、血管の位置をわかりやすくしたいのですが。
- A. 着色用綿棒 (別売品) で水に色を付ければ、わかりやすくなります。
- Q. アームカバーは洗濯できますか
- A. はい、洗濯できます。アームカバー内側の洗濯表示に従って下さい。

👍 解剖理解に! 解剖アームカバーのご紹介 ※別売品

手背から上腕の血管や神経の走行を学ぶことのできるアームカバーです。注射パッドを上から装着することも可能ですので、併せてご利用ください!

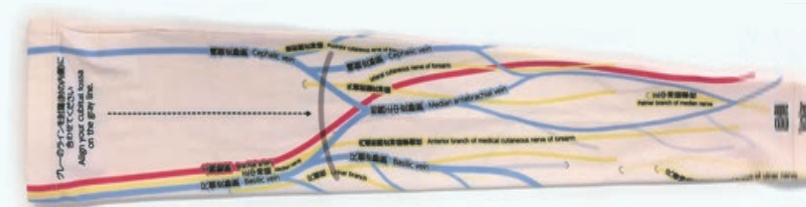

腕に装着できる解剖図



※写真はプロトタイプです