

治療用人体ファントム THRA1型

PH-37

コードNo 41480-000 価格 お問い合わせください ※収納ケース付



治療計画用の人体ファントムです。放射線医学総合研究所と共同開発した軟組織、肺、骨等価物質で作られています。

特長

○従来の治療用人体ファントムとは異なり、人骨による体格のばらつきをなくすために、統一サイズの人工骨を使用しているため、施設間のデータ比較が容易です。


○オプションとして腫瘍ターゲットを装着する事も可能です。

仕様

本体：成人頭部+トルソー形状実物大
高さ：約80cm
重量：約33kg
材質：エポキシ樹脂 他

付属品

収納ケース
ファントム固定具
線量計孔挿入ロッド

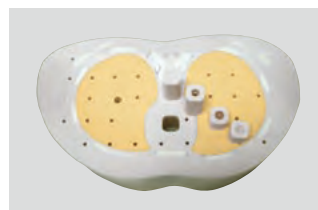

オプション加工

小児治療人体ファントム THRA2型

PH-38

コードNo 41480-010 価格 お問い合わせください ※収納ケース付



治療計画用の小児人体ファントムです。

特長

○従来の治療用人体ファントムとは異なり、人骨による体格のばらつきをなくすために、統一サイズの人工骨を使用しているため、施設間のデータ比較が容易です。

○オプションとして腫瘍ターゲットを装着する事も可能です。

仕様

本体：小児サイズ5歳+トルソー形状・実物大
高さ：約60cm
材質：エポキシ樹脂 他

付属品

収納ケース
ファントム固定具
線量計孔挿入ロッド

人体

胸部・
心臓胸部

タフファントム