

超音波診断ファントム 上腹部術中モデル“IOUSFAN”

41901-000 ￥お問い合わせください

監修・指導：ハワイ大学医学部 外科 教授 町 淳二



開腹手術の術中超音波及び腹腔鏡超音波 検査のトレーニング用ファントムです

特 長

- 柔軟なファントム素材で、解剖学的に正確に再現した上腹部に、エコー値の異なる病変を表現。
- 実際に近い感覚でプローブ操作ができ、人体に近似した超音波画像が得られます。
- 取り外しのできる胃と十二指腸を附属、胆道及び 脾臓部を対象とした様々な走査手技を実習することができます。

実習項目

- ・ 開腹手術の術中超音波及び超音波腹腔鏡検査



付属の活用の手引き (DVD)
IOUSFANの画像描出動画を収録しています。

仕 様

本 体：上腹部臓器モデル
サイズ：約W30×D38×H17.5cm
重 量：約5.8kg
材 質：ウレタンエラストマー樹脂

構 成

上腹部臓器本体（本体部／胃・十二指腸部）1体
腹腔容器 1点
活用の手引き（DVD）1点
取扱説明書



腎臓・脾臓他



門脈・肝動脈・総胆管



脾頭部病変



胆石


臓器構成

肝臓（肝区域表現、門脈および肝静脈、肝門索、静脈管索を含む）、胆道（胆嚢、胆嚢管、肝臓内外の胆管を含む）、脾臓および脾管、脾臓、腎臓、尿管系（動脈、下大静脈、腹腔動脈、および分枝、門脈及び分枝、上腸管膜脈管、腎臓血管ほか）

肝臓・胆嚢・脾臓・脾臓・胆嚢の病変

肝臓病変（嚢胞・固形）
胆嚢及び胆管結石
脾臓腫瘍（うち1点は門脈を侵食）

脾臓病変
左右腎臓病変

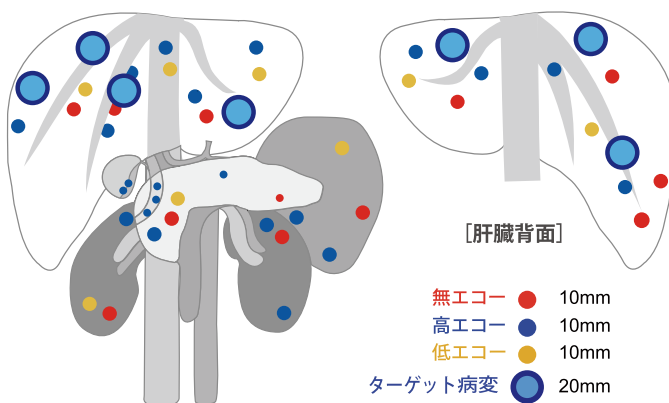

株式会社 京都科学

● 京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

URL <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

● 東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル 2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075