



眼底診察シミュレータ EYE

直像検眼鏡を使用した正常を含む10症例を眼底診察



型番

M82

M82A

コード No.

11220-000 3ステップ

11220-999A 2ステップ

FEATURES

- | 01 眼球部にレンズを使い実際に近い眼軸状態を再現しています
- | 02 瞳孔のサイズを変更できます。11220-000 は 3 段階、11220-999A は 2 段階です
- | 03 症例スライドの位置設定で、眼軸の遠視・正視・近視状態を再現できます

SKILLS

- ・眼底鏡を使用した眼底診察

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

正常眼底
 高血圧性眼底
 単純型糖尿病網膜症
 慢性乳頭浮腫
 急性乳頭浮腫
 緑内障性視神経萎縮
 網膜静脈分枝閉塞症の新鮮例
 網膜静脈分枝閉塞症の網膜光凝固後陳旧例
 トキソプラズマ網脈絡膜炎
 加齢黄斑変性の網膜下出血

DESCRIPTIONS

仕様

本体：成人頭胸部モデル
 大きさ：W42×D22×H38 cm
 重量：約2kg


材質：[頭部]軟質特殊樹脂
 [胸部]硬質樹脂

構成

1	モデル本体	1	眼球ユニット
10	症例画像ファイル	1	収納ケース

瞳孔のサイズについて

- 3ステップ：2mm/3.5mm/5mm
- 2ステップ：3.5mm/8mm ※ 8mmの瞳孔は、前処置の散瞳剤による瞳孔の開きを再現したモデルです

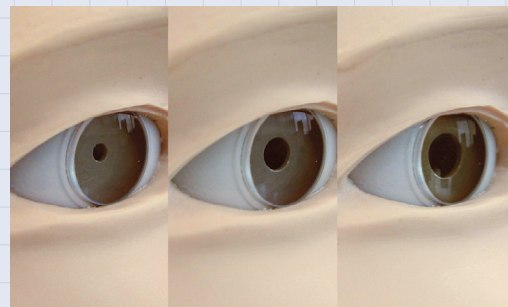

監修：日本医学教育学会
 協力：関西医科大学 眼科

関連製品

MW61 眼底診察シミュレータ デジタルEYE