
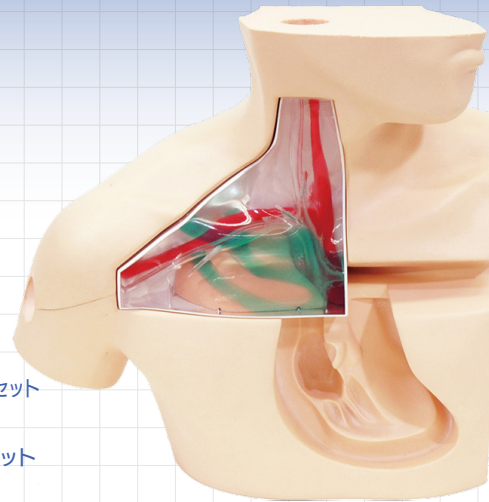


CVC穿刺挿入シミュレータⅡ

安全で的確なCVC穿刺挿入技術の習得のために

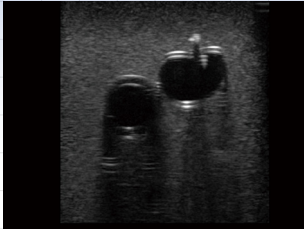

型番	コード No.
M93B	11347-300 [付属パッド]ブラインドパッドⅡ+超音波パッドⅡ セット
	11347-500 [付属パッド]超音波パッドⅡ セット
	11347-510 [付属パッド]CVCカテーテル挿入パッド セット

FEATURES

- 01 5種類のパッドでCVC穿刺技術を向上させる、レベルに応じた実習が可能です
- 02 実習部位の骨格や血管の走行を正確に再現しています
- 03 穿刺位置の選定からカテーテル挿入まで実践に即したトレーニングが行え、手技の失敗（合併症）も確認できます

SKILLS

- 鎖骨下静脈/経鎖骨上鎖骨下静脈/内頸静脈でのCVC穿刺挿入(超音波ガイド下/ランドマーク法)
- 手技の失敗(合併症)の確認

[実習用推奨器具]

- 中心静脈カテーテルキット
- リニアプローブ

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

- 内頸静脈
- 総頸動脈
- 鎖骨下静脈
- 鎖骨下動脈
- 上大静脈
- 合併症：
 - カテーテル先端位置不良/気胸/鎖骨下動脈穿刺/総頸動脈穿刺

DESCRIPTIONS

仕様

本体：成人胸部モデル
 大きさ：W40×D17×H38cm
 材質：[本体]軟質特殊樹脂
 [CVCカテーテル挿入パッド]
 ハイドロゲル

注：CVCカテーテル挿入パッドは外気に触れると乾燥/変質する素材でできているため、開封後の長期保存はできず、使い切りを原則としています。ご使用時以外は開封しないでください

構成

各コード共通	
1	モデル本体
1	透明パッド
1	透明パッド用皮膚
1	超音波ガイド下穿刺トレーニングパッド
1	超音波パッド用ボトル
1	シリンジ (50ml)
1	収納ケース
11347-300	
1	ブラインドパッドⅡ
1	超音波パッドⅡ
1	動脈拍動ポンプ
10	着色用綿棒 (赤・青)
11347-500	
2	超音波パッドⅡ
11347-510	
2	CVCカテーテル挿入パッド
1	動脈拍動ポンプ

関連製品

M43B 腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ ルンパールくんⅡA
 MW3 硬膜外麻酔シミュレータ 胸椎・腰椎穿刺モデル
 MW18 末梢挿入中心静脈カテーテル PICCシミュレータ
 M43D 小児腰椎穿刺シミュレータ 小児ルンパール

監修・指導：千葉大学医学部附属病院 総合医療教育研修センター長 田辺 政裕
 大阪樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科 人間栄養学専攻 専攻長 教授 山東 勤弘
 大阪樟蔭女子大学大学院 人間科学研究科 人間栄養学専攻 教授 保木 昌徳
 杏林大学医学部麻酔科学教室 徳嶺 譲芳