


M93C

Simulador de Inserción CVC III

CVC III facilita una experiencia de la secuencia de simulación no interrumpida para entrenamiento de los especialistas

Desde la preparación del campo aséptico hasta la colocación del catéter

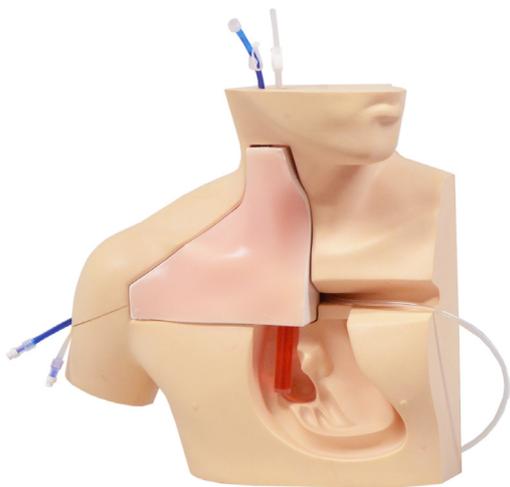


CARACTERÍSTICAS

- 1 | La práctica de inserción repetitiva facilita obtener mejores técnicas para la seguridad del paciente.
- 2 | Ambas técnicas de inserción con puntos de referencia y ecoguiada se pueden practicar.
- 3 | Almohadilla del simulador similar al tejido humano sin fricción para facilitar la sensación realista de colocación de CVC.


TECNICAS

- Provisto de los pasos completos para una inserción de CVC exitosa
- | Despeñar prácticas de higiene de mano y preparar el campo aséptico
 - | Decidir el sitio de inserción por la guía de ultrasonido o por observación y palpación de los puntos de referencia
 - | Inserción con la guía de ultrasonido o técnicas de puntos de referencia
 - | Confirmar el flujo de retorno
 - | Avanzar el cable de guía y vaina
 - | Insertar el catéter


CARACTERÍSTICAS CLAVE

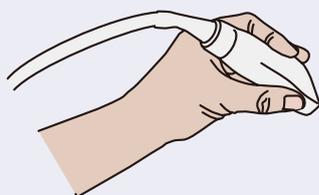

Compatible con ultrasonido

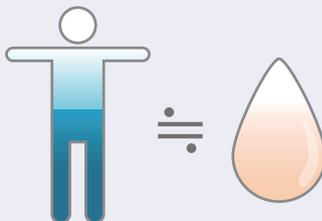

El material de la almohadilla simula las características del tejido humano.

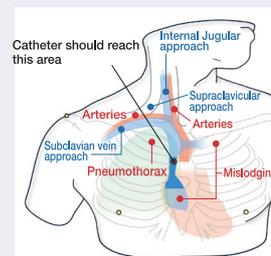

Características anatómicamente precisas incluyendo 3 sitios de inserción y caja torácica

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: L40 x A20 x A 34 cm
L15.7 x A8 x A13.5 plgds.

CONTENIDO DEL JUEGO

1 maniquí del torso superior masculino	2 tubos para venas (azul): 2 tipos	1 aguja de muestra
2 almohadillas de inserción CVC	2 mangueras para venas	1 jeringa (una de cada tipo: 2.5ml y 50ml)
1 piel para entrenamiento de canulación	1 unidad de pulsación (para técnica de puntos de referencia)	1 bloque de entrenamiento introductorio de ultrasonio
1 bloque anatómico transparente	1 botella de riego (para técnica ecoguiada)	1 VASO REAL
2 tubos para arterias (transparente): 2 tipos	1 jarros plásticos	

MATERIALES

Resina blanda, hidrogel, resina sólida,
Libre de látex

APARATOS RECOMENDADOS

El aparato de ultrasonido y agujas no están incluidos.

REPUESTOS

11347-210 2 bloques de entrenamiento introductorio de ultrasonio VASOS REALES
11347-240 2 almohadillas de inserción CVC
11347-260 1 unidad de pulsación (para M93UB)
11347-320 botella de riego