


NEW



動脈採血シミュレータ / エコーガイド下動脈穿刺パッド

橈骨動脈の穿刺/採血/動脈ラインの留置手技実習に最適なモデルです
エコー対応パッドを追加

←11351-000

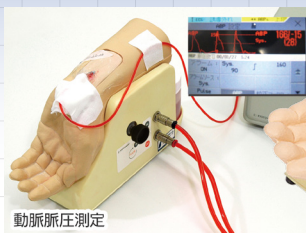

11351-110→

型番

M99

コード No.

11351-000 動脈採血シミュレータ

11351-110 エコーガイド下動脈穿刺パッド 2個組 ※本体別売

FEATURES

- | 01 動脈ラインをテープ固定で留置し、波形モニタリング装置への接続が可能です ※波形は再現されません
- | 02 解剖学的にリアルな血管の走行と臨場感のある拍動を再現、逆血確認も可能です
- | 03 穿刺部位の皮膚は表面に針跡が残りにくく、実際に近い感触の素材です

SKILLS

- 橈骨動脈の穿刺
- 動脈採血
- 動脈ラインの留置
- 超音波ガイド下動脈採血(11351-110)

[実習用推奨器具]

- 動脈採血キット 22-25G
- リニアプローブ

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

橈骨動脈

エコーガイド下動脈穿刺パッド (11351-110) は、超音波診断装置によるエコーガイド下血管穿刺が可能です。解剖学的にリアルな血管の走行を再現しています



短軸断面
エコー画像

DESCRIPTIONS

仕様

本体：成人腕モデル
大きさ：約W9×D30×H18cm(本体)
重量：1.5kg(本体)

材質：軟質特殊樹脂
電源：AC100V-240V 50/60Hz
消費電力：8W

注：エコーガイド下動脈穿刺パッドはM99 動脈採血シミュレータに取り付けてご使用ください
本製品は、拍動の触知による穿刺には適していません

[動脈採血シミュレータ]
監修・指導：独立行政法人国立病院機構京都医療センター 総合内科 医長 小山 弘

構成

[11351-000]	10 着色綿棒(赤)
1 モデル本体	1 広口びん
1 腕台	1 シリンジ 50mL
1 動脈穿刺部位(交換用予備含む)	1 接続チューブ 黒/赤
2 模擬皮膚外側(大)	1 ACアダプタ
2 模擬皮膚内側(小)	1 電源ケーブル
4 模擬血管	1 収納ケース
1 シリコンベルト	[11351-110]
1 骨台	2 動脈穿刺超音波パッド
1 循環ポンプ	2 模擬皮膚外側(大)

関連製品

MW66 表在化動脈穿刺シミュレータ
MW82 大腿動脈採血シミュレータ