

組み合わせ一覧

型番 MW44 周産期全身シミュレータ

Konoha

コードNo
11425-000



※トレーニングセットは含まれていません

モデル × ソフトウェア



トレーニングセット

妊娠期



妊婦腹部触診
トレーニングセット

コードNo.
11425-110



超音波検査
トレーニングセット

コードNo.
11425-140



妊婦内診
トレーニングセット

コードNo.
11425-150



分娩介助
トレーニングセット

コードNo.
11425-130



会陰裂傷縫合
トレーニングセット

コードNo.
11417-020

産じょく期



産じょく子宮触診
トレーニングセット

コードNo.
11425-120

活用目的に応じたパッケージもご用意しております

	妊婦腹部触診 トレーニングセット	超音波検査 トレーニングセット	妊婦内診 トレーニングセット	分娩介助 トレーニングセット	会陰裂傷縫合 トレーニングセット	産じょく子宮触診 トレーニングセット
スターター パッケージ	○	—	—	—	—	○
母性看護学 パッケージ	○	—	—	○	—	○
助産学 / 周産期 パッケージ	○	○	○	○	○	○

スターターパッケージ
コードNo. 11425-300

母性看護学パッケージ
コードNo. 11425-200

助産学 / 周産期パッケージ
コードNo. 11425-100

製品詳細はコチラ



<https://www.kyotokagaku.com/konoha/index.html>

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元

KYOTO KAGAKU

<https://www.kyotokagaku.com/jp/>
rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

2024.03.G0000

KYOTO KAGAKU

周産期全身シミュレータ

こ の は Konoha

「シナリオ」に沿って状態が変化する、周産期シミュレータ



撮影ご協力：岡山大学医学部

妊産婦 モデル × ソフトウェア



「シナリオ」を

選ぶ 学修レベルや目的にあわせて、シナリオを選ぶことができます

変更する ご施設の教育内容にあわせて、シナリオをカスタマイズすることができます

作る ご施設の教育内容に基づいて、新たにシナリオを作ることができます

シナリオ
11
種類以上

選べるトレーニングセット

豊富なトレーニングセットで周産期を網羅。
ご施設の学修目的にあわせてお好みの Konoha にカスタマイズできます。

妊娠期



超音波検査トレーニングセット

- スクリーニング検査
：23 週目の正常胎児
(胎児の向きは変更可能)
- BPD, AC, FL の計測
- 羊水量の計測
- 胎位、胎向の確認

妊婦腹部触診トレーニングセット

- 触診(レオポルド触診法、ザイツ法)
- 聴診(胎児心音)
※専用ドップラー聴診器を使用
- 計測(腹囲、子宮底、骨盤外)

分娩期



妊婦内診トレーニングセット

- 子宮口開大度評価(5種類)
- ステーションの確認(7段階)
- 児頭の向きの変更

分娩助産トレーニングセット

- 分娩助産法
：仰臥位・側臥位・四つん這い
- 会陰・肛門の保護
- 胎位：正常・骨盤位
- 胎児の娩出：鉗子分娩・吸引分娩
- 臍帯の結紮・切断
- 胎盤の娩出・卵膜の確認
- 導尿カテーテルの挿入手順

産じょく期



産じょく子宮触診 トレーニングセット

- 産じょく早期における
子宮の状態確認：4種類
- 子宮底のメジャーによる
計測と触診
- 外陰部の観察・清拭
- 産後マッサージ指導
- 脱肛の確認

※トレーニングセットは別途お求めください

「シナリオ」に沿って妊産婦の状態が変化する
より臨床に近い環境を再現

「わかる」から「できる」へ実践力を身につける シナリオシミュレーション の流れ

ブリーフィング

シミュレーション

デブリーフィング

「何を学ぶか」を明確にする
事前に学修目標や看護記録を学修者と共有



ディスカッションで
「気づき・思考」を共有する



撮影ご協力：岡山大学医学部


Konoha の機能

ブリーフィング

豊富な搭載シナリオ
事前情報は、すべてコントロール PC の中に

学修目標や看護記録、状態設定など
指導者は、必要な項目を選ぶだけ。
看護記録を印刷し、事前学修用の
資料として配布することができます。

※カスタマイズやオリジナルシナリオの作成もできます

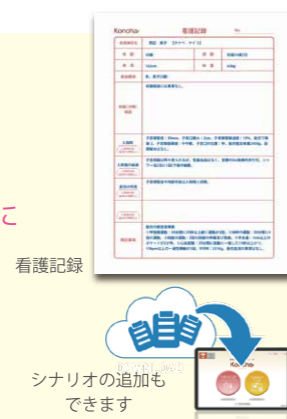

シミュレーション

バイタルの変化は“Konoha”におまかせ
シミュレーションの経過時間や学修者の行動とともに
モデルのバイタルも自動で変化

妊産婦の状態を
変化させることができます

学修者の行動記録は、
アイコンをタッチするだけ

すべて
コントロール PC で
簡単操作



デブリーフィング

デブリーフィングガイド
あらかじめ用意したガイドに沿って振り返りができる

履歴
学修者の行動記録が時系列でわかる

チェックリスト
とるべき行動をとっていたか確認できる



デブリーフィングガイドの画面