

MW65

NEW

Simulador Avanzado de Parto y Obstetricia

Conjunto completo de cuerpo materno para entrenamiento en técnicas de exámenes vaginales durante el trabajo de parto



Supervisión del Producto: Dr.MAKI Jota, Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Graduate School of Biomedical Sciences, Okayama University

CARACTERISTICAS

- 1 | Su reproducción realista del canal de parto permite un examen pélvico de acuerdo con el progreso del parto.
- 2 | La capacidad de realizar varias técnicas (posición de McRoberts, método de tornillo de Woods, etc.) en malposición fetal y distocia de hombros lo hace ideal para una variedad de talleres y cursos de capacitación.

TECNICAS

Parto

- | Examen pélvico
- | Parto normal
- | Extracción de placenta y cordón umbilical
- | Reproducción y manejo de la distocia de hombros y malposición fetal
- | Extracción al vacío
- | Parto con forceps
- | Parto en posición fetal podálica

Manejo del feto

- | Enredo del cordón umbilical
- | Pinzamiento y corte de cordón umbilical
- | Palpación de las fontanelas anterior y posterior
- | Procedimientos de succión a través de la boca y la nariz.

Opcionales (por ser lanzados)


- | Al combinar los módulos enumerados a la derecha, una variedad de ejercicios puede llevarse a cabo

CARACTERISTICAS RELEVANTES



Comprobación y comprensión

- | El abdomen de la madre se puede girar para comprobar la anatomía y entender el parto
- | Reproducción de estructuras anatómicas fieles al cuerpo humano

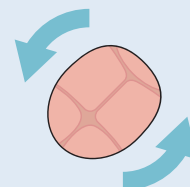

Rotación fetal

Diseñado para la expulsión del feto y la rotación interna/externa



Niveles de dificultad

El tamaño del canal de parto óseo se puede cambiar en 3 niveles.

La combinación de módulos ofrece una variedad de capacitaciones técnicas

Próximamente

Fantoma de Examen de Ultrasonido Fetal

Para más información, favor de contactarnos.



**Reproducción elaborada de un feto normal a las 23 semanas.
Posición y orientación fetal cambiables.
Fantoma de entrenamiento para examen por ultrasonido.**

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

Cuerpo materno (con cubierta de piel)
Tamaño: A52 × P50 × A35 cm (cuerpo)
Peso: 12Kg (con el feto y la placenta)

MATERIALES

Resina blanda
Resina dura

CONTENIDO DEL JUEGO

1	cuerpo materno	5	láminas de velamen
1	cubierta de piel	1	lubricante (150ml)
2	grapas	1	bote para lubricante
1	feto	1	talco en polvo
1	placenta		
1	cordón umbilical		
3	cordones umbilicales para onfalotomía		