


CT人体トルソファントム CTU-41型

PH-4

コードNo
41324-040

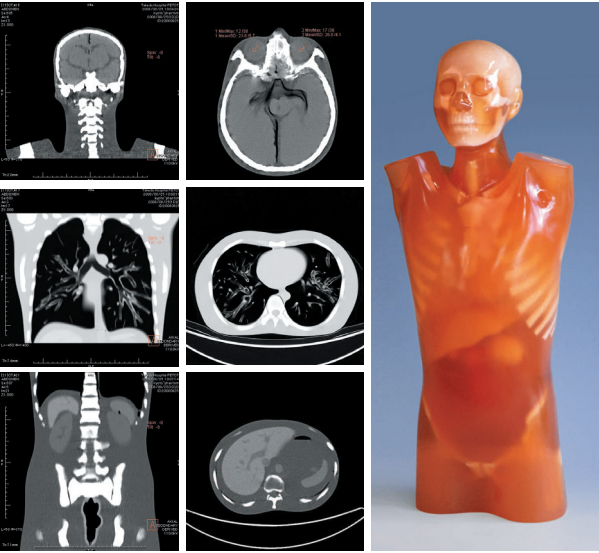

仕 様
本体:成人男性・実物大トルソ型
高さ:約100cm
重量:約45kg
材質:ポリウレタン樹脂 (比重1.06) ・エポキシ樹脂 (比重1.31) 他

- 特 長
- 当ファントムは人体と同等のX線吸収率をもった軟組織等価材と骨等価材を使用しており、画像上人体と同様の臓器コントラスト、アーチファクトが発生します。
 - 臓器の形状、CT値を再現したファントムです。
 - 骨格は人工骨を使用。
(海綿骨は再現されていません。)
 - ボリュームスキャン対応のため、ファントムは頭部～腰部まで一体となっています。

頭部	胸部部		
・頭骨	・椎骨	・心臓	・大動脈
・頸部椎骨	・鎖骨	・肝臓	・大静脈
・脳	・肋骨	・肝静脈	・尿管
大脳	・胸骨	・門脈	・膀胱
中脳	・肩甲骨	・脾臓	・前立腺
小脳	・上腕骨	・膵臓	・直腸
脳室	・大腿骨	・腎臓	・S字結腸
・眼球	・肺(肺血管)	・胆嚢	
	・気管	・精嚢	

付属品:収納ケース
撮影データ (DVD)

放射線
／
CT

放射線
／
CT

MRI
／
核医学

治療計画

PBU シリーズ
胸部ファントム
放射線診断
精度管理用
その他