




X線透視下 腰椎穿刺シミュレータ


PH-51

監修:

Dr. David Wilson MBBS, BSc, MFSEM, FRCP, FRCR Consultant Radiologist St Luke's Hospital Oxford,
Senior Clinical Lecturer University of Oxford

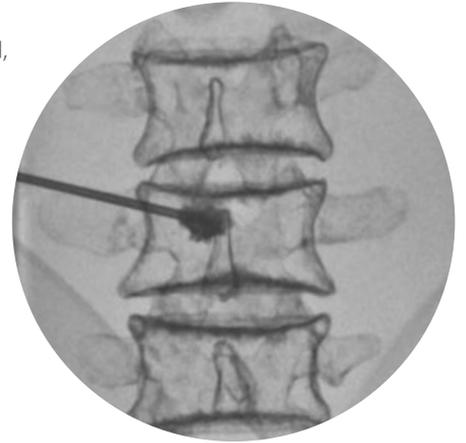

骨セメント療法パッド

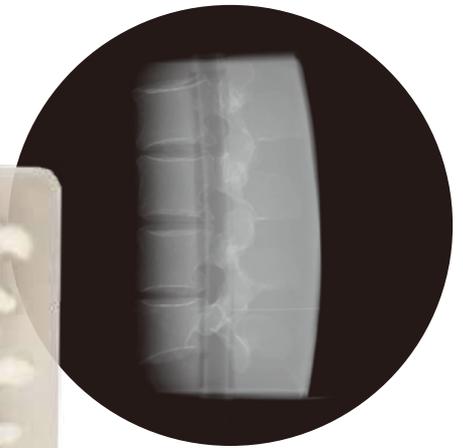

腰椎穿刺・硬膜外麻酔パッド



X線透視下 腰椎穿刺シミュレータ

腰部で行われる、X線透視下での手技を実習することができます。2種の穿刺パッドに埋め込まれた腰椎は、X線透視下で見ることができます。腰部モデルは弊社のM43B 腰椎・硬膜外穿刺シミュレータと共通ですので、それぞれの交換パッドをセットし使用することができます。

特長

- 1 ● 腰椎 (L2-L5) は X 線透視で確認することができます。
- 2 ● 2 種類の穿刺パッドがあります。
- 3 ● 骨セメント用パッドの腰椎内部はスポンジ状になっており、実際にセメントを入れることができます。
- 4 ● リアルな穿刺感覚で、正確な手技が体得できます。
- 5 ● 硬膜上腔へ穿刺した針先の確認のために、造影剤を注入することができます。

実習項目

- X線透視下での解剖・ランドマークの理解を深める
- 錐体形成術として骨セメント療法
- X線透視下での硬膜外麻酔
- 椎間関節注射、神経根ブロック、椎間板造影法における針の穿刺確認

2種類の穿刺パッド



- 骨セメント療法パッド
- 錐体に針を挿入し、実際にセメントを注入することができます。



- 腰椎穿刺・硬膜外麻酔パッド
- 硬膜上腔とくも膜下腔の両方が再現されています。

仕様

構成：

モデル本体 1 体

放射線用腰椎穿刺・硬膜外麻酔パッド 1 点

放射線用経皮的椎体形成術パッド 1 点

模擬皮膚 1 点

シリンジ 1 本

固定台 1 点

取扱説明書

大きさ：

約 W33×D21×H30cm

重量：1.5kg

交換部品：

41913-000-01 放射線用腰椎穿刺・硬膜外麻酔パッド

41913-000-02 放射線用経皮的椎体形成術パッド

11348-150 模擬皮膚



株式会社 京都科学

URL <http://www.kyotokagaku.com>

e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル 2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075