

注：モデル表面に取扱説明書や印刷物などが
直接触れないようにして下さい。
樹脂表面にインクが転写して消えなくな
ります。

PH-60

Tough Whole Body Phantom

耐久型単純撮影用全身ファントム

PBU-90

取扱説明書

目次

- ご使用の前に
ご使用前の確認と注意 …………… P.1 ~ P.3
- 準備
組立について …………… P.4 ~ P.9



耐久型単純撮影用全身ファントム PBU-90 製品概要

PBU-90は肩、肘、股、膝関節が可動し、ポジショニングに使用できる撮影用全身ファントムです。分割部分、関節部分については、骨の形状が忠実に再現され、画像上障害となる金属部品は一切使用しない構造になっています。

骨はすべて人工骨を使用しています。また人工骨と軟組織部分は放射線に対し人体に近い特性をもった組織代替物でできています。

撮影時には、必要な部分を分解して個別に使用することもでき、頭部についてはポジショニング用のスタンドが付属しています。

仕様

形式：PBU-90

用途：撮影用人体ファントム

身長：約 165cm

体重：約 50kg

分割できる部位：頸部、両肩、両肘、両股関節部、両膝（10分割）

可動する関節と可動範囲

両肩：前方向に 360°

横方向に 180°

両肘：90°

両股関節：前方向に 90°、それぞれ 45° 外転

両膝関節：90°

内蔵臓器

肺血管、心臓、肝臓、腎臓

※ 運送中の気圧の変化による破損防止のため、予めボディ胸部に 3mm の穴を 2箇所設けています。

材質：軟組織等価材（ポリウレタン樹脂）・骨等価材（エポキシ樹脂）

付属品：頭部固定用台 1台

交換用ネジ・膝蓋骨用バンド 1式、マイナスドライバー 2点

サンプル画像 1式、手のポジション設定用ベルト 1点

内蔵臓器のCT値

肝臓：70相当

腎臓：30相当

※ CT値は目安として設定しているもので撮影の条件等により実測の値とは異なります。

ご確認ください

- ① このファントムは実際の臨床画像に比べ骨の輪郭がやや強調されるよう意図的に作られています。
- ② ファントムは放射線に対し人体に近い特性をもった材質で作られていますが、構造上、関節部分の撮影条件は若干生体と異なります。



注意

- ① 破損のおそれがありますので、無理なポジショニングは絶対にしないでください。
- ② 破損のおそれがありますので、ファントムを移動させるときは必ず分解し、首や関節部分に大きな力がかからないようにしてください。
- ③ 破損のおそれがありますので、ネジ部品は絶対に強くしめすぎないようにしてください。
- ④ このファントムは、人体と同等の重量があり落下等すると非常に危険です。組み立てて使用する場合や胴部を移動させる場合は、ケガをしないように必ず2名以上で取り扱ってください。
- ⑤ 保管時におきましては、ファントムの接合部位に負荷が掛からないようにしてください。特に頭部の下に枕等を置いた状態で長期間保管すると頸部に負担がかかり破損するおそれがあります。
- ⑥ サインペン、ボールペン等でモデルの表面に書き込みをしないでください。インクが吸収され消えなくなります。
- ⑦ モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。樹脂にインクが転写され消えなくなります。

PBU-90 構成部品

部品番号	部品名称	個数	部品番号	部品名称	個数
1	頭部	1	21	左脚接続部品	1
2	頭・胴部接続部品	1	22	右脚接続部補強部品	1
3	胴部	1	23	左脚接続部補強部品	1
4	右上腕	1	24	右膝接続部品	1
5	左上腕	1	25	左膝接続部品	1
6	右前腕	1	26	接続用ボルト M12x40	2
7	左前腕	1	27	頭・首部接続用ボルト M10×15	2
8	右大腿	1	28	肩接続用ボルト M8×12 脚接続部補強部品用(22、23)ボルト	4
9	左大腿	1	29	肘接続用ボルト M6×60	4
10	右下腿	1	30	肘接続用ナット M6	4
11	左下腿	1	31	頭・胴部/脚接続用ボルトM8×35	6
12	右膝蓋骨	1	32	膝接続用ボルト M12×18	4
13	左膝蓋骨	1	33	膝蓋骨接続用バンド	2
14	肩接続部品 (左右兼用) A	2	34	上下位置固定柱	1
15	肩接続部品 (左右兼用) B	2	35	底板	1
16	右肘接続部品 外側	1	36	首部接続部品	1
17	右肘接続部品 内側	1	37	ノブ受け板	1
18	左肘接続部品 外側	1	38	高さ固定用ノブ付ネジ	1
19	左肘接続部品 内側	1	39	ノブ付ボルト M6×18	2
20	右脚接続部品	1	40	手のポジション設定用ベルト	1

組立について

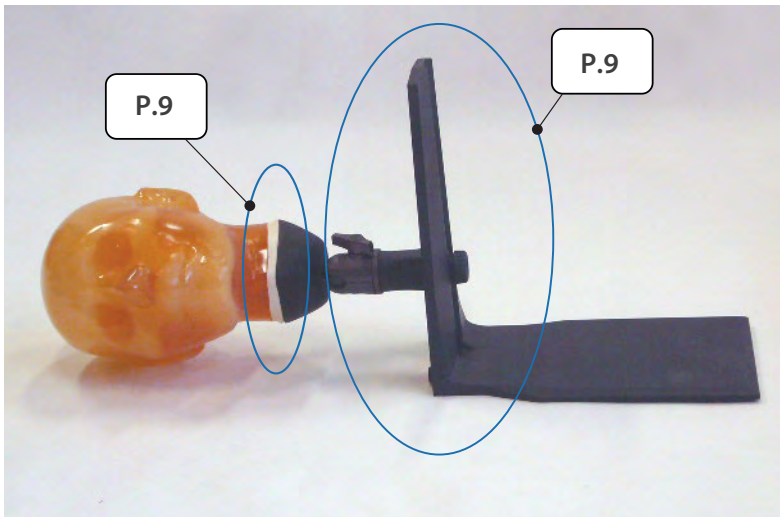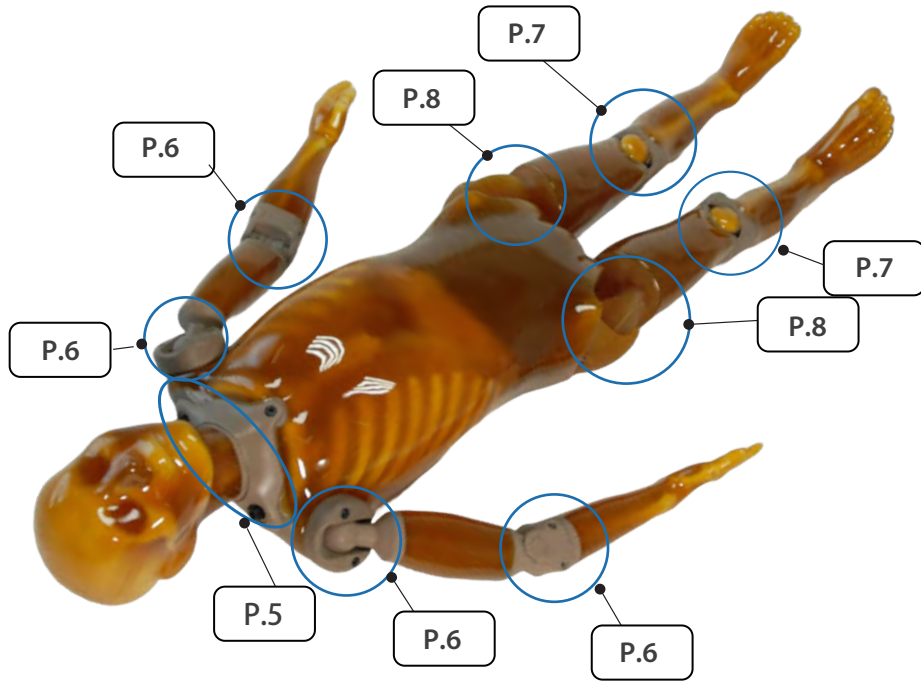

それぞれの部位の組立は、上の写真で記したページを参照してください。
※各部品の外観は実際の商品とは異なる場合があります。予めご了承ください。


組立について

組立手順を紹介していきますが、写真中の部品番号については3ページの構成部品表を参照ください。


＜首部分の部品取り付け＞

1. 3箇所の頭・胴部接続用ボルト (部品番号26、31)をはずし、頭・胴部接続部品 (部品番号2)を胴部から取り外します。

②⑥ 頭・胴部
接続用ボルト
M12×40


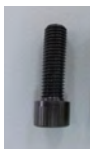


③① 頭・胴部/脚
接続用ボルト
M8×35

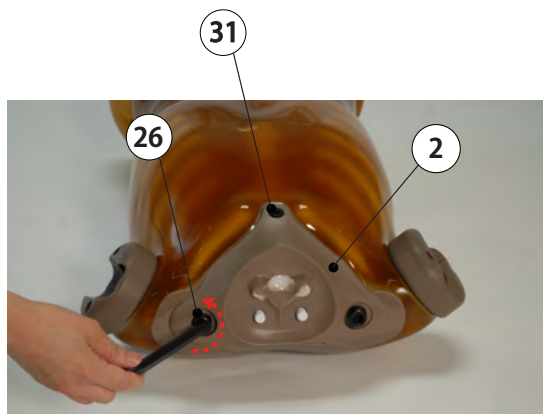

【首部分の部品取り付け】

2. 取り外した接続部品を頭部 (部品番号1) に組み付け、頭・首部接続用ボルト (部品番号27) 2本で固定します。

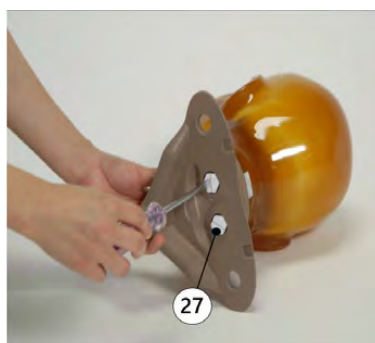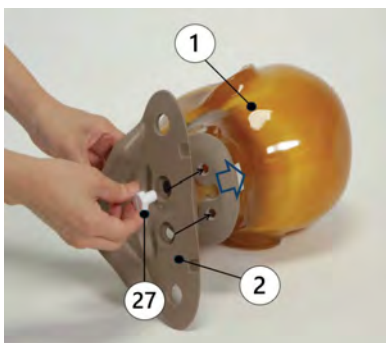

②⑦
頭・首部接続
用ボルト
M10×15×2

【頭部と胴部の組立】

3. 組み立てた頭部 (部品番号1+2) を胴部の肩に接続し、頭・胴部接続用ボルト (部品番号26) 2本と、頭・胴部/脚接続用ボルト (部品番号31) 1本で固定します。





組立について

< 肘関節部の組立 (写真は左肘関節部) >


1. 上腕部 (部品番号 4,5) と前腕部 (部品番号 6,7) を関節部で組み込み、両サイドから外側と内側用の肘接続部品 (部品番号 16, 18 と 17,19 それぞれ各1点) で挟み、肘接続用ボルトとナットで固定します。

②⑨ 肘接続用ボルト M 6×60×4

③⑩ 肘接続用ナット M 6×4

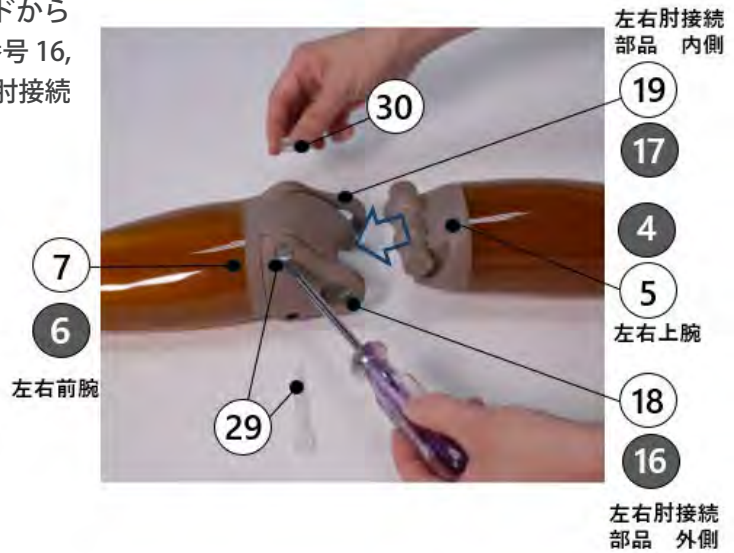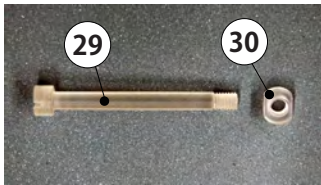

< 肩部分の組立 (写真は左肩部) >

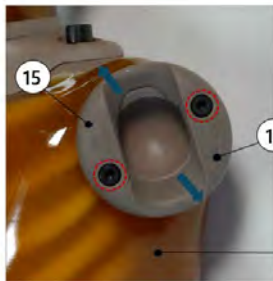


1. 2 箇所のボルトをはずし、胴部から肩接続部品 A (部品番号 14) と肩接続部品 B (部品番号 15) を取り外します。

③⑧ 肩接続用ボルト M 8×12×4



2. 次に上腕部 (部品番号 4,5) を胴部に組み付け、接続部品 A,B で胴体側取付部の円形の突起部を挟み込むようにして組み合わせ、2 本の肩接続用ボルト (部品番号 28) で固定します。部品は A (14)、B (15) 共、左右兼用です。

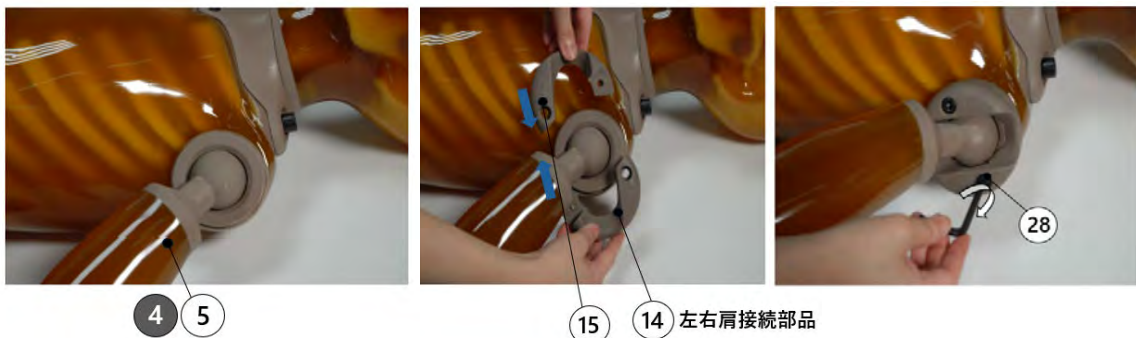




注意

上腕部は左右で形状が違いますので、取り違えないようよくお確かめください。ボルトでの固定は、ネジ穴の位置を確認し、位置を合わせてから行ってください。

組立について

< 膝部分の組立 (写真は右膝関節部) >

1. 大腿部 (部品番号 8,9) と下腿部 (部品番号 10,11) を膝関節部で組み込み、左右膝蓋骨 (部品番号 12,13) に通してある膝蓋骨接続用バンドの先を大腿部下部の穴に差し込み、膝部分の内側に膝接続用部品 (部品番号 24, 25) をあてはめ膝接続用ボルト (部品番号 32) 2本で固定します。

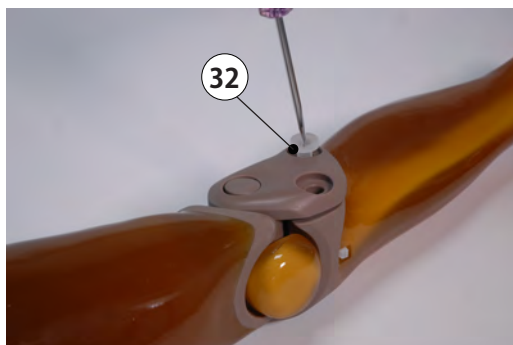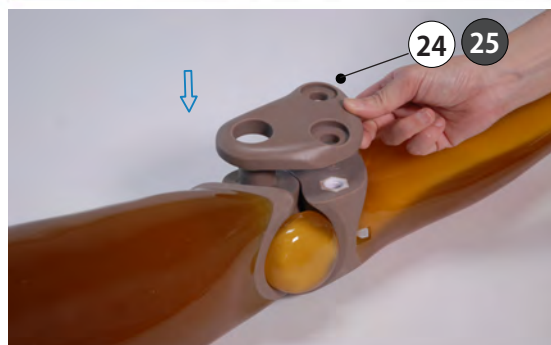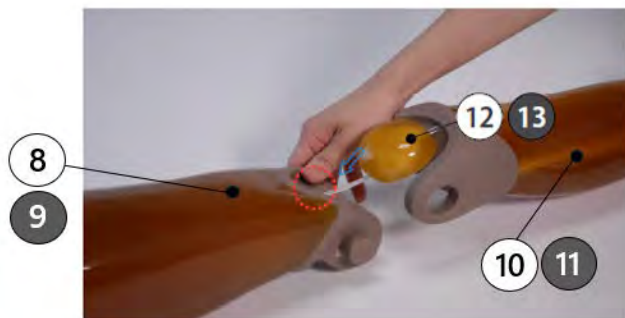

32 膝接続用ボルト
M12×20×4



膝接続時、左の写真の
ドライバーをご使用
ください。

2. 固定後、大腿部下部の穴から膝蓋骨接続用バンドが外れている場合は、膝部を折り曲げ、再度差し込んでください。
膝部の接続が完了します。



組立について

< 股関節部の組立 (写真は右股関節部) >


1. 3箇所の脚接続用ボルト(部品番号31)を外し、脚接続部品(部品番号20,21)を胴部から取り外します。

脚接続部補強部品(部品番号22,23)は分解及びセット時共、胴部から取り外す必要はありません。


③①
頭・胴体/脚接続用
ボルトM8×35×6



左右脚接続部品 ②① 左右脚接続部補強部品 ②③

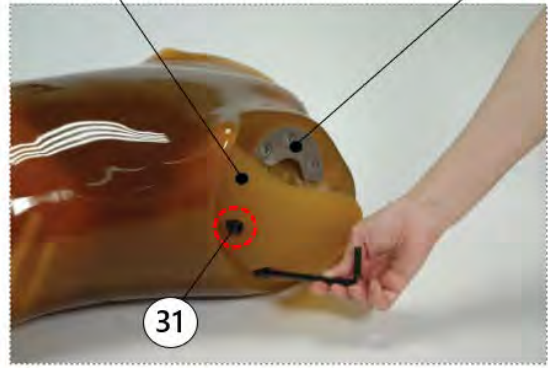


2. 大腿部(部品番号8,9)を胴部下部にセットします。大腿上部の球体部分を胴部下部の穴にあてはめ、脚接続部品(部品番号20,21)を被せ、脚接続用ボルト(部品番号31)で片側3箇所固定します。

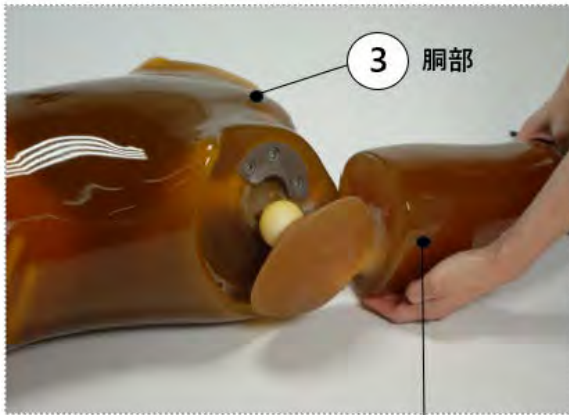

左右大腿部 ⑧⑨



③① 左右脚接続部品 ②①


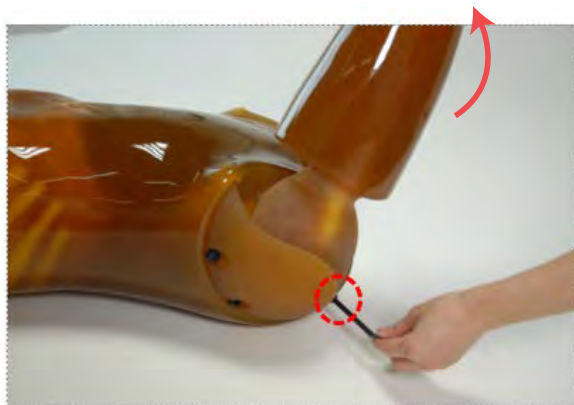


.....
ボルトは中央部から固定し、お尻側のボルトは脚部を前方に持ち上げると、固定しやすくなります。
大腿部は左右で形状が違いますので、取り違えないようよくお確かめください。


組立について

< 頭部固定用台の組立と頭部の接続 >

1. 首部接続部品 (部品番号 36) と頭部の底部分を、頭・首部接続用ボルト (部品番号 27) 2本で固定します。

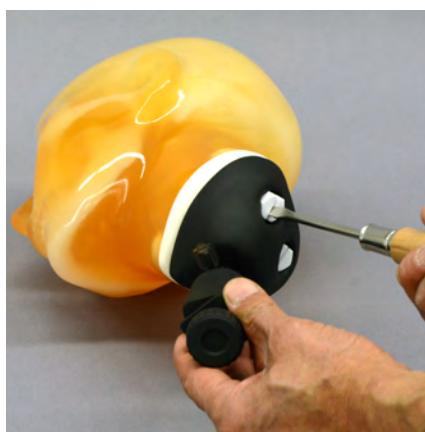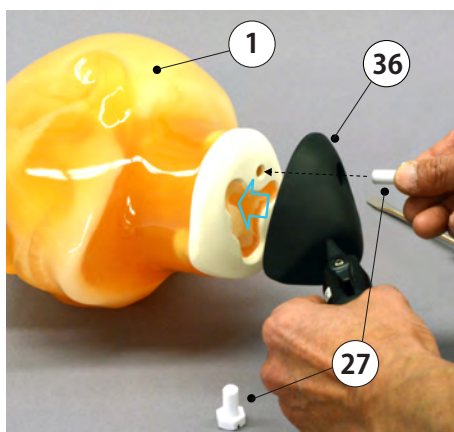




27 頭・首部
接続用
ボルト
M10×15×2

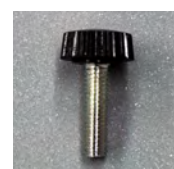

2. 頭部固定用台を組み立てます。上下位置固定柱 (部品番号 34) と底板 (部品番号 35) をノブ付ボルト (部品番号 39) 2本で固定します。

次に首部接続部品 (部品番号 36) の端の凸部を上下位置固定柱のスリットに差し込み、ノブ受け板 (部品番号 37) を通した高さ固定用ノブ付ネジ (部品番号 38) で固定します。

39 ノブ付ボルト
M6×18×2

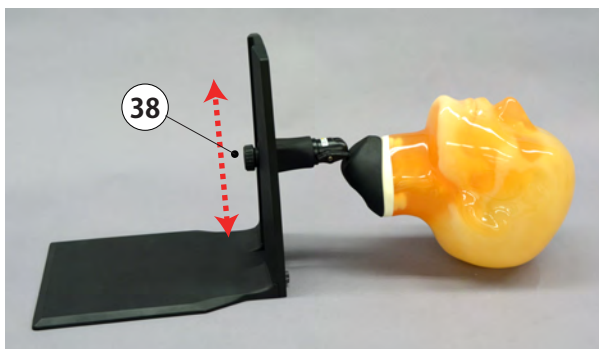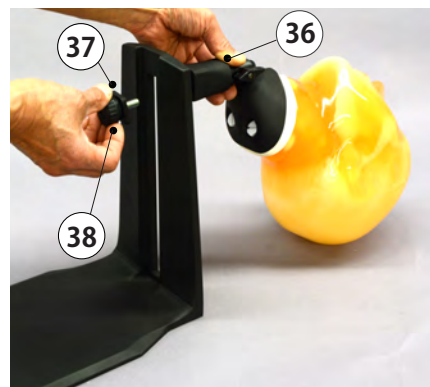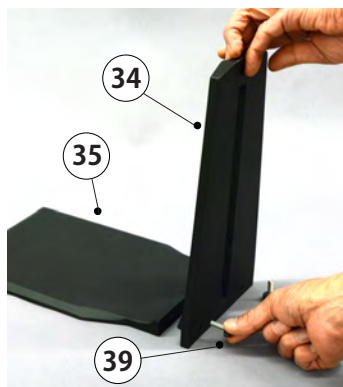

3. 頭部のセッティング完了。

※高さ固定用ノブ付ネジ (部品番号 38) で首を持ち上げる高さを調節してください。



注意

モデル表面に取扱説明書や印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収され消えなくなります。

・ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記(株)京都科学まで御連絡ください。



株式
会社

京都科学

URL : <http://www.kyotokagaku.com>
e-mail : rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

■本社・工場

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL:075-605-2510 (直通)
FAX:075-605-2519

■東京支店

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL:03-3817-8071 (直通)
FAX:03-3817-8075