


可変型乳房ファントム Comp-AY型


3Dマンモグラフィ・圧迫しての撮影用として

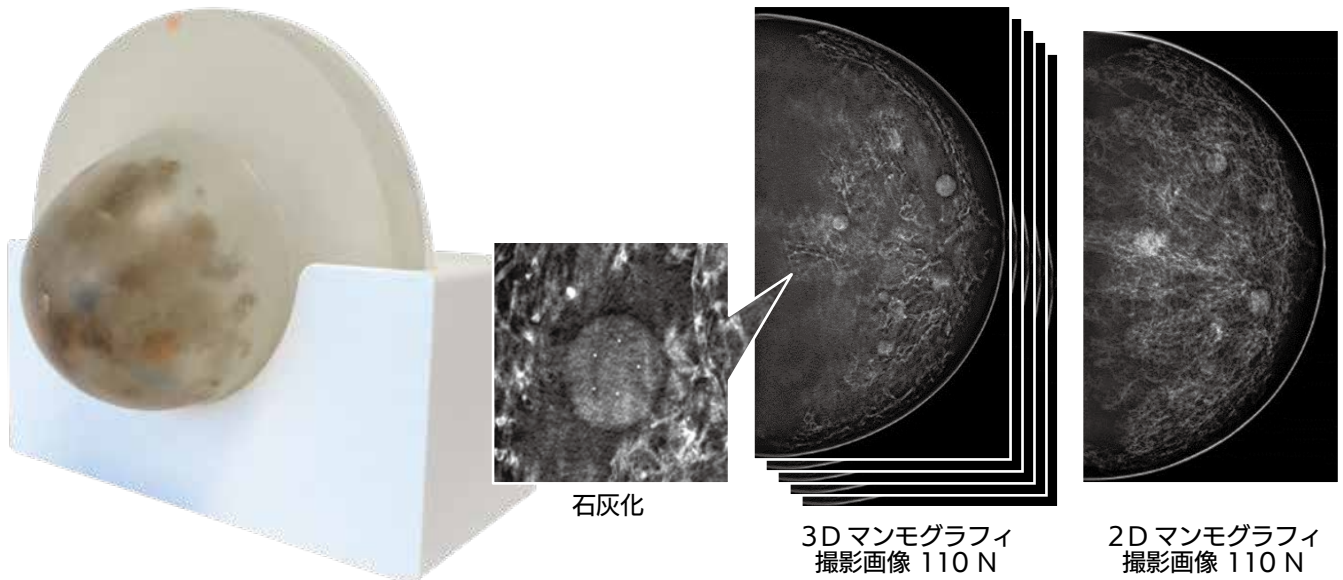


特 長

- 特殊な軟質素材で作られており、実機を用いて実際に圧迫しながら撮影することができます。
- 2Dマンモグラフィ撮影はもちろん、3Dマンモグラフィ撮影も行えます。
- 大きさやX線透過率の異なる腫瘍/模擬乳腺/石灰化がそれぞれ複数個含まれています。
- ファントム本体を回転させることで、内容物の位置を変えて撮影することも可能です。

底面

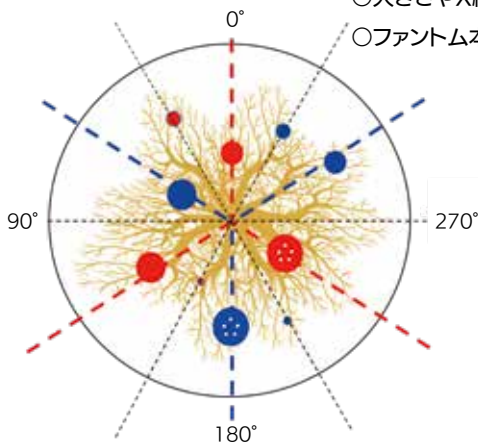

側面

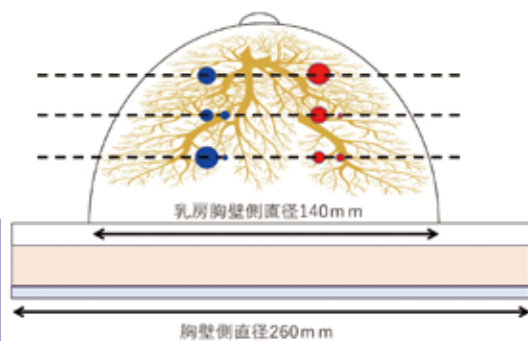

評価項目

- ・2Dマンモグラフィ撮影
- ・3Dマンモグラフィ撮影
- ・撮影条件の検討

低吸収想定腫瘍

高吸収想定腫瘍

直径 2 / 4 / 6 / 8 / 10mm 各 1

直径 2・4mm 同種間→2段階に分けて配置

直径 6・8・10mm 同種間→3段階に分けて配置



10mm の腫瘍内に模擬石灰化を封入
(直径 0.3mm × 5 粒)



3層に分けて配列
模擬乳腺組織

ファントム底面裏側に角度スケール付

可変型乳房ファントム Comp-AY 型


型番 PH-83 | コード No 41956-000

ファントム本体	1体
固定台	1台
1Lタンク(おもり)	1点
収納ケース	1点
取扱説明書	

本 体	ファントム本体
大 き さ	約W30×D27×H24cm
	乳房測定部 直径140×H90mm
	台座部 直径260×H30mm
重 量	約3.1kg (おもりは含めない)
材 質	ファントム本体/ポリウレタン樹脂



関連製品

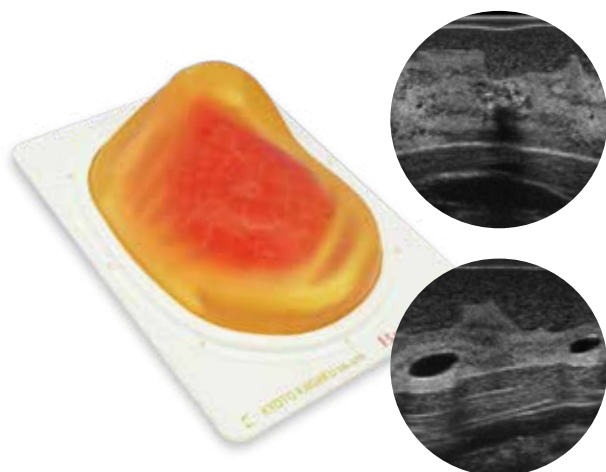


乳房超音波診断ファントム
"BREAST FAN"
US-6 41904-000



マンモステップファントム
AGH-D210F 型
PH-12 41328-020



デジタルマンモファントム
NCCE 型
PH-13 41329-010

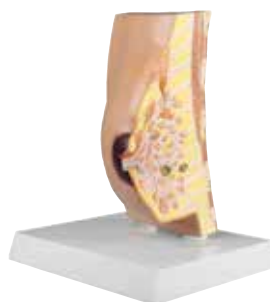

乳房モデル病変付き
EZ-101 13100-000

製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。
このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2025.04

取扱店

製造元



KYOTO KAGAKU

W E B <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
E-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場

〒612-8388
京都府京都市伏見区北寝小屋町 15 番地
TEL 075-605-2510
FAX 075-605-2519

東京支店

〒113-0033
東京都文京区本郷三丁目 26 番 6 号 NREG 本郷三丁目ビル 2 階
TEL 03-3817-8070
FAX 03-3817-8075