



直腸肛門機能検査モデル

型番	コードNo
MW67	11460-000 直腸肛門機能検査モデル
	11460-100 実習セット5個組

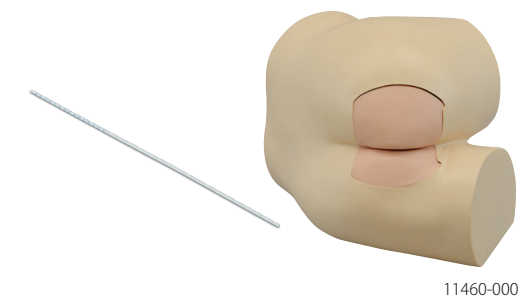

11460-000

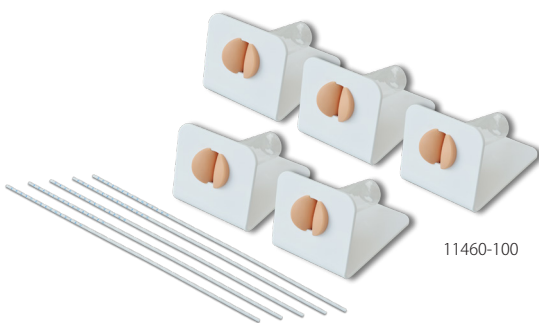

11460-100

直腸肛門機能検査時のトランスデューサ挿入トレーニングに

特 長 (11460-000,11460-100共通)

- 圧カトランスデューサ挿入練習用のモデルです。
- 模擬圧トランスデューサには目盛が付いており、実際のトランスデューサに近似した、しなり具合を再現しています。

11460-000 直腸肛門機能検査モデル

- 臀部付きのモデルですので、挿入だけでなく、患者への配慮も学べます。
- 肛門部ユニットが取り外せますので、どの程度挿入されているのか確認できます。


仕 様	構 成
本 体:成人臀部モデル	モデル本体 1台
大きさ:約W37×D28×H30 cm	直腸ユニット(本体に付属) 1点
重 量:約6.0kg	模擬圧カトランスデューサ 1本
材 質:軟質特殊樹脂	ワセリン 1点
	収納ケース 1点
	取扱説明書

11460-100 実習セット5個組

- 収納場所をとらず、大人数の実習に最適なコンパクトなモデルです。
- 直腸が透明なので、どの程度挿入されているのか目視で確認できます。
- 患者への配慮を学べる臀部付きのモデル(11460-000)との併用を推奨します。

仕 様	構 成
本 体:成人肛門部モデル	モデル本体 5台
大きさ:約W13×D17×H12.5cm (1個あたり)	ボトル(模擬直腸) 5本
重 量:約3.5kg (1個あたり)	模擬圧カトランスデューサ 5本
材 質:軟質特殊樹脂	ワセリン 1点
	収納ケース 1点
	取扱説明書

交換部品

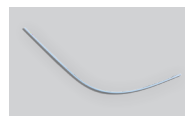

模擬圧カトランスデューサ
11460-010

実 習 項 目

- ・圧カトランスデューサの挿入
- ・挿入長の確認

下肢静脈エコーファントム

型番	コードNo
US-21	41950-000

監修・指導: 鳥根大学医学部附属病院 クリニカルスキルアップセンター長 狩野 賢二



下肢深部静脈血栓症(DVT)のスクリーニングのトレーニングに


特 長

- 血管の蛇行、分岐、血栓を忠実に再現。
- ミルキング可能な血管を内蔵。プローブによる圧迫で血管の扁平化も確認できます。
- 脚の形状に沿った下肢静脈血栓のプローブ走査が学修できます。


仕 様	構 成
本 体:成人下腿モデル	モデル本体 1台
大きさ:約W27×D17×H47cm	腓腹部ファントム(本体に付属) 1点
重量:約3.0kg	タルカムパウダー 1点
材質:軟質特殊樹脂	収納ケース 1点
硬質特殊樹脂	取扱説明書

実 習 項 目


- ・下肢深部静脈血栓のスクリーニング
- ・ミルキングによる血流の観察

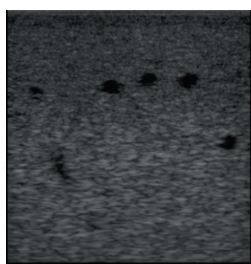


正常血管

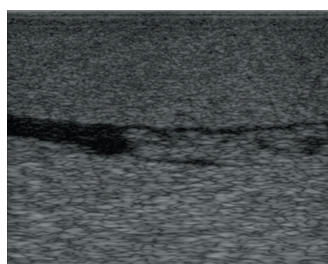

血栓(縦断面)

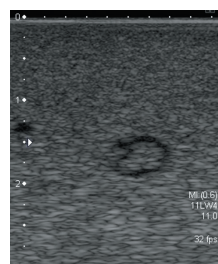

血栓(横断面)

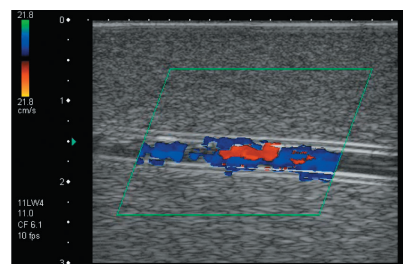

ミルキングによる血流の観察(カラードプラ)