

Ultrasound-Guided Breast Biopsy Phantom


乳腺バイオプシーファントム

US-9 11387-000 2個組（透明+不透明）
 11387-100 2個組（透明のみ）
 11387-200 2個組（不透明のみ）


針先とターゲットの位置関係を、実際の目視と超音波画像を比較しながらトレーニングできる透明タイプと、超音波ガイド下による確実なターゲット採取技術を習得する不透明タイプの組み合わせで、習熟度に応じた段階的トレーニングが可能です。



透明タイプ

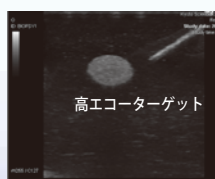

不透明タイプ

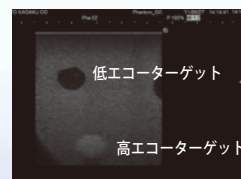

針生検により採取した模擬腫瘍

※超音波診断装置、生検針は含まれません。

US-9 乳腺バイオブシーファントム

■ 特 長

- 細胞診、針生検、マンモトーム生検すべてに対応しています。
- 模擬腫瘍を三層構造に配置、様々な角度と深さへの穿刺トレーニングが可能です。
- 着色した模擬腫瘍により採取の成否を確認できます。

このファントムは一回の実習での使い切りを原則としています。

水溶性の素材を使用しており、外気に触れると乾燥・変質しますので、ご使用時以外は開封しないでください。

- 仕 様
- 大きさ：約Φ160mm×H80mm
 - 重 量：約750g
 - 材 質：ハイドロゲル (hydrogel)

透明タイプ

画像描出と穿刺の基本技術を習得

Step1


針先とターゲットの位置関係を目視と超音波画像を比較しながらトレーニング



模擬腫瘍のサイズ：Φ 6 mm及びΦ 10mm

模擬腫瘍：高エコー（青色）のみ

模擬腫瘍数：12個

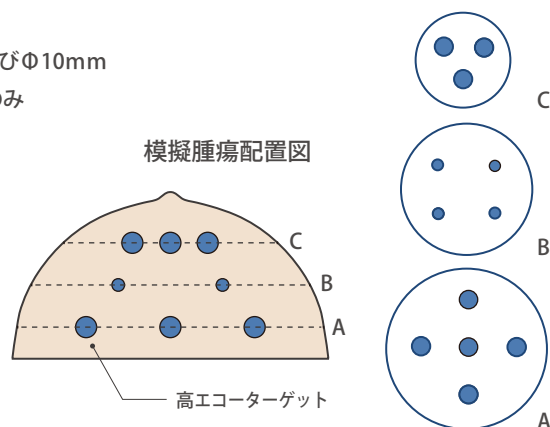

不透明タイプ

より安全で確実な穿刺技術の習得

Step2


超音波ガイド下による確実なターゲット採取技術を習得



模擬腫瘍のサイズ：Φ 6mm及びΦ 10mm

模擬腫瘍：低エコー(赤色)、高エコー(青色)

模擬腫瘍数：12個

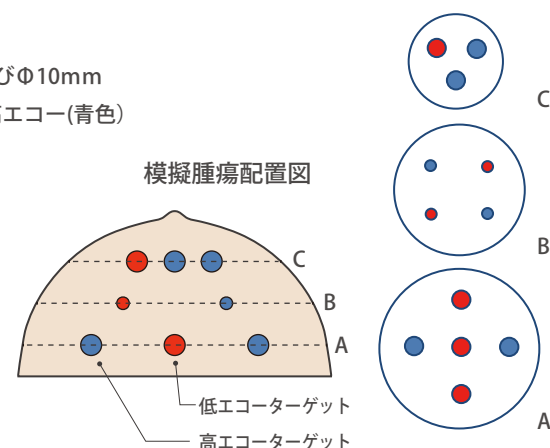

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.12

取扱店

製造元



KYOTO KAGAKU

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075