


US-18

NEW

Fantoma de Ultrasonido Fundamental

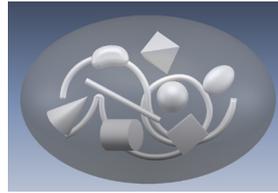


Este fantoma oval ayuda a los ecógrafos en los entrenamientos básicos

CARACTERISTICAS

1 | Fantoma para manipulación básica del transductor de ultrasonido. Reconocimiento de forma, ecogenicidad, distancia y práctica de tareas de transductor horizontales, que son todo lo que se puede aprender con este fantoma oval.

TECNICAS

1 | Interpretación de la forma de los objetos tridimensionales con las imágenes transversales 2D
 10 objetos están incrustados
 Ajustar la compensación de la ganancia variable con el tiempo
 Medir las dimensiones y distancia
 Manejo de transductor para obtener la imagen transversal 2D precisa
 Superficies plana y esferoidal proveen una variación de dificultades

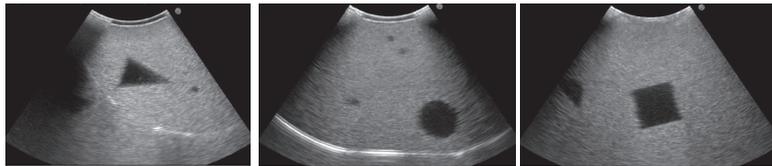

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: L24 x A16 x A11 cm/ L9.5 x A6.3 x A4.3 inch Peso: 2.3kg/ 5lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

MATERIALES

Elastomero de poliuretano
 Libre de látex

REPUESTOS

APARATOS RECOMENDADOS

-

*El aparato de ultrasonido no está incluido.

US-17

NEW

Fantoma de Mano Reumatoide



El examen de ultrasonido es una técnica clave para el diagnóstico temprano de artritis reumatoide

CARACTERISTICAS

1 | Para el entrenamiento de técnicas de examen de ultrasonido de artritis reumatoide
 2 | El engrosamiento de la membrana sinovial e incremento del líquido sinovial son simulados en los dedo medio y anular.

TECNICAS

Examen de ultrasonido de artritis reumatoide

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 17 x 5 x 21 cm
 6 x 2 x 8 plgds.

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniquí de mano
- 1 manual de instrucción
- 1 caja de almacenamiento

MATERIALES

Elastómera de poliuretano
 Libre de látex

REPUESTOS

-

APARATOS RECOMENDADOS

-

*El aparato de ultrasonido no está incluido.