

介護実習モデル “ケイコ”

型番 MW26 | コードNo 11405-000 | 価格 ¥お問い合わせください

持ち運びが容易

腰部で2分割できるので持ち運びがしやすく
実習室や会議室など、どこでもトレーニング
ができます

| | |
|----------------------|----|
| モデル本体(上半身・下半身に分割可) | 1体 |
| 義歯 | 1式 |
| かつら | 1点 |
| 口腔カバー | 1点 |
| 女性性器ユニット(ケイコ用) | 1点 |
| 男性性器ユニット(ケイコ用) | 1点 |
| 下着 | 1点 |
| 組立部品(ボルト・ナット・座金・スパナ) | 1式 |
| トレーニングモデル用潤滑剤 | 1点 |
| 潤滑剤(導尿・浣腸他用) | 1点 |
| 取扱説明書 | |



| | |
|-----|----------------|
| 本体 | 前期～後期高齢者 全身モデル |
| 大きさ | 身長約 149cm |
| 重量 | 約 15kg |

※パジャマは付属していません ※洗髪は別売のかつらをご使用ください

- 実習用推奨器具**
- 経管栄養：経鼻栄養カテーテル 12Fr.~14Fr. (カテーテルテーパー接続型) / 胃ろう交換用カテーテル 20Fr.
 - 膀胱留置カテーテル 16Fr. (男性用) 14Fr. (女性用)
 - 浣腸：浣腸液 30mL
 - CVポート留置：ヒューバー針 20～22G

交換部品

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| 11405-010 女性性器ユニット (ケイコ用) | 11405-020 男性性器ユニット (ケイコ用) | 11401-080 義歯 | 11229-060 介護実習用口腔カバー | 11229-050 トレーニングモデル用 潤滑剤 | 11381-800 潤滑剤(導尿・浣腸他用) |

別売部品

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | |
| 11404-030 洗髪実習用かつら (ケイコ用) | 11405-030 パジャマ | 12746-020 気管切開チューブⅡ | 11229-070 模擬痰 | 11251-320 模擬座薬(大/小) | 11405-040 模擬便(軟便) |

関連商品

口腔ケア体験セット MY-1 12022-100

口腔ケア実習に必要な介護用
歯ブラシやスポンジブラシなど
をセットしました。



DVD 根拠に基づく生活支援技術の基本(全3巻) 見てわかる利用者主体と自立支援の実践

12977-400 ¥27,000(税別)

移動・移乗、食事、排泄、衣服の着脱
入浴、整容等の支援技術を通して、
利用者主体、自立支援、尊厳の保持
安全・安楽といった考え方を学ぶ
ことができます。



- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元

株式会社 京都科学
 URL <http://www.kyotokagaku.com>
 e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北葦小町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

2019.07 G.1000

介護実習モデル “ケイコ”

地域医療・介護で求められる実践力アップ!
医療的ケアや日常生活援助が必要な人を支える
技術・知識を習得




※かつらと性器交換で患者設定の変更が可能です



介護実習モデル“ケイコ”は、幅広い介護ニーズに対応した技術・知識・コミュニケーションを総合的に習得できる全身実習モデルです



質の高い専門介護職の育成

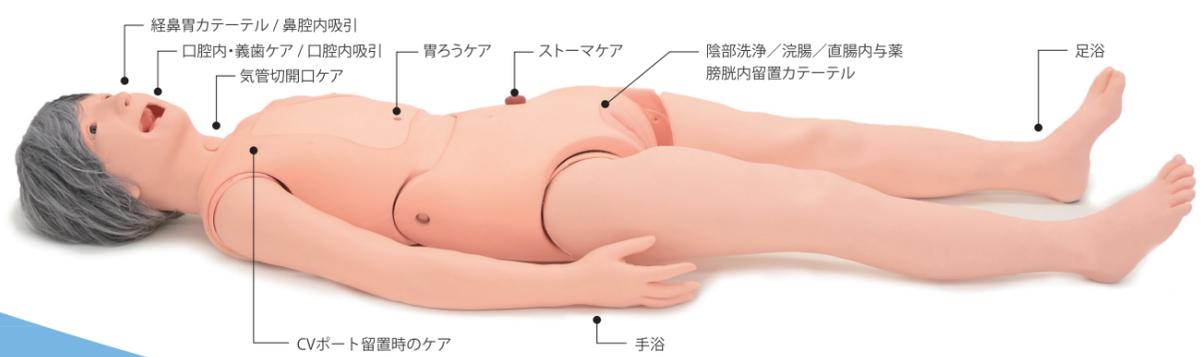

特長

- 医療的ケア：口腔内吸引～経管栄養の手順を体位と共に習得
- 医療処置を受ける高齢者へのケア：CVポート留置時のケアやストーマケアなどを習得
- 日常生活援助：口腔ケア・褥瘡ケアなどを看取りまで含めて習得
- 男性・女性を設定：かつらの取り外しや性器交換で変更可能
- 高齢者全身モデル：独立して座位をとることができ、高齢者に多い膝の曲がりや手足の皮膚のたるみを自然に近い形で再現

実習項目

医療的ケア 解剖を理解しつつ、その人に合ったコミュニケーションで、適切な体位や物品の配置を含めて一連の流れを実習



口腔内吸引
実際に模擬痰の吸引が可能

鼻腔内・気管切開内吸引の手順
気管切開チューブの装着が可能



経管栄養の手順
(経鼻・経口・胃ろう)
鼻腔・胃ろうにカテーテルの装着が可能

医療処置を受ける高齢者へのケア 施設や在宅で医療を必要とする高齢者へのケアを習得



CVポート留置時のケア
CVポートの説明や日常生活援助を習得



ストーマケア
パウチ交換や排泄物の除去を別売品の模擬便を使用し、より臨場感のある実習が可能

日常生活援助 要介護者への日常生活援助を看取りまで含めて充実



口腔ケア
ブラッシング介助や口腔マッサージ、義歯のケアを習得
車椅子やベッド上、経管栄養の利用者へのケアを実習



褥瘡ケア
発生しやすい部位に大きさ・深さ・色調が異なる褥瘡を再現
褥瘡予防に必要なポジショニングやケアを習得



陰部洗浄
汚れが溜まりやすい箇所も洗浄
※男性器の亀頭・包皮の内側
女性器の大陰唇



体位変換
独立して座位をとることができ、体位変換や車椅子への移動の介助を実習

| 日常生活援助 | 医療的ケア | 医療処置を受ける高齢者へのケア |
|---------------------|-------------|------------------|
| 体位変換 | 口腔内吸引 | 自己導尿の介助 |
| 移動(車椅子)の介助 | 吸引の手順 | 膀胱内留置カテーテル留置時のケア |
| 寝衣交換 | (鼻腔内・気管切開内) | 浣腸 |
| 全身清拭 / 部分浴 (入浴実習不可) | 経管栄養の手順 | 直腸内与薬 |
| 洗髪 ※オプション | 死後のケア | ストーマケア |
| | | 体位ドレナージの手順 |
| | | 酸素吸入 |
| | | 胃ろうケア |
| | | CVポート留置時のケア |